

吸引型マウスガード成型器

バキュームアダプター

容易にマウスピース作成が可能です。5.0mmの厚手シートの圧接も可能です。
 本体は鋳鉄製、プラットフォームはアルミ製の為、錆などの心配が無く長持ちします。
 ヒーティングエレメントは左右対称に設計されており、均一に加熱することができます。
 バキューム内蔵型、100Vコンセントのみで使用可能です。



YouTube
 YouTubeで使い方の
 動画も公開しています！



ヒーターエレメントカバー

左右対称のシンメトリーな
 ヒーターエレメント

真空プラットフォーム

耐久性の高い鋳鉄製のベース



挟んだシートの加熱位置（高さ）を
 調整するためのハンドル

フレームを開閉するハンドル

熱と真空を作動させるための
 切り替えスイッチ

本体スペック

サイズ	230×210×366 mm
重量	6.5kg
電源	110V 50/60Hz
消費電力	1,475W

販売価格 68,000円(税別)

一般医療機器医療機器届出番号 23B2X10023000001

関連商品一覧

シリコンスプレー **準備**



模型の上からシュートと一吹き。
 ジスクの分離剤としてお使いください。

販売価格 1,500円(税別)


スプリントシステムキット **準備 成型**



精度の高いスプリント成形を補助します。
 余分なアンダーカット部分を埋めることで、
 模型からの取り外しが容易になります。

販売価格 16,000円(税別)

ジスク用トレー2枚組(角/丸) **準備**

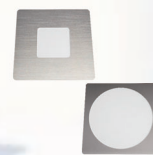

角型ジスクを4分割使用できます。
 丸型は穴部分の直径110mmサイズと
 なっております。このトレーを使うことで
 本製品で丸型シートの成型ができます。

販売価格 各6,000円(税別)

ブロックアウト粘土(500g) **準備**



大きなアンダーカットの
 ブロックアウトにも。

販売価格 1,200円(税別)

ソニックカッター ZO41-II **除去**



ハサミでは切ることの難しかった
 硬くて厚いジスクも、超音波の力で
 楽にカットができます。

販売価格 68,000円(税別)

ハンディートーチ MJ600 **仕上げ**



炎の出ないトーチで焦がしたり変色
 させることなく適度な炎射効果で
 周縁部を滑らかにしたり、艶出しを
 するのに便利です。

販売価格 4,300円(税別)

アルミニウムトレー ハンドル(10入) **仕上げ**




スポーツガード用 ストラップ(10入) **仕上げ**



販売価格 各300円(税別)

スーパーシート(艶出しシート) **仕上げ**

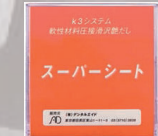

トーチで軟化させたジスクに軽く押し
 付けるだけで艶出しができます。

販売価格 1,200円(税別)

セントリフェーズ キット **仕上げ**



マウスガードへラミネート加工が
 可能になります。
 このキットを持っていれば簡単に
 オリジナルのマウスピースを作成
 することができます。

販売価格 33,000円(税別)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
 Meinan
 www.meinandental.com

2021.3.9 n/a



取扱店

www.meinandental.com

●名古屋本社
 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
 TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム
 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
 TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

