


エムワンプロ **M-ONE PRO**

歯科専用に設計された、高精度3Dプリンター



使いやすさを追求する。

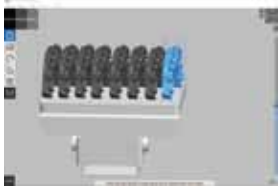

模型やデンチャーなどがしっかり積層できる、
積層エリア135 x 76 x 170mm



タッチスクリーンからコントロールが可能。
ワイヤレスWifiで、パソコンからデータを送信できます。

どこにでもおける、コンパクトサイズ。



W300 x D310 x H490のコンパクトサイズだから、
場所を選びません。
高級感のあるメタルフレームで、ラボ内の印象
がさらにプロフェッショナルになります。

高精度DLPプロジェクターを搭載。

歯科における3Dプリンティングは、デンチャー
や高精度模型など、DLP方式スピードもさること
ながら、精度が要求されます。
M-ONE PROは、Make X社が独自に設計したDLP
プロジェクター「MHD-1」を搭載。耐久性が高く、
プラットフォーム上にコンスタントな波長で光を
照射し、高精度積層を実現しました。



スペック & プライス

サイズ	380x320x490mm
重さ	8kg
電圧	100V
積層領域	135x76x115/165mm
XY解像度	70ミクロン
積層ピッチ	5~150 ミクロン
積層方式	DLP方式
接続	Wi-Fi & USB
光源寿命目安	50,000Hrs
タッチスクリーン	対応
対応os	Windows,Mac
ソフトウェア	X-Maker



標準価格： **¥1,280,000** (税抜)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000339

<http://www.meinandental.com>

■ 製造販売元



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524