

3

D



 YouTube

名南チャンネルにて
放映中！



ハイスピード歯科用3Dプリンター



標準価格：

SLASH PLUS **¥499,800** (税抜)
スラッシュプラス

一般医療機器医療器具届出番号 25B2X10023000343



次世代 **ワイヤレス接続、
モバイル操作にも対応した**
高速3Dプリンター


特徴① ハイスピード積層



スラッシュプラスの最大の特徴は積層スピード。時間との戦いでもある歯科技工現場を高速積層でサポートします！

積層時間：**約25分**（※積層ピッチ100ミクロン）

特徴② 広い積層エリア

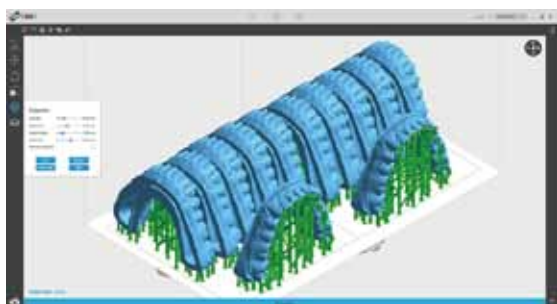

スラッシュプラスは、光線ではなく面で積層していくLCD方式！だから、一つでも、びっしり並べても積層時間は同じです。

W192 x D120 x H200mmの広い積層エリアで、模型や個人トレー、サージカルガイドも一度に積層！

積層時間：**約110分**（※積層ピッチ100ミクロン）

特徴③

高いコストパフォーマンス！

¥499,800 (税抜)

※別途保守サポート契約が必要となります。

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

一般医療機器医療機器届出番号 23B2X10023000343

■ 製造販売元



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

<http://www.meinandental.com>