

サンプル品
ご依頼OK!

リン酸塩系
埋没材

チタン鑄造用

4.5kg
箱

SHERATITAN EASY

チタン専用埋没材

シェーラ チタンイージー

1.6kg


販売価格 **¥13,800** (税別)

一般名称: 歯科高温鑄造用埋没材 一般医療機器区医療機器届出番号: 23B2X10023000389

1. 急速加熱および従来のオーバーナイトにも対応です。
2. 粒子が細かいので鑄造体の表面が非常に滑らかです。
3. 専用液により正確な膨張が得られます。

内容量	4.5kg (180g/25入)
用途	チタン鑄造用
混合比	100g (粉末): 15ml (専用液+蒸留水) 300g (粉末): 45ml (専用液+蒸留水)
作業時間/温度	6~7分/20~23℃
鑄造時間	60分以上係留
急速加熱	対応 (850℃/45分以上)

鑄造後の高い
フィッティング精度

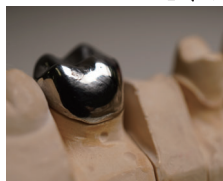

㈱メディナ様にて、チタン鑄造検証の
ご協力を頂きました。

様々な症例に

金属床の他にも、
クラウンブリッジの鑄造にも
使用できます。

操作性も抜群

作業時間も長く、さらに
粒度も細かいので非常に
練和がしやすいです。

フィッティングもバッチリで、
すぐに次の工程へ進めることがで
きます!



営業メンバーの声

**シェーラ社製品以外でのご使用の場合、
検証結果と異なる場合がございます。

埋没材専用の混合液

シェーラリキッド

1L ¥4,200-
5L ¥14,800-

正確な膨張を促す、
シェーラ社埋没材専用の混合液です。

チタン埋没材専用の高濃度混合液

シェーラリキッド エクストラ

1L ¥4,800-

ガス放出性が高い、バイオキャストイング
ライナー

シェーラ リングライナー

幅 50x 厚 1mm
合計 25 メートル
¥4,500-

シェーラ マッフルリング

3x S Φ47cm ¥7,000-
6x M Φ58cm ¥7,500-
9x L Φ75cm ¥8,000-

シェーラ マッフルリング MG

¥8,000-

金属床用
(デンチャー用)
マッフルリング

表面張力を下げて
埋没材の流動性を上げる
界面活性剤

シェーラ リラクサ

スプレー50ml ¥1,400-
諸替用 500ml ¥7,000-

サンプル品
ご依頼OK!

全方位の膨張を促す、
軟性のクラウン・ブリッジ用
マッフルリング

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2022.09.21 n/a

www.meinandental.com

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
Meinan
www.meinandental.com

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店