

ドイツ製の  
タンゲステン  
カーバイド使用

硬いメタルも  
軽々と切削、  
高強度な設計

毎日パワフルに使える、  
FG用カーバイドバー。

折れにくくて削りやすい、  
日々発生するコストを  
しっかり抑えます。

# Bur+Plus



1931

1958

バープラス ゴールド

メタル除去用

330

1557

1558



バープラス


天然歯治療用

# 高い切削力と耐久性、どちらも実現。

## 高切削力(約40g)と高耐久性

ドイツ製タングステンカーバイドの刃と安定した軸により、価格以上の高い切削力を実現しました。

また、ツーピースのカーバイドバーによくあるネック部（刃部）が破折してしまう使用上のトラブルを根本的に解決しており、治療時のストレスを大きく削減できます。

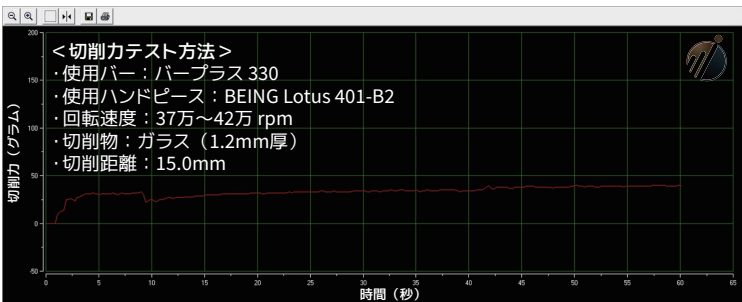

## 人気の形状から選べます

人気のある形状でラインナップをご用意しました。

### メタル除去用

### 天然歯治療用



# 破折しにくい設計、思う存分つかえる。

### メタル除去用 バープラスゴールド各種



ドイツ製タングステンカーバイド

1本彫で、高品質なドイツ製タングステンカーバイドを使用しています。安定した性能でメタル除去作業を行いたい方へおススメです。

### 天然歯治療用 バープラス各種



ドイツ製タングステンカーバイド

ステンレススチール

ブレイジング溶接 一番太い箇所で溶接をしているので、折れにくく、軸ブレが少ないのが特徴です。

カッター部（刃先）はドイツ製タングステンカーバイドを使用しています。従来の根本から破折するFG用カーバイドバーの溶接ポイントの設計を見直し、高耐久性を実現しました。

# ラインナップ

各バー性能：推奨回転数 300,000rpm以下  
最大許容回転数 450,000rpm



### 天然歯治療用 バープラス各種

ツーピース構造  
各1シート5本入 **¥980 (税別)**

一般的名称：歯科用カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：23B2X10023000365

### メタル除去用 バープラスゴールド各種

ワンピース構造  
各1シート5本入 **¥1,780 (税別)**

一般的名称：歯科用カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：23B2X10023000366

製造販売元

## 名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610  
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F  
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

お取扱店

