

治療時のゴースト（二次残像）をしっかりとカット フロントサーフェスマirror

くっきりとしたシャープな像で、治療時の視認性を高めます。

原寸大
サイズ



3P (Φ20mm)



4P (Φ22mm)




5P (Φ24mm)

製品特徴

分かりやすいパッケージデザインを採用

両側面にサイズが表記されているため、箱を積み重ねてもミラーのサイズをすぐに認識できます。

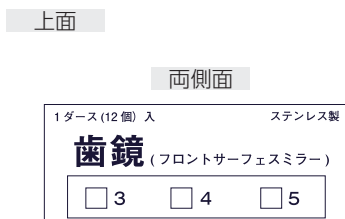

ゴーストがしっかりと抑えられる、鏡面仕上げ

鏡面仕上げのため、ゴーストが発生せずに歯牙をくっきりとシャープな像で視認できます。



フロントサーフェスマirror



通常加工のミラー

ゴースト
(二次残像)

仕様及び滅菌情報

材質	ステンレス
コーティング	クロム
反射率	84.0%
オートクレーブ	131℃ / 60~分 (最大 131℃)
乾燥温度	121℃
煮沸温度	95℃~97℃
推奨薬品	アルコール
入数	12個入 (箱)

一番人気!

商品コード	商品名	直径(サイズ)	販売価格
005617	フロントサーフェスマirror 3P 12個入	Φ20mm	4,980円 (税別)
005618	フロントサーフェスマirror 4P 12個入	Φ22mm	
005619	フロントサーフェスマirror 5P 12個入	Φ24mm	

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000393

関連商品

拡大鏡用歯鏡

サーフェスマirror mini (顕微鏡用)

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10015000228

顕微鏡やルーペとの併用に丁度いい、直径10mmのミニサイズです。回転と固定の取り回しがしやすい、角型ハンドル(右部商品参照)を採用。ゴーストの出ない「表面反射式」のサーフェスマirrorです。



販売価格 1,200円(税別)

歯鏡用ホルダー

ミラーホルダー角(5本入)

一般医療機器医療機器届出番号：13B3X00117000021

フロントサーフェスマirrorと合わせてお使いください。角型ハンドルとなっているため握りやすく、軽い国産ハンドルです。もちろん、オートクレーブ(135~140℃)にも対応しております。



販売価格 1,800円(税別)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

2023.12.21 N/A

Meinan
名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

●名古屋本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
●東京オフィス・ショールーム 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610 TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店