


2021/2022

商品総合カタログ

Products Catalog

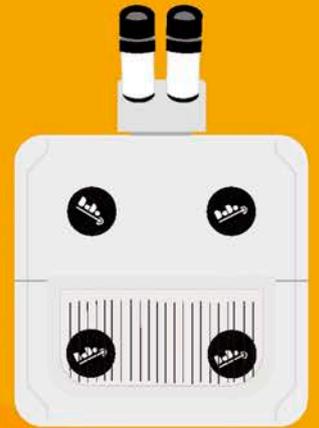

名南歯科貿易株式会社

診療用器材

P.5~

- シャドーレスルーペ 6
- パットカムワイヤレス 7
- ペリオビジョンII 7
- グローバル マイクロスコープ 8
- サーフェスマイラー mini (顕微鏡用) 9
- マイクロピンセット 9
- マイクロニードルホルダー 9
- マイクロシザーズ 9
- リトラクターチップ 10
- リトラクターハンドル 10
- スカルペルブレード 10
- スカルペルハンドル 10
- フラップホールディングプライヤー 11
- エンドファイルホルダー 11
- ペリオスチール 11
- ガッタパーチャリムバー 12
- MTA コンポジット インストルメント CLEE 12
- MTA ブロック 12
- 名南フロントサーフェスマイラー 13
- ミラーホルダー 角 13
- コーク型ピンセット 13
- パーラス 14
- SS ホワイト カーバイドバー 14
- SS ホワイト グレートホワイト Z 14
- アルペン スピードスター 15
- アルペン カーバイドバー 15
- キューーン NEO 16
- インパルスシーラー カッター付 2010HC 16
- マグネットシーラー 16
- セルフシールパウチ 17
- リテーナーボックス 17
- ステンレストレー 17
- 抗菌デンチャーボックス 17
- ソニックデンチャークリーナー 17
- リーマーボックス 18
- フォーマ パノラマフィルム 18
- カットオフ 18
- 局部回転トレー 18
- 名南デンタルエックスレイフィルム 18
- ミクロアプリケーター 18
- ジェラートプロフィペースト 19
- プロフィカップ 19
- プロフィブラシ 19
- プロフィポイント 19
- プロフィポイントブラシ 19

デジタルソリューション

P.21~

- 3D スキャナー UP300 22
- EXOCAD 22
- バーチャルモデルビルダー 23
- デュアルアナログ/スキャンボディ 23
- オーソアアッププレミアム (モデルビルダー付き) 24
- オーソアアップモデルビルダー 24
- イージーベース 25
- ディジステル 25
- アシガ PRO 4K 80UV 26
- ビルドトレ 26
- アシガ MAX UV 27
- ガラスボードキャビネット 27
- デンタモデル 28
- デンタキャスト グリーン 28
- スーパーキャスト V3 28
- デンタライ A2 29
- デンタガイド 29
- デンタガム 29
- デンタ IBT 29
- DETAX フリープリント デンチャー/テンプ 30
- オトフラッシュ G171 N2 31
- 爆洗 W-113MK II 31
- R5 32
- Z4 32
- K5+ / K5 32
- S5 33
- vhf ミリングバー 33
- K4 33
- Z1CAM PRO 33
- ミーム シンタリングファーン HT-2 34
- ミーム シンタリングファーン HTS-2 35
- ミーム シンタリングファーン TABEO 35

技工用器械

P.37~

- マスター S3D 38
- マスター S 38
- DaDo アルゴン 39
- マスター S 用ベーススタンド 39
- 名南メタルブラシ 39
- バリオ SC 42
- フレックスリング 42
- ハニカムトレ 42
- バリオバランス 計量器 42
- プランジャー 42
- ポーセレンホルダー 直/曲 43
- ツイザー 直/曲 43
- イージーグリップ 43
- ラボベンチ 44
- ラボユーズ マイクロスコープ REACH (リーチ) LED 付 45
- ラボユーズ マイクロスコープ PAL (パル) LED 付 45

技工用器械

- セントトリマー 46
- ドライトリマー 46
- モデルトリマー 46
- レイフォスター ダストコレクター 47
- ハイスピードグラインダースピードコントロール付 47
- サクシオンユニット Z1 ECO PRO 48
- サクシオンユニット Z1-M10 49
- ザブラー クリーニングホースセット 49
- デンタグラフ TK バージョン 50
- パラワックス 50
- SMT サーベイヤ 可動式 (モデルテーブル付) 50
- ハンディーエコ マイクロモーター 51
- コンビマイクロモーター 51
- N7 マイクロモーター 51
- エアターボ MAT-300W 51
- デュナフォームプラス 52
- ソニックカッター ZO-41 II 52
- バキュームアダプター 53
- スプリントシステムキット 53
- ジスク用トレ 2 枚組 (角) 53
- ジスク用トレ 2 枚組 (丸) 53
- シリコンスプレー 53
- ドゥ・スポーツ ファンガード 54
- ドゥ・スポーツ グリッターガード 54
- セントリフューズ 54
- スポーツマウスガード 55
- ドゥ・スポーツ 55
- コンビロックプラス 56
- マウスガード 56
- ブラキシズムスプリント 56
- 個人トレ 56
- コーピング 57
- アルミニウムトレハンドル 57
- ホットエアハンディートーチ 57
- ベースプレート 57
- V.A 用ブロックアウト粘土 57
- スーパーシート 57

技工用材料

P.59~

- シェーラ キャスト 60
- シェーラ ベスト RP 60
- シェーラ マジックグリーン 60
- シェーラ チタンイーザー 61
- シェーラ フィーナ 2000 61
- シェーラ リラクサ 62
- シェーラ マップルフリング 62
- シェーラ バイオキャストイングライナー 62
- シェーラ リキッド 63
- シェーラ リキッドエクストラ 63
- シェーラ ポル 705 63

技工用材料

- シェーラ ダイアルクス 63
- シェーラ ピュア 64
- シェーラ プレミアム 64
- シェーラ ヴックフルッシー 64
- ステンシルエコ 85 65
- ベネシル 65
- 沈澱くん 65
- パイブレーター 65
- アドシルラピッド 66
- オートシリコンディスペンサー evo 66
- レプリシル 67
- フラスコセット 67
- スタビライザー 67
- デンタルワックス 68
- 名南 UV パターンシリンジ 68
- ビッグコーン シリコンポリッシャー 69
- 名南豚毛レーズブラシ 69
- ウルトラシンジスク 69
- フェルトホイール ソフト 69
- カットオフディスク 69
- ヒートレスホイール レギュラー 69
- レッドフラッシュディスク 69
- ミジー ヒートレスホイール 69
- ミジー ヒートレスホイール ホワイト (微粒子タイプ) 69
- 技工用カーバイドカッター 70
- ボルケーノ 72
- ミリング用バー 73
- セントトリマドリル/ハンドピースドリル/
ダウエルピンドリル 73
- 名南 ダウエルピン 74
- カットイットノコ刃 74
- ワークボックス 74
- ダイロクトレー 74
- 名南モデルフォーマー 74
- 技工物ミニボックス (黒) 75
- スケルトン技工物ミニボックス 75
- ナショナルブローパイプ 75
- ミニトーチ 75
- インジェクター用アルミ容器ドーム型 75
- メジャリングデバイス 75

各商品への表示マークのご説明

	デモ器取り扱い商品です。 お問い合わせの上、お貸出し可能です。
	サンプル品のご用意があります。 お気軽にお問い合わせください。
	YouTube に動画があります。 詳細については、名南チャンネルまで アクセスしてください。

名南営業メンバーの声・ユーザーの声も
いろいろな商品に入れています。
ぜひチェックしてみてください!



営業メンバーの声

会社情報

会社概要



感謝と挑戦を忘れず、歯科医療と製造の現場に価値あるモノとサービスをお届け、全社員の幸せと会社の繁栄を実現します。

ー日本全国の歯科を愛する皆様へー

名南歯科貿易は、2021年で創業40周年を迎えました。創業の地、名古屋市南区から「名南」と社名をとって40年が経過し、今ではデジタル機器から技工用器材、ソフトウェアから歯科診療用材料まで幅広く販売する歯科商社へと発展してまいりました。

我々のミッション

価値あるモノとサービスを世界中から探し出し、「わかりやすく」「使いやすく」そして「安心して」お使いいただけるよう、日本のお客様にお届けすることだと考えています。歯科の医療現場で働く方々を想像しながら製品開発を心がけ、「名南らしい製品だね!」と褒めていただけることを常に目標にしています。

デジタル製品の活性化

近年、デジタル技術の進化のスピードは非常に早く、歯科業界でも生産性を高める必要性の高さから、多くのシーンでデジタル製品が活用されるようになってきました。当社も、「アナログ(匠の)技術とデジタル技術の融合」を合言葉に、歯科医療現場の進化に貢献するための製品販売に力を入れています。

情報発信

歯科医療に携わるすべての皆様に、できるだけ早く正確に情報をお伝えしたいと考え、2017年からYouTube「名南チャンネル」による製品紹介の動画配信を開始しました。最近ではSNSやウェブセミナー等での情報発信にも力を入れています。

ワールドワイドなチャレンジ

現在では、海外8カ国以上(アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、中国、韓国等)、国内数社の歯科材料、機械メーカーとの取引をしています。各取引先メーカー様からも、日本代理店として高い評価と期待を頂いております。そしてこれからも、常に一歩先をいく高品質な製品を、お求めやすい価格にてご提供し、全社員一丸となって歯科医療発展の一端を担っていきたくと考えております。名南歯科貿易は、日本の歯科業界が培ってきたアナログの「匠の技」と、デジタルの「最新技術」を融合させる、そんな「橋渡し」ができる企業になって行きたいと考えています。



代表取締役社長

新美 洋平

診療用器材

- シャドーレスルーペ 6
- パットカムワイヤレス 7
- ペリオビジョンII 7
- グローバル マイクロスコープ 8
- サーフェスマラー mini (顕微鏡用) 9
- マイクロピンセット 9
- マイクロニードルホルダー 9
- マイクロシザーズ 9
- リトラクターチップ 10
- リトラクターハンドル 10
- スカルペルブレード 10
- スカルペルハンドル 10
- フラップホールディングプライヤー 11
- エンドファイルホルダー 11
- ペリオステール 11
- ガッタパーチャリムーパー 12
- MTA コンポジット インスツルメント CLEE 12
- MTA ブロック 12
- 名南フロントサーフェスマラー 13
- ミラーホルダー 角 13
- コーク型ピンセット 13
- バープラス 14
- SS ホワイト カーバイドバー 14
- SS ホワイト グレートホワイト Z 14
- アルペン スピードスター 15
- アルペン カーバイドバー 15
- キューン NEO 16
- インパルスシーラー カッター付 2010HC 16
- マグネットシーラー 16
- セルフシールパウチ 17
- リテーナーボックス 17
- ステンレストレー 17
- 抗菌デンチャーボックス 17
- ソニックデンチャークリーナー 17
- リーマーボックス 18
- フォーマ パノラマフィルム 18
- カットオフ 18
- 局部回転トレー 18
- 名南デンタルエックスレイフィルム 18
- ミクろアプリケーター 18
- ジェラートプロフィペースト 19
- プロフィカップ 19
- プロフィブラシ 19
- プロフィポイント 19
- プロフィポイントブラシ 19

拡大鏡 (スコープ)


ドクターチェア

インスツルメント

カーバイドバー

集塵機

その他 関連機器材

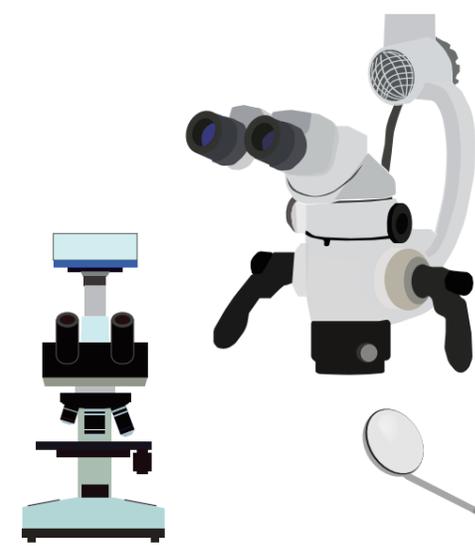

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

名南公式 YouTube チャンネルにて 新商品や使い方動画を公開しています!

歯科用ルーペ

商品番号：下記参照

シャドーレスルーペ

影を軽減させる歯科用ルーペ



低価格で使いやすい歯科用ルーペをご提供

専用ケース付きで訪問診療での持ち運び、院内保管に最適です。ダイヤル調整式のテレスコープがセットに含まれており、すぐにご使用いただけます。2つのLEDライトパーツを上へ移動するとライトが自動オフになります。バッテリーのロングライフも実現して安心してお使いいただけます。

本体、テレスコープ、ルーペを装着した場合の重さは181gのため、とても軽くて診療中でも負担が少なく使用できます。



使いやすさを追求された設計で作業の邪魔になりません。


額と頭頂部・後頭部の3点でしっかりサポート。使用中のズレを抑えます。

メガネや他社製ルーペをかけたまま併用できます。ライト部分の上げ下ろしでLEDライトのON/OFFができます。



営業メンバーの声

LEDライト部分を下げると自動オン！

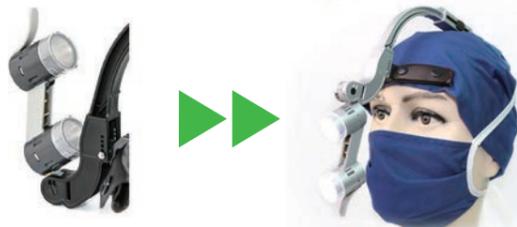


LEDライト部分を上に上げると自動オフ！

** 後ろのダイヤルで光量調整が可能です。

2つのLEDで影の発生を抑制

上下2ヶ所の「シャドーレスライトシステム」によりインスツルメント等の影が出にくくなっています。

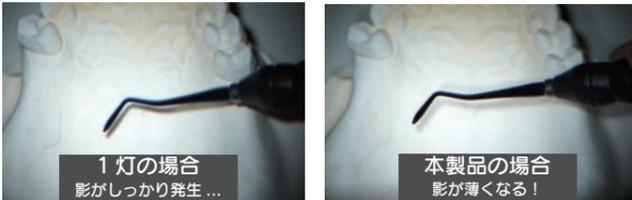

3色から選べる多彩なカラー展開

スタンダードなシルバー、落ち着いたブラック、お子様向けの良いピンクの3色をご用意。医院内の雰囲気に合わせてお選びいただけます。



商品番号：001381 商品番号：001383 商品番号：001382

テレスコープとルーペ以外が全て揃う、シャドーレスライトのみの販売も可能です。

標準付属品で可変倍率型テレスコープを採用

瞳孔間距離 (PD) を調整するダイヤルと、倍率を調整する2つのダイヤルが装備されています。工具不要でカンタンに調整が行えます。



倍率は2.5~5.0倍になります。
焦点距離
2.5倍時：250~650mm
5.0倍時：200~300mm

テレスコープ
単体価格：
55,000円

付属品 (一部単体販売も可能です)

ルーペ (1.5x)	レジンフィルター イエロー クリア オレンジ	専用バッテリー	充電器 (充電器・ACケーブル)	専用ソフトバッグ
単体価格 10,000円	2入 (単色) 単体価格 1,000円	単体価格 10,800円	ホルダー・ACケーブル 各 4,000円	単体販売無し

長時間駆動のバッテリーを採用

連続使用時間は最大光量で約3時間、最小光量で約10時間が目安です。(2ヶ付属しています。)



サイズ (ヘッドライト部) (W×D×H mm)	115 × 310 × 270 mm
重量	フレーム&ライト：110g テレスコープ：60g ルーペ：11g
バッテリー	連続使用時間目安 最大光量：約3時間 最小光量：約10時間
充電器&ケーブル	100-240V 50/60Hz
推奨保管環境	-5 ~ 45℃
サイズ (専用バッグ) (W×D×H mm)	310 × 190 × 135 mm

シャドーレスライト単体 (テレスコープとルーペ以外が付属)
単体価格 105,000円

シャドーレスルーペセット
本体価格 148,000円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000361

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ワイヤレス口腔内カメラ

商品番号：005650

パットカムワイヤレス

タブレット・スマートフォンでパットと使える



スマホでも、タブレットでも接続可能です。



明るく見やすい画像が撮影可能です。



6基のLEDを搭載。

Wi-Fi 経由でどこでもカンタン接続

タブレットやスマートフォンから口腔内カメラへWi-Fiで直接接続します。このため、インターネットのない訪問先でも気軽に使用できます。

重さも軽量の50gのため、女性でも重さを気にせず使用することができます。ヘッドの大きさも比較的小ぶり、大きく口の開けられない患者様や口腔内の小さい方でも負担をかけずに使用できます。

コストパフォーマンス抜群の性能

1280x720サイズの解像度とLEDライトを6基搭載しており、より鮮明でクリアな画像が撮影ができます。



ユーザーの声

今までの低価格帯の口腔内カメラは画質が悪いのが難点でしたが、このパットカムは十分な画質と明るさが有りました！




専用ホルダー 3,800円



透明ディスボカバー (50入) 1,200円



より透明性が高いシートを採用。プレミアムディスボカバー (50入) 2,000円

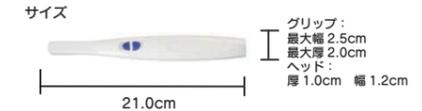

サイズ	上記参照
重量	50.0 g
解像度	1280 × 720 ピクセル
LED ライト数	白色 LED 6基
充電方式	Micro USB 端子経由
対応 OS	iOS (8.1 以上) / Android (6.0 以上) ※ OS 要件を満たしていても、端末によりご使用いただけない場合もございます。
ソフトウェア	専用アプリ「easy in smile」(iOS・Android 用) 「Meinan アプリ」(Android 用) ※ 仕様や名称は変更になる場合がございます。
接続方式	Wi-Fi

本体価格 39,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000354

歯科用光学顕微鏡

商品番号：008382

ペリオビジョンII

コストパフォーマンスの高い、カメラ付属ですぐに使える顕微鏡




様々な出力方法に対応



接眼レンズでも確認可能

光差異を利用したクリアな映像

ライト光の差異を利用するため、染色液を使用しなくても口腔内の細菌**を確認できます。
** 口腔内の細菌によっては特定が難しい場合もあります。

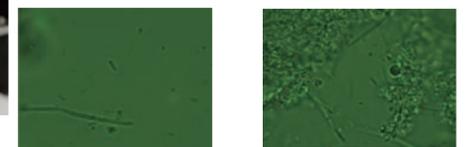

高機能な COMS カメラ

パソコン接続 (USB) とモニター接続 (VGA) の2種類の接続から選べます。フルハイビジョン画質 (パソコン接続時のみ) とフルカラーで表示可能な静止画・動画の両方を撮影できます。

デジタル接続した場合 (USB 出力)



アナログ接続した場合 (VGA 出力)



本体仕様	
サイズ (W×D×H mm)	222 × 260 × 475 mm
重量	7.0kg
電源	100V 50/60Hz
接眼レンズ	10X
対物レンズ	アクロマートレンズ 4X/10X/40X/100X
照明システム	LED 調光機能付き

COMS カメラ仕様	
サイズ (W×D×H mm)	82 × 73 × 38 mm
重量	263g
最大記録画素数	1920x1080
映像素子	1/2.86 型 CMOS
ソフト対応	OS Windows 7、Vista、8、10
ソフトウェア	ScopeImage 9.0
接続方式	USB/VGA

本体価格 158,000円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

拡大鏡 (スコープ)

拡大鏡 (スコープ)

ドクターチェア

インスツルメント

カーバイドパー

集塵機

その他関連機器材

拡大鏡 (スコープ)

拡大鏡 (スコープ)

ドクターチェア

インスツルメント

カーバイドパー

集塵機

その他関連機器材



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！

歯科用マイクروسコープ

グローバル マイクروسコープ

手で倍率と光量すべてを調節可能なマイクروسコープ



直感的な操作感

人間工学を取り入れたデザインにより、長時間の使用でも疲れにくい設計になっています。また、標準搭載されたエクステンションアームにより、アームの関節部が3箇所となりスコープヘッド部の移動が容易に行なえます。



アクシスコントロールシステムの採用

アクシスコントロールシステム™を採用しています。倍率変更ノブはハンドル部に搭載されているので、マイクروسコープを動かしながら倍率の変更が可能です。



撮影もできるので患者様とのコミュニケーションに最適です。



大きな対物レンズで広い視界が得られます。



オフィスデザインに合う、ホワイト基調のデザインです。

固定型と可搬型など、3種類をご用意しております。

天吊タイプ



壁掛タイプ



可搬タイプ



本製品は特定保守管理医療機器です。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000281
一般医療機器届出番号：23B2X10023000282



マイクروسコープのお問い合わせ先は
タカラベルモント様へ

下記のタカラベルモント株式会社のウェブサイトにて
アクセサリなどもご紹介しています。ぜひご確認ください。



<https://www.takara-dental.jp/products/camera/microscope/index.html>



弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

拡大鏡用歯鏡

商品番号：005051

サーフェスマirror mini (顕微鏡用)

マイクروسコープやルーペとの併用で使いやすい大きさです。



原寸大



P.13のミラーホルダー角と組み合わせた場合

マイクروسコープやルーペとの併用にちょうどいい直径 10mm サイズです。回転と固定の取り回しがしやすい角型ハンドルを採用しています。ゴースト(二次残像)の出ない「表面反射式」のサーフェスマirrorです。

ミラーホルダー角が標準で付属します。コストパフォーマンスの高い、マイクロ用ミラーです。

サイズ(W×D×H mm)	10.45 × 10 × 34.55 mm
重量	約 1.8g
ミラー部 横幅	10mm
販売単位	1入

本体価格 1,100円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000228




マイクロ用ピンセット

商品番号：015000

マイクロピンセット

取り回しのしやすいピンセット

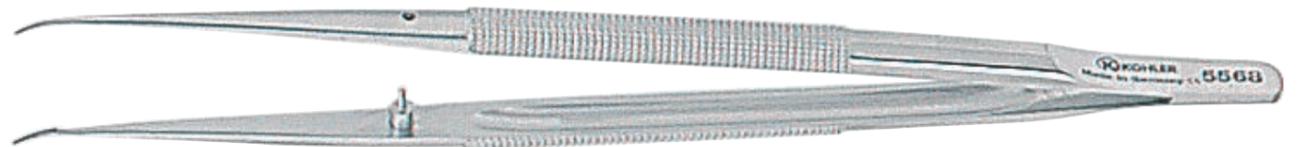

原寸大

保持しながら回転させることができる、使いやすいラウンド(丸型)ハンドルです。

全長(mm)	180 mm
重量	約 35.3g
材質	ステンレス

本体価格 29,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000327



マイクロ用ニードルホルダー

商品番号：015001

マイクロニードルホルダー

タングステン先端でホールド力高



** スペースの関係で写真は縮小されたサイズになります。

ニードルのグリップ力を高めるため、つかみ部分にタングステンカーバイドを使用しています。保持しながら回転させることができる、使いやすいラウンド(丸型)ハンドルです。

全長(mm)	180 mm
重量	約 30.5g
材質	ステンレス、 タングステンカーバイド (先端部分)

本体価格 49,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000328



マイクロ用シザーズ

商品番号：015002

マイクロシザーズ

使いやすい先端カーブタイプシザーズ



原寸大

刃先の精度が非常に高いので、滑らかにカットすることができます。



営業メンバーの声

全長(mm)	115 mm
重量	約 17.3g
材質	ステンレス

本体価格 6,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000329

最も人気の高い、先端がカーブ状になったシザーズです。柄の部分が長く臼歯部にも届きやすい形状です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を公開しています！



名商公式 facebook では
最新ニュースを発信しています！



こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。



こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を公開しています！



商品番号：下記参照

エンド手術用リトラクター

リトラクターチップ


リトラクターハンドルと組み合わせて使える交換用チップ



原寸大

ペンシルベニア大学のキム教授がよく使うチップをラインナップ！先端がギザギザ形状で、滑りにくいデザインです。

** リトラクターハンドルとリトラクターチップ (3 種) は別々の販売となります。

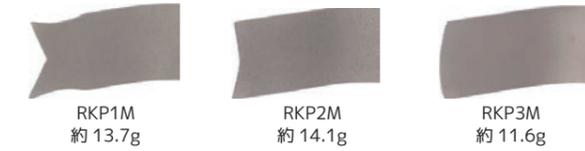

RKP1M 約 13.7g

RKP2M 約 14.1g

RKP3M 約 11.6g

RKP シリーズ共通	
全長 (mm)	95 mm
材質	ステンレス

商品番号	商品名	本体価格
015006	リトラクターチップ RKP1M 95mm	各 6,800 円
015007	リトラクターチップ RKP2M 95mm	
015008	リトラクターチップ RKP3M 95mm	

一般医療機器届出番号：23B2X10023000302

商品番号：015005

エンド手術用リトラクター

リトラクターハンドル

ドクターキム考案の疲れにくいグリップ形状！



原寸大

ペンシルベニア大学のキム教授が徹底的にこだわったグリップ形状で、長時間握っても疲れません！チップ交換可能なリトラクターハンドルです。

** 上のチップと合わせてご使用ください。

全長 (mm)	115 mm
重量	約 88.1g
材質	ステンレス

本体価格	8,800 円
------	---------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000302

商品番号：015004

開切用インスツルメント

スカルペルブレード

先端がコンパクトなブレード



日本で最も人気のある #3565 番手の 6 枚セット商品です。先端がコンパクトで、切れ味も抜群です。

** 下記のスカルペルハンドルと合わせてご使用いただけます。



先端拡大写真

重量	約 0.3g/個
材質	ステンレス
入数	6 個入り

本体価格	17,800 円
------	----------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000331

商品番号：015003

開切用インスツルメント

スカルペルハンドル

使いやすく、洗浄もしやすいラウンド型 (丸型) ハンドル。



原寸大

スロット径は、0.7mm で USA 標準サイズのブレードに対応しています。回転しやすいラウンド (丸型) ハンドルです。

全長 (mm)	138.4 mm
重量	24.3g
材質	ステンレス

本体価格	9,800 円
------	---------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000330

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

商品番号：015024

インプラント手術、ペリオ治療用インスツルメント

フラップホールディングプライヤー

歯肉の保持から切開した歯肉を戻す作業までをこちら 1 本で！



原寸大



フラップホールディングプライヤー



一般的なピンセット

切開した歯肉の保持と移植骨ブロック設置後、切開した歯肉を戻す作業をこちら 1 本で作業することが可能です。


インプラント手術のために専用開発



インプラントのための骨増生手術の際、フラップ (切開された歯肉) を掴むために設計されたインスツルメントです。

2つの支点で面でホールド可能

ブロック骨の保持にも便利です。テンション状態のまま保持できるため、穴を開けたい作業がしやすくなっています。

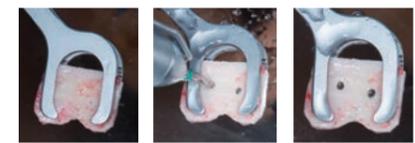

膜部分の保持にも便利です。縫合時も手元をクリアにできます。

発売開始直後から大好評！治療の際に絶対にお役に立てる商品です！



営業メンバーの声

全長 (mm)	145 mm
重量	約 26g
材質	ステンレス

本体価格	9,800 円
------	---------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000390

商品番号：015016

手用ファイル保持ピンセット

エンドファイルホルダー

視界クリア & 届きにくい臼歯の「近心根、遠心根」まで簡単アクセス！



原寸大

** 使用されるファイルによっては挟め無い場合があります。



近心時

遠心時

指が邪魔にならず視界が確保できるため、口腔内が見やすくなります。必要以上に口を大きく開ける必要がないため、患者様の負担を軽減できます。「近心根、遠心根」に対応できる 2 通りの挟み方で、今まで届きにくかった前歯裏や臼歯にもアクセスしやすくなっています。

全長 (mm)	155 mm
重量	約 30.7g
材質	ステンレス

本体価格	9,800 円
------	---------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000301

商品番号：015009

ペリオ用インスツルメント

ペリオスチール

程よい柔軟性と強度でフラッピングを強力サポート！



原寸大

歯肉を骨から剥がすフラッピングに便利なインスツルメントです。使いやすさと滑りにくさを考慮した丸型ハンドルです！

全長 (mm)	167 mm
重量	約 34.4g
材質	ステンレス

本体価格	7,800 円
------	---------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000332


弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

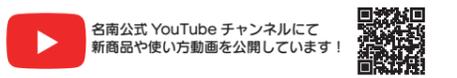

名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！

商品番号：下記参照

ガッタパーチャリムーバー

ガッタパーチャを除去するために特別に設計された、寺内吉継先生デザインのリムーバー



全長 (mm)	155 mm
重量	約 11.8g
材質	ステンレス / PEEK 材

商品番号	商品名	本体価格
015021	ガッタパーチャリムーバー EGPR-L/R26 PEEK	各 24,800 円
015022	ガッタパーチャリムーバー EGPR-U/D26 PEEK	
015023	ガッタパーチャリムーバー ELES 18/26 PEEK	
015010	3本セット	69,800 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000333

ELES で挿入口を作り、EGPR でガッタパーチャを効率的にかき出します。
歯根に挿入しても視界を保つために限界まで細く設計された 0.3 ミリの「返し」が最大の特徴です。

商品番号：015015

MTA コンポジット インスツルメント CLEE

MTA のデリバリーのしやすさにこだわった専用インスツルメント



原寸大

MTA セメント専用のデリバリーインスツルメント。
ブラックコーティングで照明の光反射が軽減ため、治療に専念できます。
MTA ブロックとセットでお使いください。垂直方向と水平方向に平らな面が双頭になっており、それぞれをデリバリー用 (D) と余剰カット用 (C) に使います。
** ケミクレーブは避けください。

全長 (mm)	158 mm
重量	約 11.9 g
材質	ステンレス / PEEK 材

本体価格	10,800 円
------	----------

一般医療機器届出番号：2382X10023000334

商品番号：015014

MTA ブロック

必要な量だけ MTA ペーストを簡単計量



原寸大



全長 (mm)	77 mm
重量	約 6.1g
材質	PPSU 材

本体価格	17,800 円
------	----------

0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm の溝盛りと、レーザー刻印の表記で使いやすくなっています。
** オートクレーブ対応。(材質は PPSU (ポリフェニルスルホン) です。)

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

商品番号：下記参照

名南フロントサーフェスマラー

ゴーストが出ず、クリアに見ることができる鏡面仕上げのミラー



フロントサーフェスマラー 通常加工のミラー
・ゴーストがしっかりと抑えられるため、くっきり視認できます!

他社よりも豊富なサイズ展開をしており、定番の No.4 以外も大好評です！
明るいミラーをお探してしたらこれに決まり！



営業メンバーの声

下記の「ミラーホルダー角」と合わせてお使いいただけます。
ゴースト (二重残像) をしっかりと抑え、明るくシャープな像で視認できます。
** オートクレーブ対応。

コーティング	クロム
反射率	84.0%
材質	ステンレス
オートクレーブ	131℃ / 60~70 分
乾燥	121℃
煮沸	95 ~ 97℃
推奨洗浄薬品	アルコール
入数	12 個入 (1 ダース)

商品番号	商品名	本体価格
005617	フロントサーフェスマラー 3P 12 個入	各 3,240 円
005618	フロントサーフェスマラー 4P 12 個入	
005619	フロントサーフェスマラー 5P 12 個入	

一般医療機器届出番号：2382X10023000393

商品番号：005004

ミラーホルダー 角

国内規格のミラーに幅広く使用できる専用ホルダー



原寸大

名南フロントサーフェスマラーと合わせてお使いいただけます。
握りやすく、軽い国産ハンドルです。
** オートクレーブ対応。

全長 (mm)	128.4 mm
重量	約 10g
材質	ステンレス
入数	1 ケース単位 (5 入)

本体価格	1,600 円
------	---------

一般医療機器届出番号：1383X0011700021

商品番号：下記参照

コーク型ピンセット

クリップしやすい、ステンレス製のピンセット



原寸大



筋無しタイプ 筋入りタイプ
クリップしやすく仕上げてあります。
先端部がスムースタイプ (筋無) と、滑りにくいギザ付 (筋入) がございます。 ** オートクレーブ対応。

全長 (mm)	162mm
重量	約 33g
材質	ステンレス

商品番号	商品名	本体価格
005200	コーク型ピンセット 先端筋入	1,800 円
005201	コーク型ピンセット 先端筋無	1,200 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000236

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名南公式 facebook では
新着ニュースを発信しています!

デモ器
こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル
こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を公開しています!

カーバイドバー 商品番号：下記参照

バープラス

品質の良い切削力に自信のあるカーバイドバー



1931 1958

バープラスゴールド (FG タイプ)

メタル除去用

破折強度とシャック径をフルオート計測器により、ISO 規格にてサンプリングではなく、100% 全本数のチェックを行っています。

最後に職人が1本1本、刃の形状まで確認する徹底ぶり。高品質とバラツきのなさが特徴です。

溶接箇所を工夫することにより、折れにくいのが特徴です。ボディ部分は HP に優しいステンレスを採用しています。

330 1557 1558

バープラス (FG タイプ)

天然歯切削用

5 本入

推奨回転数	300,000rpm
オートクレーブ	121~126℃ /30分
材質	軸部：ステンレススチール 切削先端部：タングステンカーバイド

商品番号	商品名	本体価格
000410	バープラス 330 5 入	各 700 円
000411	バープラス 1557 5 入	
000412	バープラス 1558 5 入	
000413	バープラスゴールド 1931 5 入	各 1,250 円
000414	バープラスゴールド 1958 5 入	

一般医療機器届出番号：2382X10023000365 一般医療機器届出番号：2382X10023000366

カーバイドバー 商品番号：下記参照

SS ホワイト カーバイドバー

世界中でロングセラーの定番カーバイドバー

GW1 GW2 330 1557 1558

メタル除去用 天然歯切削用

切削効率を最大限に高めるようユニークにデザインされたブレード形状と太いネック部分が特徴的なカーバイドバーです。

GW シリーズは、メタルやポーセレン除去にかかる時間を短縮できます。

商品番号	商品名	本体価格
000180	SS 初付カーバイドバー - 1557 10 入	オープン価格
000181	SS 初付カーバイドバー - 1558 10 入	
000182	SS 初付カーバイドバー - 330 10 入	
000183	SS 初付カーバイドバー - GW1 10 入	
000184	SS 初付カーバイドバー - GW2 10 入	

一般医療機器届出番号：2382X10023000289 一般医療機器届出番号：2382X10023000290

ジルコニア切削用ダイヤモンドバー 商品番号：下記参照

SS ホワイト グレートホワイト Z

硬いジルコニア切削をより速く！

5 本入

	ラウンド エンドテーバー	ラウンド (小)	ラウンド	フットボール
商品番号	000185	000186	000187	000188
ヘッド径	8.00mm	1.30mm	1.70mm	4.50mm
ヘッド長	1.80mm	1.40mm	1.80mm	2.30mm
全長	22.00mm	19.00mm	19.00mm	19.00mm
用途	クラウン・ コーピング除去	歯内治療への アクセス用	歯内治療への アクセス用	調整用

グレートホワイト Z 各 5 本入 (FG タイプ)

4 本セットのイントロキット
もあります！
商品番号：000189
販売価格：6,600 円

推奨回転数	300,000rpm
オートクレーブ	121℃ /20~30分 135℃ /3~10分
材質	軸部：ステンレススチール 切削先端部： ダイヤモンドコーティ ングスチール


本体価格	各 4,700 円
------	-----------

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ワンピースカーバイドバー 商品番号：下記参照

アルペン スピードスター

メタル除去を加速させる、精密に削れるワンピース構造のカーバイドバー

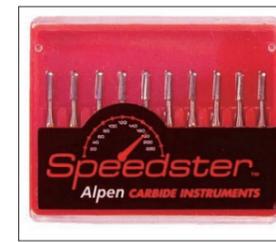

10 本入



メタル除去用

ワンピース構造のため折れにくく、独自のカットにより切削力が高いカーバイドバーです。

メタル・ポーセレン・エナメル・デンチン切削用カーバイドバーです。

高級タングステンカーバイドを使用し、高い耐久性を実現しています！

Model No	331G	1558G
直径 (mm)	1.00	1.20
商品番号	000479	000480

作業が大変なメタル除去を楽にしてくれます。



営業メンバーの声


推奨回転数	300,000 rpm
オートクレーブ	134℃ /6分 乾燥：20分
材質	タングステンカーバイド
本体価格	各 4,300 円

一般医療機器届出番号：1381X10231000132

ワンピースカーバイドバー 商品番号：下記参照

アルペン カーバイドバー

折れにくくてブレない、ワンピース構造のカーバイドバー

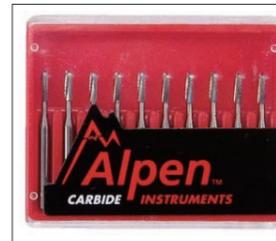

10 本入



天然歯切削用

ワンピース構造のため折れにくく、独自のカットにより切削力が高いカーバイドバーです。

日本原産の高級タングステンカーバイドを使用し、高い耐久性を実現しています！

Model No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
直径 (mm)	0.50	0.70	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.10	2.30
商品番号	000430	000431	000432	000433	000434	000435	000436	000437	000438	000439

Model No.	33 1/2	34	35	36	37	56	57	58	169	170	171
直径 (mm)	0.70	0.80	1.00	1.20	1.40	0.90	1.00	1.20	0.90	1.00	1.20
商品番号	000440	000441	000442	000443	000444	000445	000446	000447	000448	000449	000450

Model No.	256
直径 (mm)	0.80
商品番号	000451

Model No.	330	331	332	556	557	558	559	560	1556	1557	1558
直径 (mm)	0.80	1.00	1.20	0.90	1.00	1.20	1.40	1.60	0.90	1.00	1.20
商品番号	000452	000453	000454	000455	000456	000457	000458	000459	000470	000471	000472

Model No.	699	700	701	702	703	1156	1157	1158	1170	1171	169L	170L	171L	701L
直径 (mm)	0.90	1.00	1.20	1.60	2.10	0.90	1.00	1.20	1.00	1.20	0.90	1.00	1.20	1.20
商品番号	000460	000461	000462	000463	000464	000465	000466	000467	000468	000469	000473	000474	000475	000478

凡例	推奨 rpm	最大 rpm	凡例	推奨 rpm	最大 rpm
●	3,000 - 105,000	300,000	●	24,000 - 48,000	300,000
●	40,000 - 80,000		●	19,000 - 37,000	
●	30,000 - 60,000		●	15,000 - 30,000	

推奨回転数	300,000 rpm
オートクレーブ	134℃ /6分 乾燥：20分
材質	タングステンカーバイド
本体価格	各 2,800 円

一般医療機器届出番号：1381X10231000132

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！

デモ器
こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル
こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を動画で公開しています！

商品番号：007216


キューン NEO

静音性と吸引力で院内、訪問診療先での切削作業を強力サポート



扱いやすいコンパクトボディ

静音かつ軽量タイプのため、院内や訪問診療での調整時に使いやすく、内部は縦長なのでハンドピースをペンシル持ちで作業しやすい構造です。バキューム内蔵でフィルター交換も容易です。正面のクリアシールドは取り外し可能なので、中に残った粉塵のお手入れも簡単にできます。

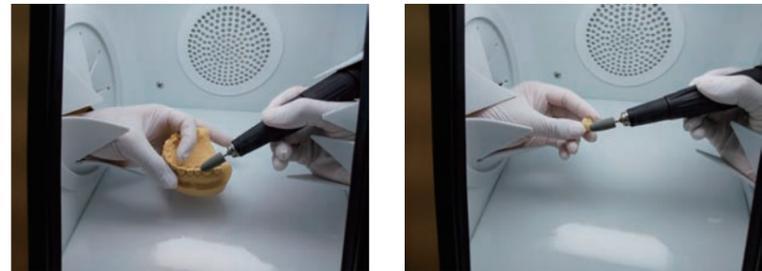

正面のクリアシールドは取り外し可能。大きな模型も丸ごと室内へ入れられます。

LED ライトは明るい 500Lux を採用。細部までしっかり照らします。

カートリッジ式のフィルター

フィルターはカートリッジ式のため交換が簡単にできます。



キューン NEO 用フィルター
標準価格：4,800 円

口腔内と出し入れしながら行う最終調整時、院内に粉塵が広がってしまうことなく、衛生的です。




営業メンバーの声

サイズ (W × D × H mm)	310 × 440 × 290 mm
重量 (kg)	4kg
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	43W
LED モジュール	10W, 500lux
本体価格	74,800 円

商品番号：007636

インパルスシーラー カッター付 2010HC

音タイマー付きで扱いやすい、定番人気シーラー

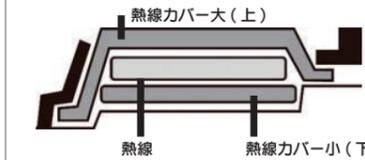

別売消耗品
熱線 (10mm)、熱線カバー大 (上)、熱線カバー小 (下)、シリコンカバー (ノーマル)、シリコンカバー (メッシュ)

耐水性に優れた表面加工済みです。
シーリングサイズ 長さ：200mm 幅：10mm
シーリング終了は電子音でお知らせします。
滅菌シートはカッターで切り離すことができます。

サイズ (W × D × H mm)	85 × 370 × 約 180 mm
重量 (kg)	5kg
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	1000W
本体価格	38,000 円

商品番号：007651

マグネットシーラー

マグネットロックで押さえ作業が必要のない、カッター付きの楽々シーラー



加熱中は赤いランプが点灯。
冷却中は緑のランプが点灯。



ダイヤルで時間の調整が可能です。

従来のカッター付シーラーにマグネットタイマーを搭載しています。シーラーノブを押さえ続ける必要がなく、シール完了後は上部アームが自動的に上がります。

シーリング長が 300mm だから、大型サイズの滅菌ロールもシールできます！

・シーリングサイズ 長さ：300mm 幅：2.0mm

シーリング作業量が多い医院様の作業負担を減らすことが出来ます。



営業メンバーの声


サイズ (W × D × H mm)	80 × 450 × 約 175 mm
重量 (kg)	5.2kg
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	570W
本体価格	29,800 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。


商品番号：下記参照

セルフシールパウチ

インジケーターで滅菌されているかがひと目で分かる！

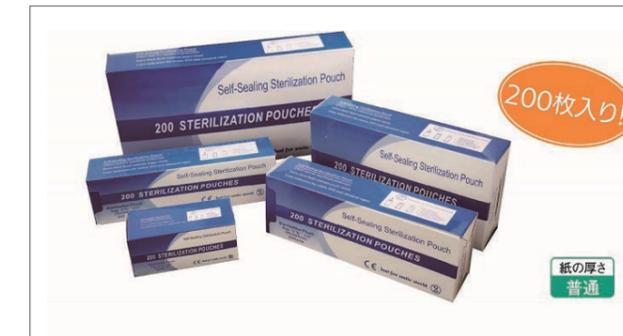

インジケーターで滅菌処理を判定

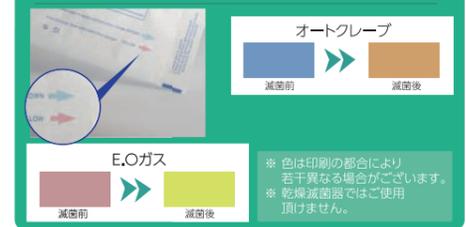

* 色は印刷の都合により若干異なる場合がございます。
* 乾燥滅菌器ではご使用頂けません。

	オートクレーブ	E.Oガス
滅菌条件	121℃/20分 134℃/3分	—
最高温度	140℃まで	—
インジケーター	青 → 茶	赤 → 黄

商品番号	サイズ	販売価格
002790	S	580 円
002791	SM	1,080 円
002792	M	1,280 円
002793	L	1,780 円
002794	LL	3,280 円

商品番号：下記参照

抗菌デンチャーボックス

臭くなりやすい抗菌加工



耐久性抜群の蝶番は、2 ステップ開閉で義歯洗浄剤も楽に入れます。指当て部分があるため開閉も容易です。

アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。

商品番号	カラー	販売価格
007431	ブルー	各 100 円
007432	アイボリー	
007433	ピンク	

商品番号：下記参照

リテーナーボックス

通気性良く衛生的な保管容器



通気孔付きで衛生的です。
薄型で持ち運びにも便利です。
ホワイト・ブルー・ピンクの3色展開です。

商品番号	カラー	販売価格
002778	ブルー	各 200 円
002779	ホワイト	
002780	ピンク	

商品番号：003801

ステンレストレー

鏡面仕上げされた『高級』ステンレストレー



オールステンレス製のため、あらゆる消毒液に対して耐腐食性に優れています。
** オートクレーブ対応。
・こちらの商品は受注発注返品不可商品です。

サイズ (W × D × H mm)	245 × 145 mm
材質	ステンレス
販売単位	1 入
本体価格	1,400 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

商品番号：003001

ソニックデンチャークリーナー

振動パワーで汚れを強力に落とす



義歯、マウスガード、スプリント等の洗浄 (6~10 分) や義歯の保管に使用できます。アクセサリ等の洗浄にも使用できます。(一部使用できない材質もございます。)
** 電池は別売りとなります。

サイズ (W × D × H mm)	90 × 82 × 78 mm (突起部含む)
駆動方式	単 3 乾電池 x2
販売単位	1 入
本体価格	1,330 円




リーマー収納ケース 商品番号：006901

リーマーボックス
一目で収納状況が分かりやすいリーマー用収納ボックス



オールステンレス製のため、あらゆる消毒液に対して耐腐食性に優れています。

全 84 本収納できます。

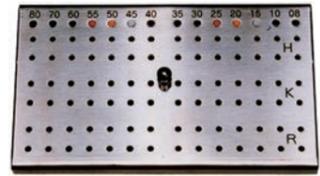

** オートクレーブ対応。

・こちらの商品は受注発注返品不可商品です。

サイズ(W×D×H mm)	128x78x45 mm
材質	ステンレス
販売単位	1入
本体価格	12,000 円

歯科用 X 線パノラマフィルム 商品番号：下記参照

フォーマ パノラマフィルム
様々なメーカーの液で使用可能



国内では最も価格競争力のある X 線フィルムです。

良質なフィルムで、様々なメーカーの液でご使用いただけます。

ブルー感度（レギュラー）とグリーン感度（希土類）の 2 種類がございます。

サイズ(W×D mm)	15x30 mm
種類	レギュラー・希土類
販売単位	100 枚入/箱


※感光を防ぐため、遮光性カバーにて包装。開封後は暗室で出し入れや使用を行ってください。
※保管方法：フィルムは直射日光を避けて、放射線や X 線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。
※グリーン感度のご使用には希土類蛍光物質を用いた増感紙が必要となります。

商品番号	種類	販売価格
004434	ブルー	各 15,000 円
004442	希土類	

一般医療機器届出番号：2382X1002300062

ポケットロールフィルムマウント 商品番号：下記参照

カットオフ
X 線フィルムの保護にピッタリ。形は 3 種類をご用意

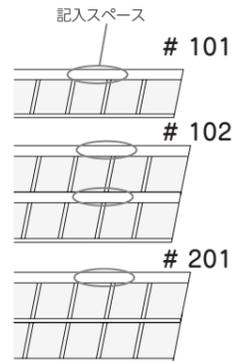

X 線フィルムを引っかきキズやホコリから完全に保護します。

ポケットは透明のため、フィルムを鮮明に確認することができます。

#101・#102・#201 の 3 種類をご用意しております。ポケットロールがロール状になっていますので、必要な枚数だけカットし、無駄なく使用できます。

余白に記入スペースがございます。

材質	ビニール
販売単位	250 枚入/箱

商品番号	種類	販売価格
000501	#101	各 2,800 円
000502	#102	
000503	#201	

回転トレー 商品番号：下記参照

局部回転トレー
使いやすい回転トレー



オールステンレス製のため、あらゆる消毒液に対して耐腐食性に優れています。


局部用と一歯用がございます。

** オートクレーブ対応。

商品番号	種類	販売価格
000921	局部用	各 300 円
000922	一歯用	

歯科用 X 線フィルム 商品番号：004465

名南デンタルエックスレイフィルム
ナンバリング付きの国産デンタルフィルム

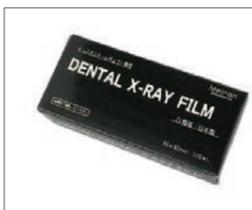

国産フィルムを採用し、インスタント・レギュラー兼用で使用できます。1 枚毎にナンバリングが付いています。(1 ~ 100)

インスタント現象と自動現象機の両方に対応する D 感度フィルム。

<保管方法>フィルムは直射日光を避けて、放射線や X 線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。
<有効期間>有効期間（使用期限）は、商品のパッケージ上に明記されていますので、それまでに使用してください。



サイズ(W×D mm)	30x40 mm
種類	レギュラー
販売単位	100 枚入/箱

本体価格 3,200 円

ナンバリング付き

一般医療機器届出番号：2382X10023000368


ディスポーザブルアプリケーター 商品番号：008502

マイクロアプリケーター
経済的なマイクロアプリケーター



液剤や低粘度剤の塗布等に使う、使い捨てのマイクロアプリケーターです。

先端部は自在に折り曲げることができます。

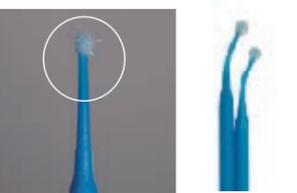

全長 (mm)	85 mm
材質	プラスチック・綿
販売単位	144 本入/箱

本体価格 980 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

プロフィーペスト 商品番号：下記参照

ジェラートプロフィーペスト
感染予防にピッタリな単回使用カップ



個包装による 1 回使い切りカップタイプ (2g/ カップ) で、感染予防に便利です。

1 カップ 20 円。チューブタイプに負けないコストパフォーマンスです。

1.23% フッ素含有 & グルテンフリーです。

海外歯科サイト「デンタルアドバイザー」のプロフィーペスト部門において 6 年連続トップアワード受賞した商品です。
**2013 ~ 2018 年で同部門を連続受賞。

カンタンにカップで取れて除去カモバツグン
ステインなどもプロフィカップに取って研磨するだけで、手早く綺麗に除去できます。



使用前

使用后

院内感染対策（個包装タイプ）、アレルギー対策（グルテンフリー）にも対応したペーストです。幅広い層で使用できるミントフレーバーなので、特定のフレーバーが余るといってもありません。



営業メンバーの声

粒度	ミディアム（標準） コース（粗め）
フレーバー	ミント
販売単位	1 箱 (200 入)

商品番号	商品名	販売価格
010221	プロフィーペスト 200 個入 ミント（ミディアム）	各 4,000 円
010223	プロフィーペスト 200 個入 ミント（コース）	

一般医療機器届出番号：2382X10023000241

プロフィー 商品番号：下記参照

プロフィシリーズ
名南ロングセラーのプロフィー

プロフィカップ
クリーニング用のスクリュータイプです。



商品番号：008504	
サイズ (mm)	直径 6 × 13 mm
材質	軸部：スチール 研磨部：シリコンラバー
販売単位	144 枚入/箱

本体価格 3,600 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000132

プロフィブラシ
クリーニング用のスクリュータイプです。



商品番号：008508	
サイズ (mm)	直径 4 × 17 mm
材質	軸部：スチール 研磨部：ナイロン
販売単位	144 枚入/箱

本体価格 5,800 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000133

プロフィポイント
歯肉縁上・縁下のプラーク・歯石の除去にお使いいただけます。



商品番号：008510	
サイズ (mm)	直径 6 × 15 mm ※円錐形
材質	軸部：スチール 研磨部：シリコンラバー
販売単位	144 枚入/箱

本体価格 3,600 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000132

プロフィポイントブラシ
プロフィ専用ペーストと併用してお使いいただけます。



商品番号：008511	
サイズ (mm)	直径 4 × 20 mm ※円錐形
材質	軸部：スチール 研磨部：ナイロン
販売単位	144 枚入/箱

本体価格 6,800 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000133

** コントラタイプの取扱いはございません。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



デジタルソリューション

- 拡大鏡
(スコープ)
- ドクター
チェア
- インスツル
メント
- カーバイド
バー
- 集塵機
- その他
関連機器材


- 3D スキャナ
本体
- CAD
ソフトウェア
- 3D プリンタ
本体
- 3D プリンタ
樹脂
- 3D プリンタ
関連機器材
- ミリングマシン
本体
- ミリングマシン
関連機器材
- ファーンエス
本体

3D スキャナー UP300	22
exocad	23
デュアルアナログ/スキャンボディ	23
オーソアッププレミアム (モデルビルダー付き)	24
オーソアップモデルビルダー	24
イージーベース	25
ディジステル	25
アシガ PRO 4K 80UV	26
ビルドトレイ	26
アシガ MAX UV	27
ガラスボードキャビネット	27
デンタモデル	28
デンタキャスト グリーン	28
スーパーキャスト V3	28
デンタトライ A2	29
デンタガイド	29
デンタガム	29
デンタ IBT	29
フリープリント デンチャー	30
フリープリント テンプ	30
オートフラッシュ G171 N2	31
爆洗 W-113MK II	31
ジルカラリ	31
R5	32
Z4	32
K5+ / K5	32
S5	33
vhf ミリングバー各種	33
K4	33
Z1CAM PRO	33
ミーム シンタリングファーンエス HT-2	34
ミーム シンタリングファーンエス HTS-2	35
ミーム シンタリングファーンエス TABEO	35

名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！

名商公式 Twitter では
新着ニュースを発信しています！

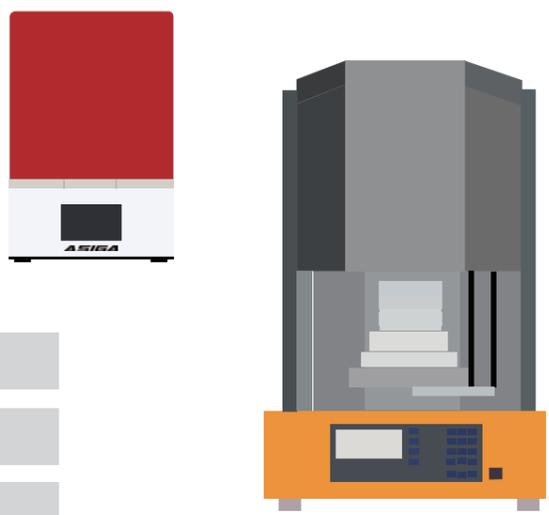

サンプル ご提供可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

デモ器 貸出し可能です。 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

YouTube 動画配信チャンネルです。 こちらのアイコンがある商品は YouTube で商品を取り扱った動画をご視聴いただけます。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！

デモ器 貸出し可能です。 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル ご提供可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

3D スキャナー 商品番号：012600

3D スキャナー UP300


高精度を実現するブルー LED を採用した、高速スキャナー




高精度スキャンを実現するブルー LED を搭載しており、高速スキャン（フルアーチで約 25 秒）が可能です。

標準で咬合器スキャンに対応、咬合情報を正確に取り込みます。

本製品に PC は含まれておりません。別途お買い求め頂く必要があります。弊社でもご用意が可能です、詳細はお問い合わせください。

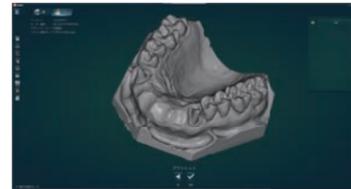

咬合スキャンにも対応
標準で咬合器スキャンに対応しているため、咬合情報を正確に取り込みます。

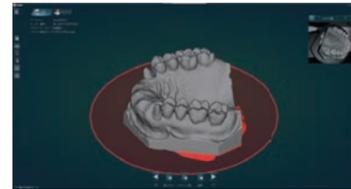

他社ソフトと連携可能なエクスポート機能
出力フォーマットは STL、UM、PLY、OBJ ファイルに対応。exocad などの他社 CAD ソフトウェアへのデータ読み込みもスムーズです。



Triple tray トリプルトレイ
12 unit multi-dies scan 12 歯マルチダイスキャン
All-in-one オールインワン
Scan full arch フルアーチスキャン

一通りのスキャン機能を備えているため、最初の 1 台にも、追加の 2 台目にもおすすめできる 3D スキャナーです。

スキャン品質を落とさずに素早く 3D データ化したらボ様、院内ラボ様へオススメする 1 台です。

標準装備



12 歯マルチダイ
マルチダイが付属しており、12 歯までダイスキャンが可能です。



トリプルトレイ
トリプルトレイ（インプレッションホルダー）が付属しているため、印象トレイのままスキャンすることも可能です。



オールインワン
片顎模型をまとめてスキャンできるプレートとダイトレイが付属しています。



ネジ固定プレート
歯科模型でのスキャンにも対応しています。

本体仕様	
サイズ (W×D×H mm)	340 x 320 x 400 mm
重量	13kg
電源	100V 50/60Hz

スキャン性能	
軸数	2 軸
スキャン精度	10 ミクロン
リピート精度	2 ミクロン
スキャン速度	約 25 秒 (フルアーチ)
対応ファイル (出力)	STL、PLY
カメラ解像度	1.3 メガピクセル
光源	ブルーライト
3D マウス対応	対応
咬合器スキャン	可能
マルチダイスキャン	可能

本体価格 1,200,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000344

** 販売価格に PC セット、オプション及び役務 (設定・使用説明) は含まれません。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ユーザーの声
操作がシンプルで、スキャンスピードも早いので満足です。コンパクトで場所を選びません。

これからデジタルを始める方やスキャナーの増設をご検討の方に是非お勧めしたい、コストパフォーマンスの非常に高いスキャナーです。EXOCAD、ディジスタル、オーソアップ、イーザーベースなど、各種 CAD に対応しています。



営業メンバーの声



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

歯科専用 CAD ソフトウェア 商品番号：012002

exocad (エグゾキヤド)

操作性と機能性をバランス良く兼ね備えた歯科用 CAD ソフト




高い操作性と使いやすさを武器に世界的に支持されている、ドイツ製 CAD ソフトウェアです。

直感的にデザインできると共に適切なガイド機能により、ビギナーからエキスパートの方までお使いいただけます。

基本機能では、臨床ケースの管理からスキャンング、クラウンブリッジ等の CAD デザイン、STL データ出力までガイドに従いながら進められます。

ライセンス料なし (更新はオプション制) なので、コストを抑えた運用が可能です。

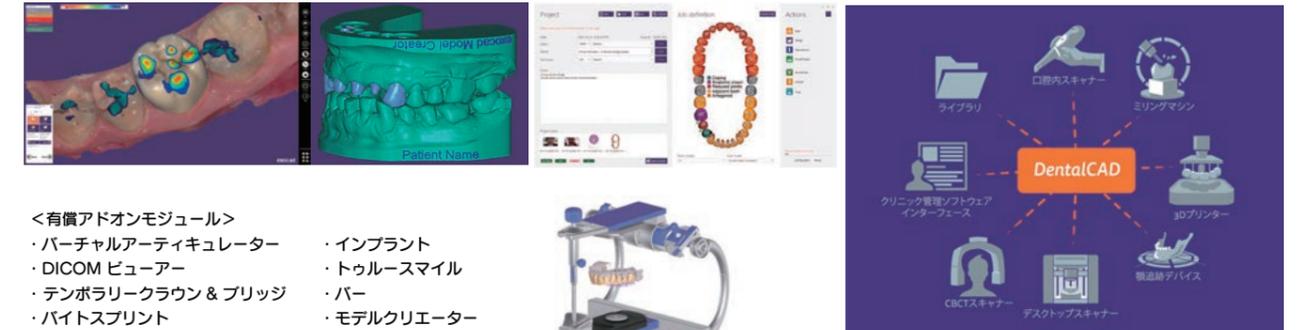

- < 有償アドオンモジュール >
- バーチャルアーティキュレーター
 - DICOM ビューアー
 - テンポラリークラウン & ブリッジ
 - バイトスプリント
 - スマイルクリエイター
 - JAW モーション
 - バーチャル CAD
 - フルデンチャー
 - トゥースライブラリー
 - インプラント
 - トゥールスマイル
 - パー
 - モデルクリエイター




対応 OS	Windows10
バージョンアップ	更新制 (オプション)
本体価格	700,000 円

** 販売価格にオプション及び役務 (設定・使用説明) は含まれません。

インプラント模型用ラボアナログ 商品番号：カタログ参照

デュアルアナログ / スキャンボディ

3D プリンターで積層した模型や従来の石膏模型にも使える 2 イン 1 システムのラボアナログ

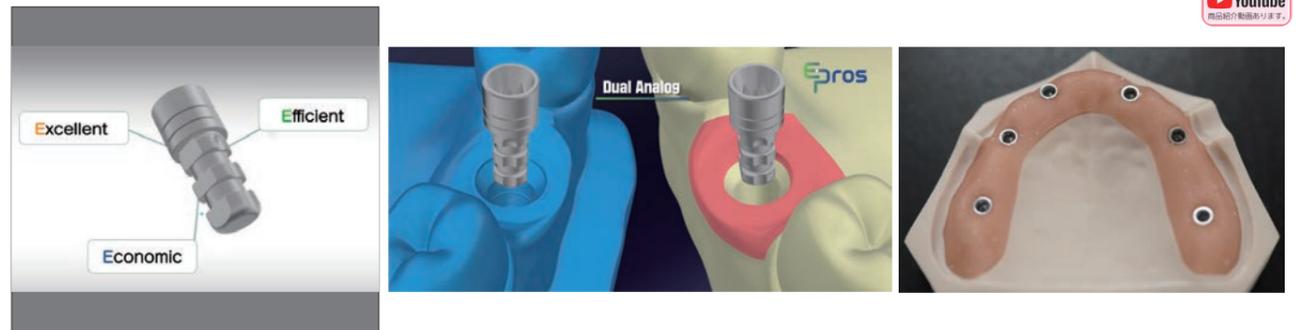

5 社のインプラントに対応

Astra Tech (アストラテック)	Osso Speed TX (オッセオスピード TX)
Straumann (ストローマン)	Bone Level (ボーンレベル) / Tissue Level (ティッシュレベル)
Nobel Biocare (ノーベルバイオケア)	Active (アクティブ) / Replace (リプレイス)
Detsply Sirona (デンツプライシロナ)	Xive (ザイブ)
ZIMMER (ジンマー)	TSV

2つの凸でピッタリフィット!



exocad
ライブラリデータも完全完備
すぐに使用できます!

模型側の 2 つの凸にピッタリフィット、差込後も抜き差しによる上下のブレを防ぎます。

差込み固定タイプのため、裏側のスクリュー (固定ネジ) は一切不要です。ネジ締めによる高さのズレは一切発生しません。

デュアルアナログ各種 1 入	本体価格 1,980 円
スキャンボディ各種 1 入	本体価格 3,980 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方の動画を公開しています!

技工用ライナー矯正 CAD ソフトウェア 商品番号：010732

オーソアッププレミアム (モデルビルダー付き)


矯正ライナー製作をデジタルで強力にサポート



デジタル印象データから、歯牙と歯肉の分離・歯冠と歯根を作成します。多彩な 3D 視覚情報による、強力なセットアップサポートが可能です。

歯列移動の自動シミュレーションができます。シミュレーションした模型をステージ別に STL 出力できます。医院様とのコミュニケーションに便利なシミュレーションレポート・3D レポート (PDF) ムービー作成が可能です。*インポートは STL のみ対応


アタッチメント付与機能を標準搭載しています。ライナー番号、患者様の頭文字を刻印する機能を標準搭載しています。

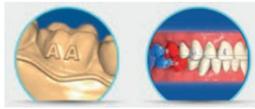

アドオンモジュール (オプション機能)

ファミリーアタッチメント オプション価格 : 100,000 円
各歯牙のメインとなる動きを分析し、適切なアタッチメントを自動的にセットできるモジュールです。歯牙の動き方に合わせて、適切なアタッチメントを自動にセットします。独自にデザインしたアタッチメントを登録することも可能です。

ボーンエキスパンション オプション価格 : 100,000 円
歯列移動の前に実施される顎の拡大を CAD 上でシミュレートできます。顎の拡大方法や拡大量を、学術的データに基づいた参考値をもとに計算できます。

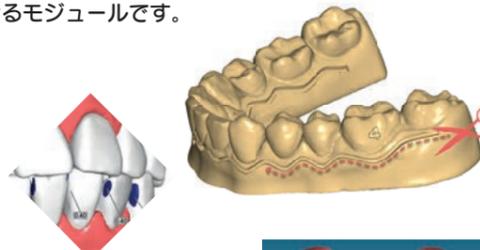

ユーザーの声
「スキャンデータの修正やセットアップでオート機能が多いので、作業時間が大幅に短縮できるのが良いですね！」

営業メンバーの声
「すでにお持ちの矯正のノウハウや経験をそのままデジタルへ活かすことができるソフトウェアです。スキャンデータの修復からスタディモデル作成、診断、シミュレーション、模型排出、様々な機能が備わっています。」

対応 OS	Windows10
バージョンアップ	更新制 (オプション)


本体価格 900,000 円

** 販売価格にオプション及び役務 (設定・使用説明) は含まれません。

矯正用モデルビルダー 商品番号：010734

オーソアップモデルビルダー

平行模型のデジタル製作に最適なソフトウェア

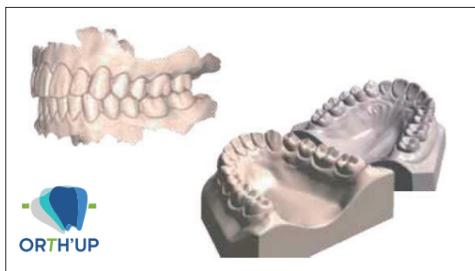

口腔内スキャナーによる印象データの穴埋めや、面取りなどの修正や補正が短時間に行え、平行模型や馬蹄形の模型を STL で出力できる矯正用モデルビルダーです。

ソフトの標準機能で、模型へ日付・患者名などの文字を刻印することも可能です。

3D で模型の観覧ができる、ドクター向けの PDF レポートが作成できます。

ユーザーの声
「分かりやすいアイコンで直感的に設計ができます。」

口腔内スキャンのデータをインポートし、自動補正して模型データの作成ができます。

対応 OS	Windows10
-------	-----------

本体価格 280,000 円


** 販売価格にオプション及び役務 (設定・使用説明) は含まれません。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

個人トレー、ベースプレート設計 CAD ソフトウェア 商品番号：010880

イージーベース

簡単操作で個人トレー、ベースプレートを設計

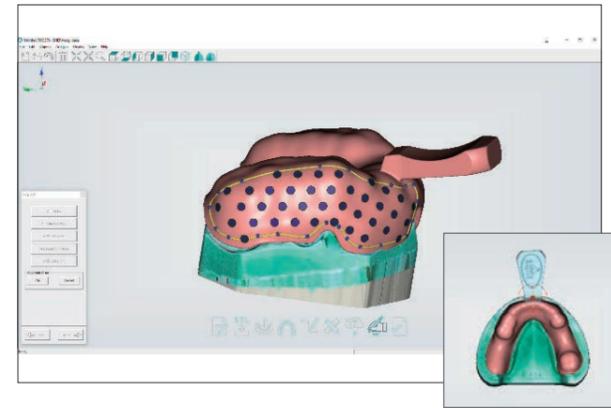

トレー、ベースプレートをすばやく簡単に設計できます。

印象材に合わせて、ソフトが最適な印象スペースを自動設定。穴をあけたトレーの作製も簡単にできます。

印象の精度を高めるトレー辺縁の「返し」も自動的に設計してくれます。

インプラントトレーの設計やガムストッパーや取っ手、リムの設置も簡単にできます。オリジナリティを出せるように、ソフトの標準機能でラボ名や患者様の名前の刻印を凹凸を利用して表現することも可能です。

オープンソリューションなのでお使いのプリンターに合わせてデータ出力が可能です。(STL・OBJ・PLY に対応)



個人トレー制作

ベースプレート制作

ユーザーの声
「操作が簡単で、すぐに使い始めることができました！」

対応 OS	Windows10
バージョンアップ	無料 (最新版は HP より)
本体価格	350,000 円

** 販売価格にオプション及び役務 (設定・使用説明) は含まれません。

デンチャーフレーム制作 CAD ソフトウェア 商品番号：010730

ディジステル

実際の技工作業と同じ工程で直感的にデザインできる、デンチャーフレーム製作ソフトウェア



自由度の高い設計が可能! 「デンチャーはアートである」というコンセプトからディジステルは開発をスタートしました。同じ模型からでも、作られるパーシャルフレームワークの設計はテクニシャンにより様々。強力なライブラリー編集機能により、自由度の高い設計が行えます。

CAD 設計と 3D プリンターに移行することで、作業時間とコスト (シリコン、石膏、埋没材、メタル) を大幅に削減できます。

複製模型を作成する必要もありません。

ブロックアウト・リリースした模型 STL の出力も可能です。

マジックペン機能・シンメトリー設計

マジックペン機能
模型上に手書きしたラインを自動認識し、クリックで自動描画してくれる機能です。これにより、設計時間を大幅に短縮します。(OBJ・PLY に対応)

シンメトリー (左右対称) 設計
ラインを片側だけ描けば、左右対称に自動描画してくれる機能です。もちろん描画後の修正も可能です。

ユーザーの声
「デザインの自由度が高いのに、簡単に使えました！」


営業メンバーの声
「既製パーンの厚み変更 / 登録ができて医院毎の厚み変更も容易に対応可能です。直接デンチャーフレームパターンを製作することによりコスト削減と時間短縮が可能です。」

対応 OS	Windows10
バージョンアップ	更新制 (オプション)

本体価格 600,000 円

** 販売価格にオプション及び役務 (設定・使用説明) は含まれません。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

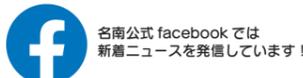

名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています!

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています!

歯科用3Dプリンター

商品番号：011200


アシガ PRO 4K 80UV

最新のDLPイメージングテクノロジーを利用して、ASIGA最大の積層範囲で高精度を実現



新システム「4Kモード」搭載

繊細なディテールを再現できる「4Kモード」を搭載した新モデルです。プロジェクションビームの方向に合わせて1ピクセルにも満たない距離分だけずらしイメージを変化させる最新の技術を採用して積層サイズを変えずに、より滑らかな積層面を実現します。

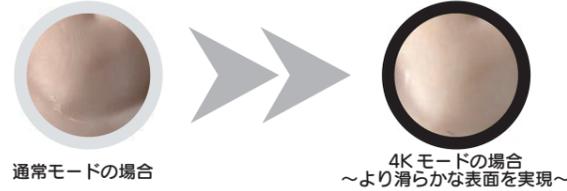

待望のASIGAの最高傑作がここに

ASIGA最大の積層範囲と高精度を兼ね備えたPRO4K。高級感のあるボディに洗練されたデザイン。まさにプレミアムな存在感の一台です。



本体仕様

サイズ(W×D×H mm)	465×510×1,345 mm
重量	140 kg
電源	100V 50/60Hz

プリンター性能

ピクセルサイズ	80µm
積層ピッチ(高さ)	最小10ミクロン~(1nm単位で設定可能です。)
積層サイズ(WxDxH mm)	217x122x200 mm
光源	385nm UV LED
対応ファイル	STL SLC STM
ソフトウェア	コンポーザー (標準)
ネットワーク	WiFiまたは有線LAN

本体価格	3,800,000円
------	------------

一般医療機器届出番号：2382X10023000359



ユーザーの声

大量の模型を積層することが多いので、この広い積層エリアは頼もしい限りです！

広い積層エリアと再現性。そして積層スピードの三拍子が揃った死角のない3Dプリンターです！プロフェッショナルユースの皆様にご自信を持っておすすめします！



営業メンバーの声

3Dプリンター用アクセサリ

商品番号：下記参照

ビルドトレイ

樹脂交換もトレイを丸ごとラクラク交換！



商品番号：010937	アシガ MAX ビルドトレイ 1L
本体価格	12,000円



商品番号：011171	アシガ MAX/PICO 用 ビルドトレイ保管容器
本体価格	2,200円



商品番号：011201	アシガ PRO4K ビルドトレイ 2L
本体価格	12,000円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

歯科用3Dプリンター

商品番号：010936

アシガ MAX UV

コンパクトなのに広い積層サイズで高精度を誇る卓上プリンター界のプリンス



SPS™ スマートポジショニングシステムテクノロジー

SPS™ プロセスはAsiga独自の積層テクノロジーです。トレーの下に設置された高精度センサーが常時、積層状況をモニタリング。これにより、常に速くて正確な積層を実現しています。

オープンマテリアルシステムを実現

Asiga 純正の材料と共に、他社メーカーの材料も使用することができるオープンマテリアルシステムを実現しています！

385nm UV LED の重要性！

従来の405nmに比べ、最新の385nmではクリアな樹脂でも黄ばむことなくきれいに積層ができ、より精度が高く高速な積層が可能です。これらの利点から、アシガの3Dプリンターでは、385nm UV LEDチップを採用しています。

シングルポイントキャリブレーション

アシガならキャリブレーションも、シンプルな操作で簡単に行なえます。



ユーザーの声

予想以上に動作音が静かで驚きました！診療室内で使っても、安心してプリントできます。



本体仕様

サイズ(W×D×H mm)	260×380×370 mm
重量	16.5kg
電源	100V 50/60Hz

プリンター性能

ピクセルサイズ	62ミクロン
積層ピッチ(高さ)	最小10ミクロン~(1nm単位で設定可能です。)
積層サイズ(WxDxH mm)	119x67x75 mm
光源	385nm UV LED
対応ファイル	STL SLC STM
ソフトウェア	コンポーザー (標準)
ネットワーク	WiFiまたは有線LAN

本体価格	1,800,000円
------	------------

一般医療機器届出番号：2382X10023000298

キャスター付キャビネット

商品番号：下記参照

ガラスボードキャビネット

3Dプリンターの台や樹脂の保管にも使える、キャスター付きキャビネット



ホワイト M1A

レッド M1C



衛生的に便利なガラスボード

天板に高級感のあるガラスボードを使用しています。液体の拭き取りがしやすく、掃除が簡単です。キャスターがついているので移動が便利です。

ホワイト M1A 商品番号：004852

サイズ(W×D×H mm)	526×490×880 mm
重量	43.5kg
層数	5段棚
引出内寸(W×D×H mm)	420×310×59 mm

レッド M1C 商品番号：004853

サイズ(W×D×H mm)	500×490×847 mm
重量	45.5kg
層数	4段棚(最下段棚深型)
引出内寸(W×D×H mm)	420×310×59 mm(最下段のみ420×310×317 mm)

本体価格	各 75,000円
------	-----------

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！



デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！

3D プリンター樹脂 (模型用) 商品番号: 011153

デンタモデル

細部の再現性も高く、高精度な模型が造形できるプリンター樹脂



歯科模型や可撤式模型の積層に最適化された樹脂です。

耐熱性もあるため、矯正アライナー製作用にも使用できます。

コストパフォーマンスが非常に良いです。



ユーザーの声

耐熱性もあるため、マウスガード形成用のモデルとして使えて一石二鳥でした。

歯科専用に開発した3Dプリンター樹脂です。格段の積層安定性と精度の高さにご満足いただけます。



営業メンバーの声

385nm
対応

405nm
対応

樹脂カラー
ベージュ

容量 (kg)	1.0kg
使用用途	模型用
対応光源	DLP 光源用

本体価格 25,000円

一般医療機器届出番号: 2382X10023000367



動画紹介動画があります。

3D プリンター樹脂 (プレス・铸造用) 商品番号: 011162

デンタキャスト グリーン

クリストバライト埋没材対応のキャストブル樹脂



クラウン・ブリッジ、パーシャルデンチャーフレームの積層に最適化された専用樹脂です。

燃焼性も良いので、クリストバライト系埋没材でも使用可能です。

二次重合が必要ないため、重合時の変形リスクが避けられます。



営業メンバーの声

燃焼性が高くクリストバライト系埋没材でも問題なく使用できます。

385nm
対応

樹脂カラー
グリーン

容量 (kg)	1.0kg
使用用途	プレス・铸造用
対応光源	DLP 光源用

本体価格 25,000円

一般医療機器届出番号: 2382X10023000369

3D プリンター樹脂 (プレス / 铸造用) 商品番号: 011130

スーパーキャスト V3

全てのキャストワークに対応! 強度があり変形知らずのキャストブル樹脂



クラウン・ブリッジ、デンチャーフレーム、歯科技工全般のキャストワークに対応しています。

強度が高い樹脂のため、大きなフレームワークにも使用可能です。

二次重合が必要ないため、重合時の変形リスクが避けられます。



ユーザーの声

薄く仕上げて変形しにくい、強度のある高品質な材料でした。

安定の使用感! 多くのユーザー様が使用している鑄造ができる材料です。



営業メンバーの声

385nm
対応

405nm
対応

樹脂カラー
レッド

容量 (kg)	1.0kg
使用用途	プレス・铸造用
対応光源	DLP 光源用

本体価格 42,000円

一般医療機器届出番号: 2382X10023000247

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

3D プリンター樹脂 (個人トレー・義歯試適用) 商品番号: 011159

デンタトライ A2

生体親和性のある個人トレー用樹脂材、さらに義歯の試適確認にも使用可能



個人トレー・ベースプレート用、義歯の試適用樹脂です。

生体適合性 (生体親和性) を確保するためには、窒素充填下での光重合が必要になります。

** オトフラッシュ (二次重合) の使用を推奨します。 (P.30 参照)

歯牙色 (A2) で試適ができるので、イメージが付きやすいです。

従来のトレー用樹脂と比べても強度が高いため、取手の部分が折れにくく安心して使用できます!



営業メンバーの声

385nm
対応

樹脂カラー
ホワイト (A2)

容量 (kg)	1.0kg
使用用途	個人トレー・義歯試適用
対応光源	DLP 光源用

本体価格 25,000円

一般医療機器届出番号: 2382X10023000384

3D プリンター樹脂 (サージカルガイド用) 商品番号: 011175

デンタガイド

生体親和性のあるクリアな樹脂



サージカルガイド製作におすすめの、生体親和性のあるクリア樹脂です。

生体適合性 (生体親和性) を確保するためには、窒素充填下での光重合が必要になります。

** オトフラッシュ (二次重合) の使用を推奨します。 (P.30 参照)

385nm
対応

樹脂カラー
クリア

容量 (kg)	1.0kg
使用用途	サージカルガイド向け
対応光源	DLP 光源用

本体価格 25,000円

一般医療機器届出番号: 2382X10023000394

3D プリンター樹脂 (ガム模型用) 商品番号: 011155

デンタガム

歯肉再現用のソフトなプリンター樹脂



3Dプリンターでも、しっかりと弾力のあるガムの作製が可能です。

インプラント模型のデジタル製作におすすめです。

385nm
対応

樹脂カラー
ピンク

容量 (kg)	1.0kg
使用用途	ガム模型用
対応光源	DLP 光源用

本体価格 25,000円

一般医療機器届出番号: 2382X10023000370

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

3D プリンター樹脂 (インダイレクトボンディングトレー用) 商品番号: 011157

デンタIBT

インダイレクトボンディング用のソフトなクリア樹脂



生体親和性のある、インダイレクトボンディング用樹脂です。

生体適合性 (生体親和性) を確保するためには、窒素充填下での光重合が必要になります。

** オトフラッシュ (二次重合) の使用を推奨します。 (P.30 参照)

385nm
対応

樹脂カラー
ダーク
クリア

容量 (kg)	1.0kg
使用用途	IBT 用
対応光源	DLP 光源用

本体価格 25,000円

一般医療機器届出番号: 2382X10023000378

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています!



こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。



こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を公開しています!



歯科用 3D プリンター樹脂

商品番号：下記参照

DETAX フリープリント デンチャー




3D プリンターで義歯床を作成できるクラスII認証済み樹脂



デンチャーベースを3Dプリントするために開発された、ドイツ製の385nm LEDで積層可能な3Dプリンター用樹脂です。

高硬度による耐摩耗性と、アシガ社3Dプリンターとの組み合わせで実現できる高精度なクオリティで適合信頼性を担保します。

口腔内での使用でも脆くなることなく、最大の曲げ強度と弾性を確保します。樹脂は安定した色味、無臭、無味が特徴で二次重合後に安心してご使用いただけます。コスト面でも低粘度で材料の消費量を減らし、IPAでの洗浄を高速化します。

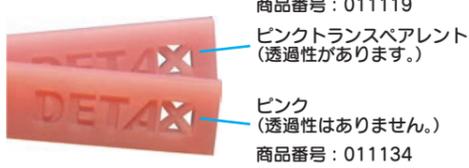

容量 (g)	1,000g
使用用途	義歯床用
対応光源	DLP 光源用
対応波長 (nm)	385 nm
カラー	ピンクトランスペアレント・ピンク
本体価格	各 60,000 円

医療機器認証番号：303AIBZX00019000

歯科用 3D プリンター樹脂

商品番号：下記参照

DETAX フリープリント テンプ




3D プリンターで総義歯の歯牙、仮歯やプロビジョナルを作成できるクラスII認証済み樹脂



歯牙や仮歯、プロビジョナルを3Dプリントするために開発された、ドイツ製の385nm LEDで積層可能な3Dプリンター用樹脂です。

高い耐破壊性と曲げ耐性と高い耐摩耗性があり、自然な審美性で鮮やかな半透明の色を再現できます。

ブラシや研磨剤による表面処理で、簡単に艶出しができます。樹脂は安定した色味、無臭、無味が特徴で二次重合後に安心してご使用いただけます。コスト面でも低粘度で材料の消費量を減らし、IPAでの洗浄を高速化します。

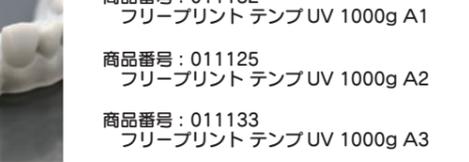

容量 (g)	1,000g
使用用途	義歯床用
対応光源	DLP 光源用
対応波長 (nm)	385 nm
カラー	A1, A2, A3
本体価格	各 60,000 円

医療機器認証番号：303AIBZX00022000

3D プリンターで総義歯をつくるまで

3Dスキャン

CADデザイン・設計

3Dプリント

洗浄・光重合



お持ちの3Dスキャナー、口腔内スキャナーで口腔内の無歯顎模型の情報を3Dデータにします。

その後、exocadのフルデンチャーモジュールを使って歯肉、歯牙をデザインしていきます。



最終工程を経て完成

デザインが完成したら、3DプリンターへSTLデータを送って3Dプリントします。せきそうごは洗浄と窒素ガス下による光重合を行えば完成です。

デジタル製作では、今までの工程で発生していた様々な廃棄物を削減できます。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。


窒素充填式光重合器

商品番号：012400

オトフラッシュ G171 N2



3Dプリンター樹脂の生体親和性を迅速かつ確実にするフラッシュ硬化装置

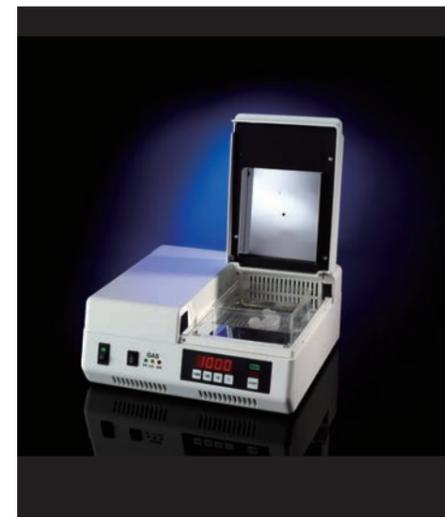

口腔内で使用される積層物(トレー・サージカルガイド・テック等)では、生体親和性を最も要求されます。オトフラッシュはそのために便利な光重合器です。

光重合を妨げるのは空気中の酸素です。窒素充填下でこの酸素を排出してから光重合を行うことにより、未重合層を最小限にします。

オトフラッシュではUV波長280-700nmの幅広い波長に対応しており、様々な3Dプリンターの樹脂に使用することが出来ます。その他にも光重合レジンなどの光硬化型の樹脂にも使用することができます。

窒素の充填を必要量で自動ストップするモードも搭載しているため、片付けなどの作業も挟むことが可能です。機器停止時にも微量のガスが流れ出る可能性があるため、ご使用後はガスポンプの元栓は必ず閉めることを推奨しております。



- 付属およびオプショントレーの使用用途
- ・ 280N2 UVB トレー
280~700nmの全ての波長を透過します。
- ・ 360N2 UVB トレー
約350nm以下の波長をブロックします。


<消耗品>



280N2 UVB トレー 1入
280~700nmの全ての波長を透過します。(Asiga 純正品向け)

360N2 UVB トレー 1入
350nm以下をブロックします。(Detax UV製品向け)

販売価格：各 8,500 円

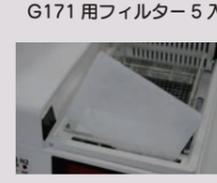

G171 用フィルター 5入

交換用フラッシュモジュール
交換目安：約250時間

販売価格 5,000 円

販売価格 88,000 円

本体仕様

サイズ(W×D×H mm)	310 × 310 × 140 mm
重量 (kg)	6Kg
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz
平均消費電力 (W, A)	200W
対応波長領域	280-580 nm
付属品	レギュレーター標準搭載
チャンバーサイズ	120x120x50 mm
光源と光源数	フラッシュランプ x2
平均消費電力 (w)	200W
波長 (nm)	280 ~ 700 nm
フラッシュ速度 xx/秒	10 フラッシュ/秒
デジタルタイマー	1 ~ 9.999 フラッシュ
窒素ガス対応	対応
本体価格	498,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000346

超音波洗浄機

商品番号：006052

爆洗 W-113MK II



積層後の樹脂洗浄に欠かせない強力超音波洗浄器



タンク容量 3L

周波を高速で切り替える「爆洗モード」により、液中の気泡同士がぶつかり合い、瞬間的に大きなエネルギーとなって、効率のよい洗浄効果が得られます。

単周波洗浄機では不可能であった細かな部分の洗浄が可能となりました。積層物の隙間に残っている余分な樹脂もしっかり取り除きます。

洗浄ムラが解消され、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能です。(3つの強度の洗浄モードが選択可)

- 付属品：フタ ● 最高使用液温度：80℃
- 振動子：ボルト締めランジュバン振動子 ● タイマー：1 ~ 99分 (1分単位) ● 電源コード長：2m
- 材質：本体/フタ：PP (ポリプロピレン) 槽：SUS304 ● オプション品：洗浄カゴ (KG03)、ピーカーラック (BR01)

サイズ(W×D×H mm)	290 × 208 × 249 mm
外形	(ゴム足含む)
サイズ(W×D×H mm)	240 × 140 × 100 (3L)
槽内	mm
重量 (kg)	4.4kg
電源 (V, Hz)	AC100V 50/60Hz 200VA
消費電力 (W, A)	110W
公称発振周波数	24kHz、31kHz
本体価格	168,000 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。


サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



CAM

R5

ウェット&ドライ。全てのミリングがこの1台で可能！

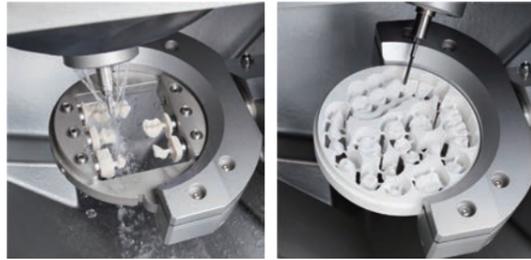

5 Axes 10 Discs 60 Blocks 16 Tools Dry + Wet Mill



片手でディスク固定を可能にした DirectDiskTechnology

乾式/湿式	乾式 & 湿式
軸数	5軸 (A軸 360°B軸 ±35°)
サイズ	W580×D600×H700 mm
重量	149 kg
最大回転数	80,000 min ⁻¹
ツールセット本数	16本 直径 98.5 mm t=40 mm .max
ブランクホルダー	ブロックは専用アダプターを使用 (最大 6本)
電源	AC100-240V 750W
CAMソフト/ CAM用PC	付属
コンプレッサー/集塵機	別途
エア消費量	6bar 100L/min~8bar 110L/min
本体価格	9,800,000円

一般医療機器届出番号：1381X10100000081

CAM

S5

ディスクチェンジャー付き乾式モデル



5 Axes 8 Discs 24 Block 16 Tools Mill

乾式/湿式	乾式
軸数	5軸 (A軸 360°B軸 ±30°)
サイズ	W691×D445×H540 mm
重量	106 kg
最大回転数	60,000 min ⁻¹
ツールセット本数	16本 直径 98.5 mm t=30 mm .max
ブランクホルダー	ブロックは専用アダプターを使用 (最大 3本)
電源	AC100-240V 750W
CAMソフト/ CAM用PC	付属
コンプレッサー/集塵機	別途
エア消費量	6bar 60L/min~8bar 73L/min
本体価格	7,500,000円

一般医療機器届出番号：1381X10100000081

CAM

K4

4軸エントリーモデル



4 Axes 1 Disc 7 Blocks Dry Mill

乾式/湿式	乾式
軸数	4軸 (A軸 360°)
サイズ	W400×D385×H410 mm
重量	45 kg
最大回転数	60,000 min ⁻¹
ツールセット本数	7本 直径 98.5 mm t=25 mm .max
ブランクホルダー	ブロックは専用アダプターを使用 (最大 6本)
電源	AC100-240V 300W
CAMソフト/ CAM用PC	付属
コンプレッサー/集塵機	別途
エア消費量	6bar 50L/min~8bar 80L/min
本体価格	3,600,000円

一般医療機器届出番号：1381X10100000081

CAM

Z4

クリニック向けブロック専用モデル



4 Axes 1 Block 6 Tools Wet Grind + Mill

乾式/湿式	湿式
軸数	4軸 (A軸 +190°~-10°)
サイズ	W471×D522×H507 mm
重量	66 kg
最大回転数	100,000 min ⁻¹
ツールセット本数	6本
ブランクホルダー	ブロック専用 (1本) L/D/H 40×20×20 mm .max
電源	AC100-240V 750W
CAMソフト/ CAM用PC	付属/内蔵
コンプレッサー/集塵機	内蔵/不要
エア消費量	-
本体価格	7,000,000円

一般医療機器届出番号：1381X10100000081

CAM

K5+ / K5

5軸スタンダードモデル



5 Axes 1 Disc 3 Blocks 16 Tools Dry Mill



乾式/湿式	乾式
軸数	5軸 (A軸 360°B軸 ±35°)
サイズ	W450×D545×H630 mm
重量	91 kg
最大回転数	60,000 min ⁻¹
ツールセット本数	16本 直径 98.5 mm t=40 mm .max
ブランクホルダー	ブロックは専用アダプターを使用 (最大 6本)
電源	AC100-240V 640W (K5+) 600W (K5)
CAMソフト/ CAM用PC	付属
コンプレッサー/集塵機	別途
エア消費量	6bar 80L/min~8bar 102L/min

K5+ イオナイザー、工具不要のディスク装着、Webカメラを搭載。

K5 (ベーシックバージョン)

本体価格 6,000,000円

本体価格 5,500,000円

一般医療機器届出番号：1381X10100000081

CAM用バー

vhf ミリングバー各種

高精度切削を可能にする、vhf 純正ミリングバー



ジルコニア用 コバルトクロム・チタン用 ガラスセラミックス用

Z200-R3D-35 / 40 (diamond coated)	M200-R4-32 / 35 (coated)	G240-R-35
Z120 - F2D-35 / 40 (diamond coated)	M200 - R2-32 / 35 (coated)	G120 - T-35
Z100-R2D-35 / 40 (diamond coated)	M120-T2-32 / 35 (coated)	G100-R-35
Z060-R2D - 35 / 40 (diamond coated)	M100-R2 - 32 / 35 (coated)	G060-T - 35
Z200-R3 - 35 / 40 (coated)	M060-R2 - 32 / 35 (coated)	G060-R - 35
Z100-R2 - 35 / 40 (coated)		

コンポジット用 ワックス・PMMA用 ユニバーサル用

C200-R1D-35 / 40 (diamond coated)	P250-F1-35 / 40	U120-F2-35 / 40
C100 - R1D-35 / 40 (diamond coated)	P200 - R2-35 / 40	U060 - R2-35 / 40
C200-R2-35 / 40 (coated)	P100-R2-35 / 40	U050-F2-35 / 40
C100-R2 - 35 / 40 (coated)	P200-R1 - 35 / 40	U030-R2 - 35 / 40
	P100-R1 - 35 / 40	

** 末尾 35/40 はツール全長を示しています。機種によって使用できる全長が異なります。また、機種によって使用できないツールがございます。詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

本体価格 お問い合わせください

一般医療機器届出番号：1381X10100000086

CAM用集塵器

商品番号：010650

Z1CAM PRO



CAM 器に最適化されたパワフルなドイツ製集塵器



48 ページで紹介されているサクシオンユニット ECO PRO の性能や機能をそのままに、更に CAM との連動機能を内蔵したモデルです。

** 他社 CAM 機では一部連動機能に対応していない場合がございます。

サイズ (W × D × H mm)	200 × 590 × 675 mm
重量 (kg)	28kg
電源 (V, Hz)	110V AC ± 5% 50/60Hz
消費電力 (W, A)	700W
集塵容量	11 L (リットル)
フィルター面積	1.1 m ²
吸引圧	190 mBar (ミリバール)
騒音レベル	42-58 dB

本体価格 450,000円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



シンタリングファーンネス

商品番号：010533




ミー ム シンタリングファーンネス HT-2

超大容量でスピードシンタリングにも対応したハイエンドモデル！

スピードシンタリング対応

高品質のニケイ化モリブデン発熱体 (MoSi2) を備えた加熱システムにより、SPEED 焼結プロセスでシンタリングを完了することができます。約 90 分～120 分でサイクルが完了するスピードシンタリングが可能です。

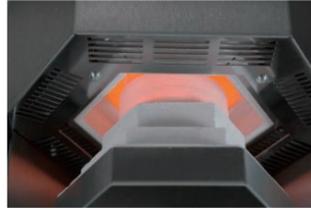

最大 75 ユニット** の超大容量サイズ

加熱チャンバーのサイズ大型化により、従来のノーマルシンタリングで最大 3 枚の焼結トレー Ø=120mm を同時に処理することが可能になりました。



** トレーの追加購入が必要です。

高品質なヒーティングエレメントを採用

高品質のニケイ化モリブデン発熱体 (MoSi2) により、3,800 ワットの高カロリーな熱量を安定して提供します。これにより、品質の高い焼き上がりを実現します。

最大
75 ユニット

ノーマル
シンタリング

スピード
シンタリング

ヒートアップ
換気プログラム

自動乾燥
プログラム

シンプルで使いやすいインターフェイス

HT-2 はシンプルでわかりやすいプログラムで操作できます。見やすい LCD ディスプレイ搭載、夜間シンタリング用のタイマー機能も標準装備されています。

HT-2/HTS-2 共通オプション

スピードシンタリング用トレー



スピード用シンタリングトレー 120mm
販売価格：24,000 円



スピード用ビーズ 2.0mm
200g 96023
販売価格：24,000 円

ノーマルシンタリング用トレー



シンタリングトレー 120mm
販売価格：22,000 円



ノーマル用グラニューレート
200g 95023
販売価格：12,000 円

シンタリングトレーフタ 120mm
販売価格：20,000 円

本体仕様	
サイズ (W×D×H mm)	W500 × D560 × H820 mm
重量 (kg)	74kg
電源 (V, Hz)	200-240 50/60Hz
シンタリング仕様	
エレメント	MoSi2 × 6 本
容量	75 シングルクラウン
最高温度	1,650° C
最高加熱速度	99° C / 分
消費電力	3,800W
最大焼成可能トレー数	Φ 120 mm × 3 (標準装備は 1 枚です)
登録可能プログラム数	30
ドライプログラム	有り
ヒートアップ換気プログラム	有り
オーバーナイトプログラム	有り
本体価格	1,600,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000295

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

シンタリングファーンネス

商品番号：010535



ミー ム シンタリングファーンネス HTS-2

HT シリーズ人気のスタンダードモデル！

最大 50 ユニット** の大容量サイズ

HTS-2 は、最大で 50 個** のクラウンにも対応した大きな焼結能力を提供します。

4 つの高性能ニケイ化モリブデン発熱体 (MoSi2) を備えた加熱システムにより、従来のノーマルシンタリングを使用するか、最大 99° C/ 分の昇温速度で SPEED シンタリングを使用するかを選択できるようになりました。

** トレーの追加購入が必要です。

スペースが限られることが多いこともあり、このモデルが一番人気となっています！



営業メンバーの声



最大
50 ユニット

ノーマル
シンタリング

スピード
シンタリング

ヒートアップ
換気プログラム

自動乾燥
プログラム

本体仕様	
サイズ (W×D×H mm)	W390 × D500 × H790 mm
重量 (kg)	60kg
電源 (V, Hz)	200-240V 50/60Hz
シンタリング仕様	
エレメント	MoSi2 × 4 本
容量	50 シングルクラウン
最高加熱速度	99° C / 分
消費電力	3,200W
最大焼成可能トレー数	Φ 120 mm × 2 (標準装備は 1 枚です)
登録可能プログラム数	30
ドライプログラム	有り
ヒートアップ換気プログラム	有り
オーバーナイトプログラム	有り
本体価格	1,400,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000295

シンタリングファーンネス

商品番号：010525



ミー ム シンタリングファーンネス TABEO

コンパクトサイズとパフォーマンスを追求したエントリーモデル

コンパクトさが魅力なエントリーモデル

TABEO (タベオ) は、HT シリーズの焼結クオリティをそのままにして、さらにコンパクトさと価格を追求したエントリーモデルです。

容量は 1 枚の焼結トレー Ø=100mm が入り、焼結プログラムはタベオへ簡単に入力して保存ができます。

TABEO は、HT/HTS-2 でも採用されている MoSi2 で作られたヒーティングエレメントを備え、従来のノーマルシンタリング用に設計されています。このヒーティングエレメントは、1650° C の最高炉温度を安定して出力します。



最大
20 ユニット

ノーマル
シンタリング

TABEO 専用オプション



シンタリングトレー 100mm
販売価格：20,000 円



グラニューレート 200g
95023
販売価格：12,000 円

シンタリングトレーフタ 100mm
販売価格：19,000 円

本体仕様	
サイズ (W×D×H mm)	W400 × D400 × H600 mm
重量 (kg)	55kg
電源 (V, Hz)	220-240V 50/60Hz
シンタリング仕様	
エレメント	MoSi2 × 4 本
容量	20 シングルクラウン
最高加熱速度	25° C / 分
消費電力	1,500W
最大焼成可能トレー数	Φ 100 mm × 1
登録可能プログラム数	9
ドライプログラム	無し
ヒートアップ換気プログラム	無し
オーバーナイトプログラム	有り
本体価格	900,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000243

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。




技工機器

3D プリンターを活用した製造プロセス



スキャン -Scanning-

物体のスキャンによるデジタル化は製造プロセスの基本です。スキャンによって生成されたデータを使用して、次の工程に進みます。

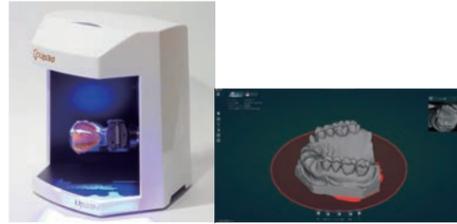


モデリング -Modelling-

スキャンしたデータはそのままではプリント出来ません。専用の CAD ソフトウェアで綺麗にリタッチを行いましょう。完成したら STL ファイルを出力します。




サポートピン -Creating Support-

出力したファイルを 3D プリンターへ入力します。プリンターに付属している専用のソフトウェアにインポートして、脱落しないようにサポートを建てましょう。

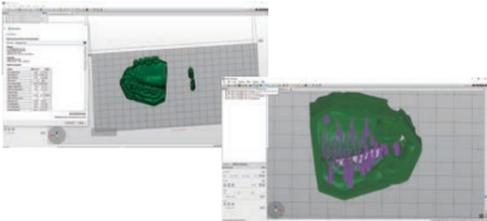


スライス -Slicing-

さて、サポートを綺麗に建てる事が出来たら、断面をスライスして最終確認をしましょう。脱落ポイントが無いのを確認したら、3D プリンターへ転送しましょう。

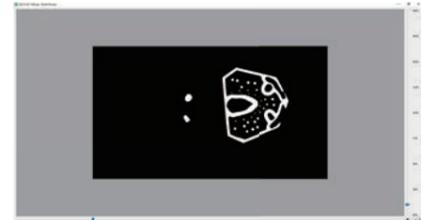

積層 -Printing-

プリントを行う際に、パラメーターが間違っていないか確認しましょう。樹脂によって、光の照射時間が違います。ただし数値でプリントするのが成功への一番の近道です。

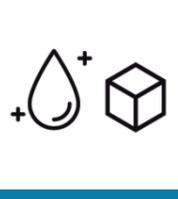

洗浄 -Cleaning-

プリントが終わったら、プラットフォームを外して洗浄を進めましょう。IPA と超音波洗浄機で、表面を綺麗に 2 回洗浄します。終わったら乾燥も 30 分お忘れなく。



重合 -Curing-

最後に、歯科の積層物は二次重合の工程が必須です。この作業を飛ばすと患者様の口の中で未重合樹脂が混入してしまいます。しっかりと最後仕上げで表面硬化を専用機器で行います。



完成！ -Done!-

おめでとうございます！ここまでのステップを行うと 3D プリントした模型やトレイなどは完成です。慣れると、更にたくさんの模型を正確にプリントできます。今まで手作業だったアライナー模型も 3D プリントで大量生産できます。

マスター S3D	38	センタートリマー	46
マスター S	38	ドライトリマー	46
DaDo アルゴン	39	モデルトリマー	46
マスター S 用ベーススタンド	39	レイフォスター ダストコレクター	47
名南メタルブラシ	39	ハイスピードグラインダースピードコントロール付	47
パリオ SC	42	サクシオンユニット Z1 ECO PRO	48
フレックスリング	42	サクシオンユニット Z1-M10	49
ハニカムトレイ	42	ザブラー クリーニングホースセット	49
パリオバランス 計量器	42	デンタグラフ TK バージョン	50
ブランジャー	42	パラワックス	50
ポーセレンホルダー 直/曲	43	SMT サーバイヤー 可動式 (モデルテーブル付)	50
ツイーザー 直/曲	43	ハンディーエコ マイクロモーター	51
イージーグリップ	43	コンビマイクロモーター	51
ラボベンチ	44	N7 マイクロモーター	51
ラボユーズ マイクロスコープ REACH (リーチ) LED 付	45	エアーターボ MAT-300W	51
ラボユーズ マイクロスコープ PAL (パル) LED 付	45	デュナフォームプラス	52
		ソニックカッター ZO-41 II	52
		バキュームアダプター	53
		スプリントシステムキット	53
		ジスク用トレイ 2 枚組 (角)	53
		ジスク用トレイ 2 枚組 (丸)	53
		シリコンスプレー	53
		ドゥ・スポーツ ファンガード	54
		ドゥ・スポーツ グリッターガード	54
		セントリフューズ	54
		スポーツマウスガード	55
		ドゥ・スポーツ	55
		コンビロックプラス	56
		マウスガード	56
		ブラキシズムスプリント	56
		個人トレイ	56
		コーピング	57
		アルミニウムトレイハンドル	57
		ホットエアハンディートーチ	57
		ベースプレート	57
		V.A 用ブロックアウト粘土	57
		スーパーシート	57



レーザー溶接機

レーザー溶接器 商品番号：010351

マスター S3D

溶接領域を立体視するための 3D VISION システムを装備したハイエンドモデル



80 ジュールのハイパワー

最大 80 ジュールのエネルギーを出力することができ、技工で使用する全てのメタルの溶接が可能です。冷却タンクも余裕の 5 リットルを搭載することにより、オーバーヒートを防ぎます。マスター S シリーズには、強化された新型フラッシュランプが装備され、ランプの寿命が更に長くなりました。

見やすい 3D VISION システム

マスター S 3D には、溶接ゾーンを立体的に見せるための 3D VISION システムが装備されています。双眼鏡が苦手な方や、眼鏡を装着したまま作業をしたい方に、非常におすすめです。長時間の作業でも疲れにくい、最新のシステムです。

第三者も確認できるカメラを搭載

本体に装備されたスクリーンから、溶接シーンを確認することのできるカメラを搭載しています。録画もできるので、ドクターへの説明や研修等での使用でも大変便利です。



1つのスクリーンでパラメーター調整から映像確認までカバーします。

** オプションで名南特注のシャワーノズル 4,800 円 (DaDo 右図参照) へ交換が可能です。

本体仕様	
サイズ (W × D × H mm)	480 × 800 × 650 mm
重量	30kg
電源	110V 50/60Hz
スコープ部 (メーカー等)	ビジョンエンジニアリング社製 Lynx Evo
メモリ数	100 メモリー

レーザー性能	
レーザー種	Nd:YAG
YAG 波長	1064nm
平均出力	75W
最大パルス出力 kW	5kW
パルスエネルギー	80J
パルス幅 ms	0.1~16ms
パルス波長 Hz	0.5~30Hz
スポット径 mm	0.2~2.0 mm
スポットポジション	30 ポジション
パルス波形制御	6 プログラム
冷却水容量 リットル	5ℓ

本体価格	2,400,000 円
------	-------------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000310

レーザー溶接器 商品番号：010350

マスター S

双眼レンズタイプのスタンダードモデル



マスター S3D の溶接機能をそのままに、Leica 社製の扱いやすい双眼レンズタイプのスタンダードモデルです。



正面に配置された見やすいディスプレイ
** 自当ては別売り (1,800 円 / 2 入) になります。

本体仕様	
サイズ (W × D × H mm)	480 × 650 × 500 mm
重量	30kg
電源	110V 50/60Hz
スコープ部 (メーカー等)	ライカ社製 10 倍レンズ
メモリ数	100 メモリー

レーザー性能	
レーザー種	Nd:YAG
YAG 波長	1064nm
平均出力	75W
最大パルス出力 kW	5kW
パルスエネルギー	80J
パルス幅 ms	0.1~16ms
パルス波長 Hz	0.5~30Hz
スポット径 mm	0.2~2.0 mm
スポットポジション	30 ポジション
パルス波形制御	6 プログラム
冷却水容量 リットル	5ℓ

本体価格	2,100,000 円
------	-------------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000309

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

レーザー溶接器 商品番号：010354

DaDo アルゴン

圧倒的なコストパフォーマンスで人気のエントリーモデル



コストパフォーマンス

70 万円を切るコストパフォーマンスが特徴の Dado® レーザー溶接器です。レーザー溶接器が初めての方や、追加で溶接器を導入したい方の両方におすすめです。

簡単な操作性

Dado アルゴンなら簡単なチタン溶接も可能です。チャンバー内のダイヤルを回すことによってパワーの出力調整ができます。スマートフォンやタブレットを介して、パワー設定をワイヤレスで操作することもできます。(Android / iOS 両対応)



コンパクトサイズ

Dado は設置面積を取らないので、院内ラボやちょっとした作業スペースにも設置できます。



本体仕様	
サイズ (W × D × H mm)	340 × 340 × 340 mm
重量 (kg)	15kg
電源 (V, Hz)	110V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	150W

レーザー性能	
レーザー種	Nd:YAG
YAG 波長	1064nm
最大パルス出力 kW	1.8kW
パルス幅 ms	0.1~6ms
スポット径 mm	0.2~1.5mm
スコープ部	10 倍
冷却水容量 リットル	1ℓ

本体価格	698,000 円
------	-----------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000391

レーザー溶接器オプション 商品番号：010352

マスター S 用ベーススタンド

高さ調整が便利な専用電動スタンド



タッチパネルから電動で上下に操作できる電動ベーススタンド。長時間集中してしまいがちな溶接作業も、自分に合った正しい姿勢で行えます。

サイズ (W × D × H mm)	520 × 710 × 760 mm
重量	23kg

複数のユーザーで使用する場合は絶対におすすめです！
営業メンバーの声

本体価格	200,000 円
------	-----------

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

レーザー溶接器アクセサリ 商品番号：005813

名南メタルブラシ

溶接時の煤払いに大活躍！



溶接時に発生する煤の除去に最適なブラシです。
ブラシの強度が絶好で、煤がすぐに除去できて大変便利です！
営業メンバーの声

本体価格	2,000 円
------	---------

名南公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！



名南公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

プレス・ポーセレンファーンネス

商品番号：010610

バリオプレス 300.e ZR

審美性の高いプレス品質で定評のある、ドイツ製プレスファーンネスです。



ファーンネス本体



アドバンスドモード

特許を取得したアドバンスドモードは、炉内からプレスリングの内部まで温度を均一にできる独自の技術です。これにより、ニケイ酸リチウムの理想的な温度と短時間でのプレスによって、反応層が抑えられます。

TTC モード (ジルコニアに最適な線形冷却が可能)

焼成台の高さを自動制御する TTC モードでは、焼成物の冷却が一定速度で可能になります。これにより、急な冷却で発生しがちなジルコニアやセラミックの亀裂や、欠けが防止されます。

Zドライモード

内部センサーの動きにより、チャンバー内の温度が自動的に確保されます。

これにより、陶材の理想的な予備乾燥温度を管理することができ、時間を大幅に節約することができます。

マッフルフォーミング (台座)

マッフルリングと台座との接触による熱の流出を最小限に防ぐため、三脚状の専用台座を使用しています。マッフルリングをチャンバー内で浮いた状態にさせることにより、全体的に熱を行き渡らせることができます。

アドバンスドモード

均一な加熱リング

PFC 安全設計

TTCモード

Zドライモード

タッチ式ディスプレイ


従来の加熱

** 温度が均一になっていない。

ザブラー社の加熱

** 温度が均一になっている。

アドバンスドモード (特許技術)

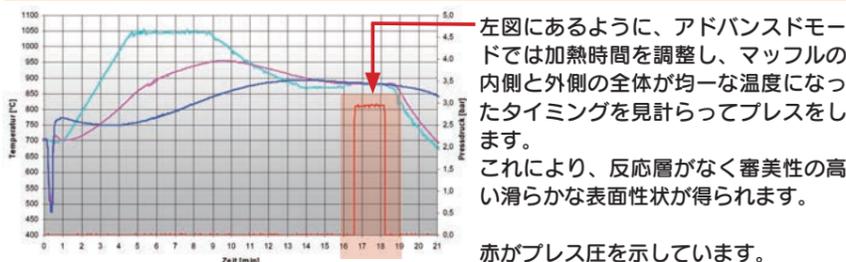

本体仕様	
サイズ (W × D × H mm)	360 × 425 × 765 mm
重量	27kg
使用電圧	110V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	1,250W

ディスプレイ	120x90 mm LCD
最高燃焼温度	1,200°C
プログラム数最大	500
プレス圧	3.0 / 4.5bar
リングサイズ	100g / 200g

・専用ポンプ付き (320x186x275mm / 12kg)
 (** 別途コンプレッサーが必要となります。)

本体価格	1,300,000 円
------	-------------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000203

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

高品質な熱線コイルの採用

プレスの成功は、いかにチャンバー内の熱が均一であるかに大きく依存します。

バリオプレス 300.e ZR は高品質な 7 層の熱線コイルでチャンバー内を完全に覆います。場所によって発生する、マッフルリングやフォーマーからの不均一な放熱を回避します。



ポーセレンファーンネス

商品番号：010611

バリオ 200 ZR

海外で定評のある、内径 120mm で広々使えるドイツ製ポーセレンファーンネスです。



ファーンネス本体



Zドライモード

内部センサーの動きにより、チャンバー内の温度が自動的に確保されます。

これにより、陶材の理想的な予備乾燥温度を管理することができ、時間を大幅に節約することができます。

Z-120 テクノロジー

直径 120mm もあるチャンバーの広さには理由があります。ザブラー社独自の技術によって、トレー上の温度が均一になるよう制御されています。これにより、配置による焼き具合のばらつきといった焼成エラーを防ぐことが出来ます。

TTC モード (ジルコニアに最適な線形冷却が可能)

焼成台の高さを自動制御する TTC モードでは、焼成物の冷却が一定速度で可能になります。これにより、急な冷却で発生しがちなジルコニアやセラミックの亀裂や、欠けが防止されます。

革新的で現代的な LCD ディスプレイ

耐衝撃性と耐熱性の安全ガラスで構成されています。洗練されたインテリジェントなメニューナビゲーションにより、非常に使いやすくなっています。

TTCモード

Z120 テクノロジー

PFC 安全設計

Zドライモード

タッチ式ディスプレイ

Z-120 テクノロジー


バリオ 200 ZR はチャンバーの内径が 120mm あります。

直径 80mm のトレー上では、位置や数量に関係なく、焼成温度が均一に確保されます。

同時に多くのセラミックを焼成させても同じ結果が得られます。



TTC モード (ジルコニアに最適な線形冷却が可能)

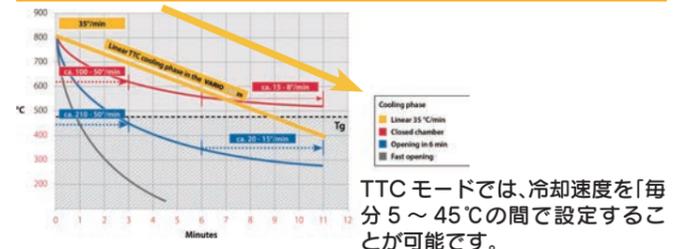


Zドライモード

Zドライモードでは焼成台の高さをプログラムで自動制御することにより、チャンバー内の温度とセラミックの距離を監視しながら効率よく乾燥を進めることが出来ます。これにより、亀裂や気泡が防止されます。

その後の焼結も、この制御により乾燥時間の節約になります。

プログラム制御で高さを自動調整します。

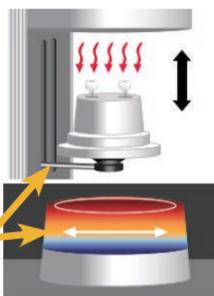

本体仕様	
サイズ (W × D × H mm)	320 × 460 × 540 mm
重量	23kg
使用電圧	110V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	1,250W

ディスプレイ	120x90 mm LCD
最高燃焼温度	1,200°C
プログラム数最大	500

・専用ポンプ付き (320x186x275mm / 12kg)

本体価格	800,000 円
------	-----------

一般医療機器届出番号：23B2X10023000204

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では
 最新ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
 新商品や使い方を公開しています！

デジタルオート計量器 商品番号：010609

バリオバランス 計量器

シリンダー要らず！品質管理の改善と時間の節約に



エラー率はわずか1%以下、最新のセンサーを使用して精密な膨張制御ができます。使用している材料によって異なるプログラムを50個まで登録して、常に安定した計量をリアルタイムで実現。

メスシリンダーの従来法では液体の量が目分量になってしまい、不正確な計量になってしまいます。ミキシングボウルで液体と粉末を直接測定することにより、作業者が変わっても器械に登録したプログラムにより常に一定の膨張が得られます。デジタル制御ができるオート計量器の導入によって、大きな費用対効果を生み出します。

Measured liquid: 12.9 ml

Powder needed: 99.2 g

飛散防止の安全なガラスインターフェイス（タッチ機能付）は、デザインだけでなく、掃除とメンテナンスも簡単です。

サイズ(W×D×H mm)	170 × 215 × 75 mm
重量 (kg)	1.1kg
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz

本体価格 58,000 円

液体の量に応じて必要な粉末量をリアルタイム表示。誰でも正確に計量が可能です。

プレス冷却器 商品番号：010608

バリオ SC

冷却時間の短縮化とプレス品質を確保



プレスされたリングに圧をかけることにより、冷却後のセラミックの品質維持をサポートし、特に薄いマージン部などの（引け）を防止します。

本体にあるファンが、リングの冷却時間を約50%も短縮できます。

100、200、300グラムから圧力を選択できるため、プレスしたリングサイズに応じて最適で効果的な冷却を実現できます。

通常冷却の場合
マージン部の引けや表面の凹凸が発生してしまふ。

Q. どうして冷却時に圧力かけるのか？
セラミック材料は冷却段階で表面に凹凸が発生しやすくなります。特にゆっくりと冷やす場合はより多くの面で発生してしまいます。この機器で圧力をかけると逆圧が掛かり、特に薄いマージン部で表面品質の低下や引けを防ぐことが出来ます。

バリオ SC の場合
マージン部の引け（マージンショート）が防止可能に！

サイズ(W×D×H mm)	140 × 150 × 315 mm
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz

本体価格 78,000 円

マッフルリングフォーマー 商品番号：下記参照

フレックスリング

波上のリング表面（特許技術）でプレス品質を高める！



高い耐久性で長く使っても安定したサイズのマッフルを作成できます。

特殊な表面の凹凸で表面積が40%アップ！これにより素早く均一な加熱や冷却が可能です。

振り出し時の目安となるライン


スプルーの高さ＝振り出し時のカット推奨ライン

商品番号	商品名	本体価格
010555	フレックスリング 100g	8,600 円
010556	フレックスリング 200g	8,800 円

ポーセレン焼成トレー 商品番号：010586

ハニカムトレー

独自形状のピンで安定したポーセレン設置が可能に！

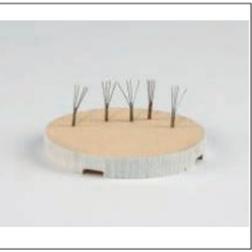

ドイツマイスターが考え抜いた独自形状のピンで、ポーセレンをがっちりホールドします。

**** ピンが標準で5本付属します。**

サイズ	φ 78 mm
材質 (トレー)	セラミック

本体価格 2,480 円

サイズ	φ 78 mm
材質 (トレー)	セラミック

本体価格 2,480 円

ホールディングプライヤー 商品番号：下記参照

ポーセレンホルダー 直/曲

便利なピン付ホルダー



ポーセレン、硬質レジン築盛時、補綴物をしっかり保持できます。

ピンが付いており、補綴物を机に置く際に、ホコリやゴミ等の付着を防げます。ピンを擦ってコンデンスにもご利用いただけます。

ピンが長く感じられる時はカットしてご使用ください。

商品番号	商品名	本体価格
006305	ポーセレンホルダー 曲 ピン付き	各 1,400 円
006306	ポーセレンホルダー 直 ピン付き	

一般医療機器届出番号：23B2X10023000238

ホールディングプライヤー 商品番号：010587

イーゼーグリップ

小さくて疲れにくい！注射器型のホールディングプライヤー



小型で扱いやすい、ポーセレンホルダー。バネの力でしっかりとポーセレンを保持してくれるので、手が疲れません。

軽量（約3.5g）なので女性でも簡単に使えます。

全長	約 90 mm
先端ホルド内径	約 20 mm
材質	ステンレス、樹脂

本体価格 980 円

プレス用プランジャー 商品番号：010554

プランジャー

使い捨てタイプのプランジャー



鋳型と同じリン酸塩系の材料で作られたディスコタイプです。

従来の再利用可能なタイプ（酸化アルミニウム製）に比べ、熱伝導が速く均一なのでプレスエラーを防ぎます。

再利用プランジャーで起こりがちなエラー

ザブラー社

サイズ	φ 13 mm
販売単位	50本入り

本体価格 14,000 円

ホールディングプライヤー 商品番号：下記参照

ツイーザー 直/曲

細かな作業を快適にアシスト



小さな補綴物でもしっかり保持できますので作業がしやすい！

爪のついたグリップなので握り続けなくても保持ができるため、手が疲れません。

商品番号	商品名	本体価格
003301	ツイーザー 直	各 1,400 円
003303	ツイーザー 曲	

一般医療機器届出番号：23B2X10023000237

技工机

商品番号：下記参照

ラボベンチ

魅力的なデザインで魅力的な価格の技工机



ラボベンチ



ハイコストパフォーマンスモデル

技工作業に最適化された、名商ロングセラーの技工机です。利便性の高いアームレストやサクシヨンマウス、エアガンなどは標準装備。日々の技工作業を力強くサポートします。



2色展開


技工室を明るく彩る、イエローとシルバーグレーの2色をご用意。



院内やラボの雰囲気や、お好みに合わせてお選び頂けます。

長寿命 LED 照明採用

40,000 時間以上の長寿命と、低消費電力が特徴の LED ライトを採用しています。LED 光の ON/OFF と調光はボタン一つで簡単操作できます。

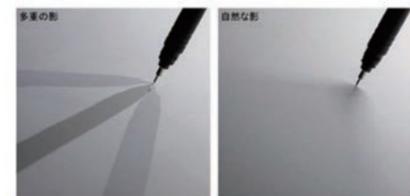

サイズ (W×D×H mm)	1,200 × 600 × 835 mm
机上棚の高さ (1 段)	250 mm
バキュームモーターサイズ	190 × 190 × 350 mm
バキュームモーター風量	最大 1.0m³/min
バキュームモーター電源	100V 10A 50/60Hz
照明 (W, Lux)	36W 1,000Lux
カラー展開	シルバー・イエロー

商品番号	商品名	本体価格
004931	ラボベンチ A1S イエロー	各 290,000 円
004932	ラボベンチ A1S シルバーグレー	
004708	ラボベンチ用バキュームモーター	55,000 円

技工机オプション

商品番号：下記参照



人間工学に基づき開発された、座り心地の良い椅子です。腰と背骨を 2 枚の背もたれでしっかりホールドするため、長時間座っても腰に負担を掛けません。



商品番号：014003
デュオレスト 肘あり DR-250SP
本体価格 45,000 円

商品番号：014001
デュオレスト 肘なし DR-257
本体価格 38,300 円



商品番号：004746
セントラルバキュームキット
本体価格 55,000 円

セントラルバキュームで利用できる様な、シャッター式への加工も承ります。



商品番号：004997
フットレスト
本体価格 5,000 円



商品番号：004934
A1S 用棚セット (コンセント無し)
本体価格 25,000 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！



こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

技工用マイクロ스코ープ

商品番号：008420

ラボユーズ マイクロ스코ープ REACH (リーチ) LED 付

ロングアームにより場所に困らず作業や収納が出来ます！



ロングアームのネックにより、角度、方向、高さを調整できます。

明るさも調整できる LED リングライトが標準セットなので手元をより明るく照らします。

棚に設置することができるのでいつもの自分のポジションをキープすることができ、すぐに使うことができます。

接眼レンズの倍率は、4 倍用または 8 倍用から選ぶことができます。
** レンズは単体販売もしております。レンズ各倍率セット 各 6,000 円

LED ライトが標準付属



LED リングライトで手元を明るく照らします。
ダイヤルで照度を調整できます。

本体 + 4 倍用もしくは 8 倍用レンズが付属	
重量 (kg)	2.0 kg
アーム長 mm	1,050 mm
倍率	4 倍用 / 8 倍用
作業距離	145 mm
視野径	18.60 mm (4 倍用) 20.00 mm (8 倍用)
眼幅調節距離	55~75mm
鏡体機能	左側接眼筒視度補正 ± 5D
照明	LED
照明電圧	100V 50/60Hz
本体価格	39,800 円

操作性が高いロングアームを標準装備



机や棚にクランプで固定できるので、いままでの台座分のスペースを節約することができます。

技工用マイクロ스코ープ

商品番号：008369

ラボユーズ マイクロ스코ープ PAL (パル) LED 付

コンパクトで軽量、技工用マイクロ스코ープ



コンパクトサイズで軽量、移動が簡単で、作業スペースをほとんど必要としません。

柔軟なアームにより、角度、方向、高さを調整できます。

明るさも調整できる LED リングライトが標準セットなので、手元をより明るく照らします。

4 倍用と 8 倍用の接眼レンズがセット内容に含まれます。

4 倍用と 8 倍用がセットで付属



固定可能なフレキシブルアーム



重量 (kg)	3.9 kg
アーム長 mm	290 mm
倍率	4 倍用 / 8 倍用
作業距離	145 mm
視野径	18.60 mm (4 倍用) 20.00 mm (8 倍用)
眼幅調節距離	55~75 mm
鏡体機能	左側接眼筒視度補正 ± 5D
照明	LED
照明電圧	100V 50/60Hz
本体価格	48,000 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！

ラボ用スコープ

レーザー溶接機

ファーンズ本体

ファーンズ関連機器材

ラボベンチ

ラボベンチ関連機器材

ラボ用スコープ

トリマーグライNDER本体

サクシヨンユニット本体

サバイヤ本体

マイクロモーター

バキュームフォーマー

フォーマー関連機器材

マウスガード

マウスガード関連機器材

商品番号：下記参照

センタートリマー

発売から 20 年以上のロングセラー



< 型番と特徴 >

318	綺麗に速く口蓋部及び側面部のトリミングができるトリマー専用器（吸塵機内蔵型）
318G	318 タイプに外部吸塵装置接続口を装備したタイプ
528	318 タイプの機能とピン植立用の穴開け作業のできる複合タイプ（吸塵機内蔵型）
528G	528 タイプに外部吸塵装置接続口を装備したタイプ

** メーカー直送品です。

本製品は、P.73のセンタートリマードリルがご使用いただけます。

電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	130 W

商品番号	商品名	本体価格
002103	センタートリマー 318	106,000 円
002104	センタートリマー 318G	110,000 円
002101	センタートリマー 528	206,000 円
002102	センタートリマー 528G	210,000 円



Gタイプについて
背面には外部吸塵装置接続のための穴が開いています。
付属品として、アクリルアダプター、ジャバラホース（内径38mm）が付属しております。

乾式モデルトリマー 商品番号：005803

ドライトリマー

水不要で正確な模型が作成できます！



給水に接続する必要がなく排水管も必要としないので、どんな場所にも置くことができます。
水を使用しないので、石膏の吸水膨張や劣化の心配がなく、滑らかで綺麗に切削することができます。
シンプルな構造により、静かでスムーズな稼働が可能です。
オリジナルのスイングドアにより、ディスクの交換や内部の清掃が非常に楽に行えます。
石膏排水が出ないので、環境にも優しいです。

< 注意事項 >

濡れた状態の模型を切削してしまうとディスクに石膏が詰まってしまう本来の性能を発揮することが出来ません。
必ず模型は乾いた状態で切削を開始してください。

■ 消耗品

	ドライトリマー 粘着ジスク (5 入) A028 販売価格：12,000 円		クリーニング棒 X164 販売価格：3,500 円
--	--	--	------------------------------

サイズ (W×D×H mm)	365 × 420 × 365 mm
重量 (kg)	15.5kg
電源 (V, Hz)	115V 50/60Hz
ジスクサイズ	10 インチ

本体価格 160,000 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000028

湿式モデルトリマー 商品番号：下記参照

モデルトリマー

長期使用にも耐えられる耐久性と耐腐食性を兼ね備えたモデルトリマー



鋳造アルミニウムで構成された本体は、光沢のある白いエポキシ樹脂でコーティングされており、耐久性・耐腐食性に優れております。

使い勝手にこだわったスイングドアにより、ディスクの交換や内部の清掃が非常に楽に行えます。

大型のモーターを搭載することで切削力があり、高トルクなので強く模型を押し当てても止まることなく安心して作業が行えます。

商品番号：005805

モデルトリマー (10 インチ)

サイズ (W×D×H mm)	365 × 420 × 365 mm
重量 (kg)	15.5kg
電源 (V, Hz)	115V 50/60Hz

本体価格 130,000 円

商品番号：005791

モデルトリマー (12 インチ)

サイズ (W×D×H mm)	420 × 400 × 430 mm
重量 (kg)	18.0kg
電源 (V, Hz)	115V 50/60Hz

本体価格 160,000 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000027

■ 消耗品

	モデルトリマージスク (10インチ) 販売価格：8,800 円
	モデルトリマージスク (12インチ) 販売価格：12,000 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

商品番号：002001

レイフォスター ダストコレクター

コンパクトでも強力な集塵機



非常に静かな 59dB のノイズレベルなのに強い吸引力をキープできます。

交換が簡単で経済的な使い捨てフィルターは、3 ミクロンまでの粒子を捕らえます。

便利な 2 つの吸引口を搭載

吸引口が 2 ヶ所あるので、2 つのホースを同時に接続できます。

** 長さ約 2 メートル（口径約 3.8 cm）のホースが 1 本同梱されています。

大容量の集塵バッグ！



ドライトリマー・ハイスピードグラインダーと連動可能



■ 別売りオプション品

ダストコレクター用平台車 X152
販売価格：15,000 円

■ 消耗品

ダストコレクター用ダストバッグ 10 入
販売価格：12,000 円

サイズ (W×D×H mm)	320 × 320 × 510 mm
重量 (kg)	16kg
電源 (V, Hz)	115V 50/60Hz
ノイズ	59dB

本体価格 180,000 円

高速レーズ 商品番号：003701

ハイスピードグラインダー スピードコントロール付

名南ロングセラーの高速レーズ！



スプルーの切断や、コバルトのフレームワークの仕上げ、研磨作業において、時間を節約することができます。

スピンドルの位置、安全シールド、照明の位置を調整できるので、使いやすくカスタマイズ可能です。

作業者の快適さのための広い作業領域を備えています。

モーターを停止することなく工具を交換できます。

ダイヤルでスピードコントロールが簡単に！

速度調整が無段階のダイヤルで、手元で行えます。



■ 消耗品

ハイスピードグラインダー用スピンドル F030
販売価格：70,000 円

ハイスピードグラインダー用チャック F106
販売価格：4,500 円

サイズ (W×D×H mm)	260 × 330 × 280mm
重量 (kg)	12.7kg
電源 (V, Hz)	115V 50/60Hz

本体価格 280,000 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000015

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を公開しています！

ダストバッグフリー式集塵器

商品番号：010648

サクシオンユニット Z1 ECO PRO

ダストバッグが不要の、経済的なサクシオンユニット



ダストバッグ不要で経済的なシステム

粉塵はダストボックスへ溜まるように設計されています。ダストバッグが不要なので、とても経済的です。

オートクリーニング機能を標準搭載

フィルターの清掃は、コンプレッサーエアーを使って自動的に運転休止中に行われます。背面にある大型フィルターが微細なダストまでしっかりと絡め取るので、非常に綺麗な空気が排出されます。

騒音を抑えた静音設計

高い吸引力を持ちながら、高度な静音設計により騒音レベルを僅か 41 ~ 64dB に抑えています。今まで気になっていた、あの吸引音を最小限にできるので、騒音ストレスから開放されます。

メンテナンス性の高い内部構造

フィルターとモーターの交換の際、工具不要のカンタン操作で作業ができます。

摩耗を抑えるコントロールシステムを採用


Z1 ECO PRO は、ザブラー社独自のモーター制御（スマートドライブコントロール）により、従来品と比べてモーターとカーボンブラシの寿命が大幅に長くなりました。（下図説明参照）
さらに、モーターとカーボンブラシは簡単に交換することができます。

スマートドライブコントロール搭載

スマートドライブコントロールにより、モーターは約 1,500 時間もの長寿命を実現しました。またモーターだけでなく、カーボンブラシの摩耗にも優しいシステム制御を行っています。

工具不要のモーター交換

工具を使わずに短時間で、モーターやフィルターの交換が可能です。

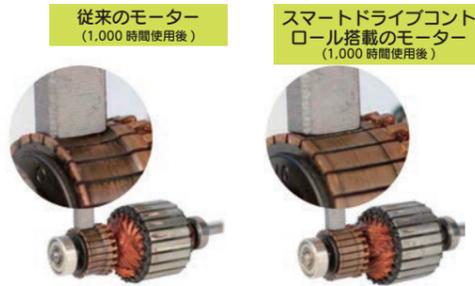

サイズ(W×D×H mm)	200 × 590 × 675 mm
重量(kg)	28kg
電源(V, Hz)	110V 50/60Hz
消費電力(W, A)	700W
モーター耐久時間	約 1,500 時間以上
集塵容量	11.0L (リットル)
吸引圧	190mBar (ミリバル)
フィルター面積	1.1m ²
騒音レベル	45~60 dB
本体価格	450,000 円

CAM 器専用集塵システム
Z1 CAM PRO
P.33 参照

ダストバッグ式集塵器

商品番号：010649

サクシオンユニット Z1-M10

コンパクトでも強力な集塵器



技工機とセットでの導入がおすすめです。

Z1 シリーズの集塵ユニットは、呼吸器や皮膚の職業性疾患の一次予防に非常に効果的です。

ほこりや粉塵は迷惑なだけでなく、体にも悪影響を及ぼします。ラボ内には研磨作業などのときに生成される、さまざまな種類の粉末や粉末混合物に毎日排出されています。技工作業は顔の近くで行われます。そのため粒子の吸入をうまく防ぐには、一定の吸引力を持つ吸引システムが必須です。

- パワフル&サイレントです。
- 交換可能なフィルターをドア内部に備えた、コンパクトな吸引ユニットです。
- 無段階で吸引力を調整できます。
- 技工用ハンドピースなどとの連動も可能です。
- フィルターが満杯になると、オートストップ機能が働いてモーターを守ります。



サイズ(W×D×H mm)	300 × 440 × 435 mm
重量(kg)	19kg
電源(V, Hz)	110V 50/60Hz
消費電力(W, A)	700W
集塵容量	3.0L (リットル)
吸引圧	180mBar (ミリバル)
フィルター面積	0.7m ²
騒音レベル	47~58 dB
本体価格	248,000 円

バキューム用クリーニングオプション

商品番号：010618

ザブラー クリーニングホースセット

お持ちのバキュームシステムが掃除機に！5メートルのホースで広々お掃除！



金属リサイクルの強い味方！今まで回収しきれなかった廃メタルや研磨くずも隅々まで回収できます。

5メートルの吸引ホース、フロアノズル、作業用ブラシ、および隙間ノズルで構成されるクリーニングセットです。

技工所の床、作業場のお掃除用に専用設計されています。

煩わしい電源ケーブルは必要なく、作業用の集塵装置が掃除機の代わりになるため、吸引力も損ないません。

掃除機の故障に悩むこともありません。
** お持ちのバキュームシステムの吸引力により、パワーが弱まる場合がございます。



ホース長さ(m)	約 5メートル
本体価格	12,800 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

レーザー溶接機

ファーンズ本体

ファーンズ関連機器材

ラボベンチ

ラボベンチ関連機器材

ラボ用スコープ

トリマーグラインダー本体

サクシオンユニット本体

サバイヤー本体

マイクロモーター

バキュームフォーマー

フォーマー関連機器材

マウスガード

マウスガード関連機器材

レーザー溶接機

ファーンズ本体

ファーンズ関連機器材

ラボベンチ

ラボベンチ関連機器材

ラボ用スコープ

トリマーグラインダー本体

サクシオンユニット本体

サバイヤー本体

マイクロモーター

バキュームフォーマー

フォーマー関連機器材

マウスガード

マウスガード関連機器材



名商公式 facebook では
最新ニュースを発信しています！

デモ器
こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル
こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を動画で公開しています！

多機能サバイヤー

商品番号：001500

デンタグラフ TK バージョン

ダブルアームによる、滑らかな操作感！ヒーター完備のハイエンドモデル！



デンタグラフは、高精度な部分床義歯を作成するために必要な精度を提供します。

すべての可動部品には高精度ボールベアリングが使用されています。無段階で高さを調整できるネジロック付きアーム、および引張りばねを介して高さを調整でき、正確な平行ガイダンスを備えた伸縮式ホルダーを備えています。

< 付属品 >
TK ラビットゲージ、カーボンマーカ、パラレルピン / スクレーパー、0、2、4、6 度のヒーターワックス用ブロックアウトピン付き

0.2、0.3、0.5 mm が標準付属

別売りオプション品



TK ラビットゲージ付き



モデルテーブル
販売価格：16,500 円

サイズ (W×D×H mm)	250 × 200 × 370 mm
重量 (kg)	4kg
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz

本体価格 320,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000292

OBODENT GmbH

デモ器
貸出し可能です。

外付けワックスヒーター

商品番号：001504

パラワックス

模型製作の時間を節約！



可変および一定温度の作業モードは、ストレスのない模型を作成するために役に立ちます。シャック軸は 3.0mm と 2.35 mm をご用意。お持ちのサバイヤーと合わせてご使用いただけます。

技工室内でオイルランプ等の裸火を使用しないので、安全です。

電気使用量も最小限に抑えられているため、省エネです。

交換可能なテーパーとストレートのブロックアウトピンも標準で含まれます！

付属品 (単体販売可)



コネクターケーブル シャック付き
各種 (3.0mm 用、2.35mm 用)
販売価格：各 15,000 円



ブロックアウトピン各種
(0、2、4、6 度)
販売価格：各 4,900 円

サイズ (W×D×H mm)	66 × 70 × 125mm
重量 (kg)	450g
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	4W

本体価格 56,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000273

OBODENT GmbH

デモ器
貸出し可能です。

サバイヤー

商品番号：001402

SMT サバイヤー 可動式 (モデルテーブル付)

お求めやすい価格のエントリーモデル



義歯の製作にサバイヤーを使用することで、模型の段階と合金からの铸造後の両方で、製造とフィッティングの高い精度が担保されます。

サバイヤーを使用すると、測定とマーキングによって石膏模型の支台歯の平行度を調べることができます。

複雑な一体型キャストクラスデンチャーの製作でも大活躍します！



< ロットセットの内訳 >

- ・アナライジングロッド
- ・カーボンホルダー
- ・カーボンマーカ
- ・アンダーカットゲージ (0.25、0.50、0.75mm)
- ・ワックストリマー
- ・テーパーツール 6'

サイズ (W×D×H mm)	φ 168 × H241mm
重量 (kg)	1.9kg

本体価格 55,000 円

OBODENT パラワックスと併用してご使用いただけます。

** 写真のパラワックスは別売りです。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

デモ器
貸出し可能です。

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

ブラシレスマイクロモーター

商品番号：009956

ハンディーエコ マイクロモーター

コンパクトなブラシレスマイクロモーター



7.8Ncm の高トルクブラシレスマイクロモーターです。安全のための自動過負荷保護システム付きです。ハンドピースの速度をデジタルディスプレイにて確認ができます。可変速度コントロールペダル (FS60N) 付です。横に置くこともでき広い作業スペースを確保することができます。



本体仕様

サイズ (W×D×H mm)	141 × 186 × 97 mm
重量 (kg)	1.6kg
電源 (V, Hz)	AC100-120V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	60W

ハンドピース仕様

最大回転数 rpm	1,000-50,000 rpm
最大トルク Ncm	7.8Ncm
コード長 m (メートル)	1.5 m
ハンドピース重量	230g
ハンドピースサイズ	φ 27L160mm
ハンドピース型番	SDE-BM50S1

本体価格 128,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000175

saeyang

デモ器
貸出し可能です。

ブラシタイプマイクロモーター

商品番号：009922

N7 マイクロモーター

手ごろな価格のマイクロモーター



4.5Ncm の使いやすいブラシタイプマイクロモーターです。安全のための自動過負荷保護システム付きです。スイッチ用防塵カバー付きなので、良く触るスイッチを粉塵から守ります。可変速度コントロールペダル (FS-60) 付きです。



過負荷がひと目で分かる！ 防塵カバー付きのスイッチ！ 安定のハンドピースホルダー。



高トルク HP



便利な HP ホルダー



フットペダル

本体仕様

サイズ (W×D×H mm)	115 × 147 × 96 mm
重量 (kg)	1.7kg
電源 (V, Hz)	AC100-120V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	50W

ハンドピース仕様

最大回転数 rpm	0-40,000 rpm
最大トルク Ncm	4.5Ncm
コード長 m (メートル)	1.5m
ハンドピース重量	210g
ハンドピースサイズ	φ 20L152
ハンドピース型番	SDE-SH37LN

本体価格 60,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000009

saeyang


デモ器
貸出し可能です。

注水式技工用エアータービン

商品番号：029030

エアーターボ MAT-300W

お求めやすい価格の注水式技工用エアータービン

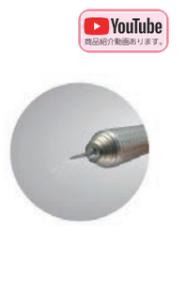

スピードコントロール用ペダル付きで、水量と空気圧の調整が容易に行えます。

簡単にバーの抜き差しが行えるハンドルのチャックシステムを搭載しています。

ハンドピースはノイズと振動が少ない設計になっています。

消耗品で交換用カートリッジ (22,000 円) も取り揃えています。

ユニット仕様

サイズ (W×D×H mm)	234 × 99 × 190 mm
総重量 (kg)	1.7kg
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	50W
型番	mat-300W
操作動力	コンプレッサーエア
操作圧力	2.5-3.0bar
空気消費量	40L / 分
給水ボトル容量	170mL
本体重量 (kg)	1.7kg

ハンドピース仕様

最大回転数 rpm	320,000 rpm
最大トルク Ncm	1.6Ncm
ハンドピース重量	85.5g
ハンドピースサイズ	φ 17L124 mm
ハンドピース型番	mat-H300W

本体価格 88,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000218

saeyang

デモ器
貸出し可能です。

ブラシタイプ ポータブルマイクロモーター

商品番号：009950

コンビマイクロモーター

持ち運びに便利なマイクロモーター



持ち運びのできるブラシタイプマイクロモーターです。最大 4 時間稼働できる充電式バッテリーを搭載しています。ダイヤル一つでパワーオン&スピード調整ができます。フォワード / リバーススイッチ付きなので、左利きの方にもおすすめです。オン / オフフットスイッチ (SFP-27) 付きです。ポータブルなキャリーバッグ付きです。



本体仕様

サイズ (W×D×H mm)	73 × 170 × 34mm
重量 (g)	268g
電源 (V, Hz)	DC12V
消費電力 (W, A)	24W

ハンドピース仕様

最大回転数 rpm	25,000 rpm
最大トルク Ncm	1.3Ncm
コード長 m (メートル)	1.5m
ハンドピース重量	121g
ハンドピースサイズ	φ 20 × L120mm
ハンドピース型番	SDE-MH20

本体価格 78,000 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000045

saeyang

デモ器
貸出し可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル
貸出し可能です。

こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

YouTube
動画紹介動画があります。

名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を公開しています！



Facebook
名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！

名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！



デモ器
貸出し可能です。

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

レーザー
溶接機

ファーンズ
本体

ファーンズ
関連機器材

ラボベンチ

ラボベンチ
関連機器材

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サクシオン
ユニット本体

サバイヤー
本体

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

フォーマー
関連機器材

マウスガード

マウスガード
関連機器材

マウスガード
関連機器材

マウスガード
関連機器材

マウスガード
関連機器材

マウスガード
関連機器材

加圧型マウスガード成型器

商品番号：005910

デュナフォームプラス

120 mm、125 mm 2サイズの丸型シートに対応の加圧型フォーマー




Φ 120mm、Φ 125mm 2サイズの丸型シートに対応しております。模型に接する面を加熱することにより細部の再現性に優れています。加熱時間やプレス時間の設定ができ、ムラなくプレスすることができます。


従来のピースタイプではなく、専用のメッシュプレートで加圧を実行します。これにより、成形時にジスクへのピースの巻き込みによる失敗がありません。また、静音性に優れているため院内でも安心してお使いいただけます。
**コンプレッサーは付属しておりません。



従来のピースタイプではないため、ジスクの取り外しも容易になりました。

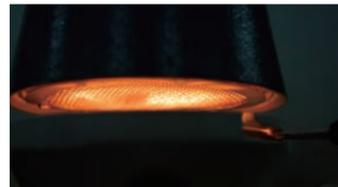


最新のヒーティングシステムにより、予熱時間 0 秒ですぐに製作を開始できます。

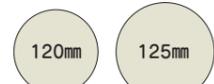

メッシュプレートは別売もしております。
単体価格：23,000 円
**他社製のフォーマーでのご使用については保証対象外となります。

2サイズの丸型シートに対応！

適合性の良いプレスが可能に！

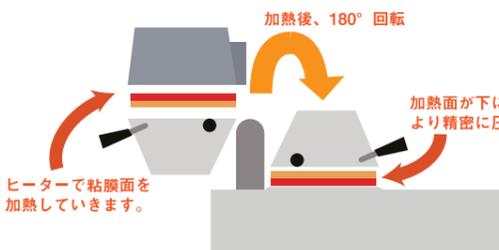

一般的な吸引式フォーマー



加圧式のデュナフォームなら、歯頸部までしっかりと精密な再現が可能です！

サイズ(W×D×H mm)	350 × 300 × 190 mm
重量 (kg)	8.5kg
電源 (V, Hz)	110V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	850W
使用圧力	最大 6 バール
ホース内圧力	最大 10 バール
対応ジスク形状	丸型
対応サイズ (丸型)	Φ 120mm、Φ 125mm
吸引式 or 加圧式	加圧式
プログラム設定	可能
付属品	メッシュプレート x1 ラバーシート (4サイズ)

本体価格 290,000 円
一般医療機器届出番号：2382X10023000362

超音波ジスクカッター

商品番号：006030

ソニックカッター ZO-41 II

超音波カッターの最新進化版



ハサミでは切ることの難しかった硬く厚いジスクも、超音波の力で楽にカットができます。

切断物に合わせてノーマルモードとハイパワーモードが選択いただけます。
**ハイパワーモードは 5 分程度で自動停止する安全設計です。

器体の温度が高くなると自動停止する温度センサーを搭載！
ハンドピースへのダメージの心配がありません。

硬質ジスクが楽に切れ、ハンドピースが軽く音も静かなもので場所をえらばずにご使用頂けます。



営業メンバーの声

サイズ(W×D×H mm)	89 × 76 × 173mm ハンドピース： Φ 32 × 144mm (刃含む)
重量 (kg)	本体：約 260g ハンドピース：約 70g
電源 (V, Hz)	100V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	最大約 40W
定格電圧	DC12V
環境条件	5 ~ 35℃
回路保護	ハンドピース内部に温度センサーを搭載

本体価格 68,000 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

吸引型マウスガード成型器

商品番号：005901

バキュームアダプター

コストパフォーマンスと便利性のバランスを追求した吸引型成型器



容易にマウスピース作成が可能です。バキューム内蔵型、100V コンセントのみで使用可能です。5.0mmの厚手シートの圧接も可能です。

本体はアルミ製の為、錆などの心配が無く長持ちします。

ヒーティングエレメントは左右対称に設計されており、均一に加熱することができます。



ユーザーの声

ホワイトニング用トレーなども院内で簡単に作成でき、とても経済的です！



サイズ(W×D×H mm)	230 × 210 × 366 mm
重量 (kg)	6.5kg
電源 (V, Hz)	110V 50/60Hz
消費電力 (W, A)	1.475W

対応ジスク形状	角型
最大対応サイズ (角型)	127 × 127 mm
吸引式 or 加圧式	吸引式
プログラム設定	無し

本体価格 83,000 円

一般医療機器届出番号：2382X10023000001

角型 127 × 127mmまで対応！
バキュームアダプター用アクセサリ「ジスク用トレー丸」の併用で丸型の圧接も可能です。

バキュームアダプター用アクセサリ

商品番号：005945

スプリントシステムキット

バキュームアダプターにてスプリントの成型、取り外しを強力にアシストする専用オプション



バキュームアダプターの吸引面に取付し、スプリント成形を補助します。

余分なアンダーカット部分をセラミックビーズに埋めることで、スプリントの模型からの取り外しが容易になります。


ビーズ全体から、全面を均等に吸引するので、精度の高い成形ができます。

セラミックビーズ上で角度変更が可能のため、基底面に凹凸がある模型でもスプリント成形が可能です。



消耗品

アルミナボール
販売価格：6,900 円

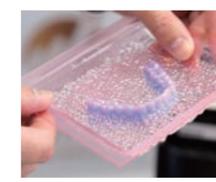

本体価格 16,000 円

マウスガード用アクセサリ

ジスク用トレー (角 / 丸)

バキュームアダプターでジスク成形を補助する優れたもの！



角型ジスクを4分割使用いただけます。小さな模型に角型ジスクを使用する際に最適です。

丸穴部分の直径が 110mmなので、120mm、125mmどちらの丸型ジスクにも適用いただけます。

商品番号：005944

ジスク用トレー 2 枚組 (角)

サイズ	127 × 127 mm 内径：55 mm
1個あたりの重量	1枚：100 g (2枚組)
厚み	1枚：約 1.0 mm

本体価格 6,000 円

商品番号：005943

ジスク用トレー 2 枚組 (丸)

サイズ	外形：127 × 127 mm 内径：Φ 110 mm
1個あたりの重量	1枚：50 g (2枚組)
厚み	1枚：約 1.0 mm

本体価格 6,000 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

シリコン分離剤

商品番号：005991

シリコンスプレー

くっつき知らずの万能スプレー



素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、くっつきを軽減します。(器械面、模型面両方にご使用いただけます。)

使用により形成後のジスク取り外しが容易になります。

<注意事項>

透明ジスク内側の曇り (白濁したようになる) を防止するものではありません。曇り軽減にはアルギン酸系分離剤をご使用ください。

サイズ(W×H mm)	Φ 50 × 175mm
成分	シリコーンオイル
高圧ガス	LPG
容量	150ml
危険等級	III
第三石油類	7類

本体価格 1,500 円



名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！



こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。



こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を公開しています！



プレミアムスポーツマウスガード

ドウ・スポーツ ファンガード
マーブル色で個性的に！2層構造の高耐久性マウスガード



「ダイダイ（絞り染め）」をテーマとしたドウ・スポーツのデザインシリーズ。

マウスピースで「スピード感」「躍動感」を表現したいアスリートの皆様に最適！

2層高級ラミネート加工で高耐久性を実現しました。

サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm
材質	EVA
構造	2層構造
軟質 or 硬質	軟質シート
入数・梱包方法	1枚入
厚み	3.5 mm
アクリルレジン接着	不可

本体価格 各 1,500 円

別売りの「バキュームアダプター」を使ってマウスガードの形成ができます。(2層構造のためマウスガード作成時の裏表取付方向にご注意下さい。)
・製品の色・柄は製造方法の都合上、写真と異なる場合がございます。
・軟質シートの為、即時重合レジンは接着いただけません。

プレミアムスポーツマウスガード

ドウ・スポーツ グリッターガード
心をくすぐるキラキラのラメ入り！2層構造の高耐久性マウスガード



「光のきらめき」をテーマとしたドウ・スポーツのラメ入りデザインシリーズ！マウスピースもキラキラと可愛くしたい方におすすです！
2層高級ラミネート加工で高耐久性を実現！

別売りの「バキュームアダプター」を使ってマウスガードの形成ができます。(2層構造のためマウスガード作成時の裏表取付方向にご注意下さい。)
・製品の色・柄は製造方法の都合上、写真と異なる場合がございます。
・軟質シートの為、即時重合レジンは接着いただけません。

サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm
材質	EVA
構造	2層構造
軟質 or 硬質	軟質シート
入数・梱包方法	1枚入
厚み	3.5 mm
アクリルレジン接着	不可

本体価格 各 1,500 円

特に女性からの人気が高く「こんなに可愛いマウスピースなら私もほしい。」との感想をよくいただきます。



営業メンバーの声

マウスガード用アクセサリ

セントリフューズ

オリジナルマウスガードを簡単に作ることができる！



水転写シートやテプラなどで作成したオリジナルデザインを簡単にマウスガードにラミネート加工できます。作成に必要な材料、器具が一式揃っているので安心です。

ラミネート部の厚さを最小限に出来ます。0.28mmと極薄のラミネートシートを名入れ部分にピンポイント使用するため、マウスガード全体の厚みを変えずに作成でき違和感の少ないマウスガード作成が出来ます。

違和感の少ないオリジナルのマウスガードが作成可能です。

■セット内容

プライマー、ブラシ、はさみ、セントリフューズシート(20枚)、ホットエアハンディートーチ、トリミング&研磨ブラシ、インクジェット水転写シート(2枚)、サンプルプリント

シートのサイズ	縦長：10.2 mm 横大端：38 mm 厚み：0.28 mm
販売単位	10枚入

本体価格 33,000 円

主要消耗品

商品番号：026079
キーストン セントリフューズシート(20枚)
販売価格：8,000 円

商品番号：026080
キーストン プライマー 10ml
販売価格：3,000 円



弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

スポーツ用カラーマウスガード

スポーツマウスガード

色も厚みも色々選べるスポーツ用の一層構造マウスガード！

丸型6色、角形16色の豊富な色味よりお選びいただけます。丸型、角形がありお使いのフォーマーに合わせてお選びいただけます。

用途に合わせ3.0mm～5.0mmの厚みよりお選びいただけます。(※色味により取り扱いの厚みが異なります。)
少量からご使用いただける2枚入もご用意しています。

	クリア	ブラック	ホワイト	レッド	ブルー	イエロー	オレンジ	グリーン	パープル
3.0mm	-	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500
3.8mm	-	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540
4.0mm	¥1,700/¥720	¥1,900/¥810	¥1,900/¥810	-	-	-	-	-	-
5.0mm	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	-	-	-

価格が水色のものについては丸型シートのご用意あります。


	ネオンピンク	ネオンブルー	ネオンイエロー	ネオンオレンジ	ゴールド	シルバー
3.0mm	-	¥1,400/¥600	¥1,400/¥600	¥1,400/¥600	-	¥1,400/¥600
4.0mm	¥2,000/¥860	¥2,000/¥860	¥2,000/¥860	¥2,000/¥860	¥2,000/¥860	-

スポーツ用カラーマウスガード

ドウ・スポーツ

スポーツをカラフルにアシストします。2層構造の高耐久性マウスガード！

角型タイプ ■寸法：127×127mm

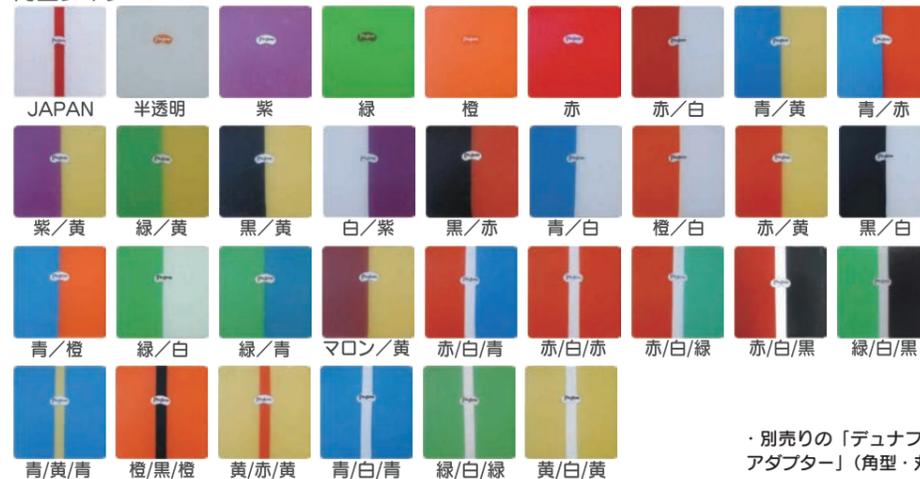

2層高級ラミネート加工で高耐久性に優れています。外面は咬合摩擦に強い硬めの軟質素材、内面は粘膜面にやさしい柔らかい軟質素材になっております。

国旗をイメージした、1色、2色、3色組み合わせがり、計33色の豊富な配色からお選びいただけます。

丸型、角形の2種類がありお持ちのフォーマーに合わせてご使用いただけます。

別売りの「デュナフォームプラス」(丸型のみ対応)「バキュームアダプター」(角型・丸型対応)を使ってマウスガードの形成ができます。
・軟質シートの為、即時重合レジンは接着いただけません。
・製品の色は現物と異なる場合があります。

丸型タイプ ■寸法：直径120mm



サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm 丸形：Φ120 mm
材質	EVA
構造	2層構造
軟質 or 硬質	軟質シート
入数・梱包方法	1枚入
厚み	3.5 mm
アクリルレジン接着	不可

本体価格 各 1,300 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！



こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。



こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を公開しています！



マウスガード

2層式ハイブリッドジスク

商品番号：下記参照

コンビロックプラス


こんなジスクを待っていた！透明度抜群のハイブリッドジスク！



咬合に強い硬質シートと粘膜にやさしい軟質シートが一体化したハイブリッドジスクです。

個包装、アルミ真空パックのため湿気を気にせず保存いただけます。

角形と丸型があるため、お手持ちのフォーマーに合わせてお選びいただけます。

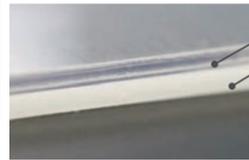

硬質層：PET-G(熱可塑性ポリエステル) 耐衝撃性に優れている、アクリルの4~5倍、透明性に優れているが紫外線で劣化、変色あり。
軟質層：TPU(熱可塑性ウレタン) 高伸縮性、柔軟性、耐傷つきに優れている。
接着材：アクリレート(アクリル)

サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm 丸形：φ120 mm
材質	PET-G、TPU
構造	2層構造
軟質 or 硬質	硬質 / 軟質の2層シート
販売単位	1枚入
色	透明

厚み	商品コード(角型/丸型)	1入り
2.0mm	005918 / 005919	各 880円
3.0mm	005922 / 005923	各 1,080円

一般医療機器届出番号：2382X10023000375

個包装真空パック！



軟質シートでは咬合がすぐに穴が開いてしまし、硬質シートでは脱着が難しく使用しにくかったが、このシートは両方の悩みを解決してくれました！


ユーザーの声

マウスガード

商品番号：下記参照

マウスガード

利用シーンを選ばない、クリアタイプの軟質シート

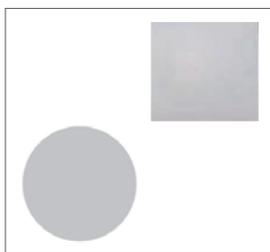

マウスガードやナイトガードなど汎用的にご使用いただける、軟質の透明(クリアタイプ)シートです。

丸型、角形があるため、お使いのフォーマーに合わせてお選びいただけます。

用途に合わせ1.0mm~3.8mmの5種類の厚みよりお選びいただけます。

少量からご使用いただける2枚入もご用意しました。

厚み	商品コード(10入/2入)	角型	10入り	2入り
1.0mm	015913 / 025913		2,100円	450円
1.5mm	015914 / 025914		2,200円	490円
2.0mm	015911 / 025911		2,400円	510円
3.0mm	015912 / 025912		2,600円	550円
3.8mm	015971 / 025971		3,200円	650円

厚み	商品コード(10入/2入)	丸型	10入り	2入り
1.0mm	015915 / 025915		2,100円	450円
1.5mm	015916 / 025916		2,200円	490円
2.0mm	015917 / 025917		2,400円	510円
3.0mm	015918 / 025918		2,600円	550円
3.8mm	015919 / 025919		3,200円	650円

**厚み4.0、5.0mmクリアについては、P.55のスポーツマウスガードの項目をご覧ください。

サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm 丸形：120×120 mm
材質	EVA
構造	1層構造
軟質 or 硬質	軟質シート
色	透明



スプリント用ジスク

商品番号：下記参照

ブラキシズムスプリント

スタンダードな透明硬質シート



歯ぎしり防止用ナイトガードや、顎関節症の除痛用に使える硬質シートです。

保護シート付(ピンク)で形成後に剥がすことで、クリアに美しく仕上がります。

サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm
材質	樹脂
構造	1層構造
軟質 or 硬質	硬質シート
色	透明

厚み	商品コード	10入り
0.5mm	016101	1,090円
0.8mm	016102	1,380円
1.0mm	016103	1,660円
1.5mm	016104	2,060円
2.0mm	016105	2,560円
2.5mm	016106	3,000円
3.0mm	016107	3,350円

一般医療機器届出番号：13B3X00503VSP001

個人トレー用ジスク

商品番号：下記参照

個人トレー

個人トレーをより簡単に



個人トレーをフォーマーで作成いただけます。

(取っ手部分は別途必要となります。別売り：アルミニウムトレーハンドルが即時重合レジンで簡単に接着いただけます。

サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm
材質	樹脂
構造	1層構造
軟質 or 硬質	硬質シート
色	ライトブルー

厚み	商品コード(10入/2入)	10入り	2入り
3.2mm	015941/025941	2,200円	460円
3.8mm	015942/025942	2,200円	460円

一般医療機器届出番号：2382X10023000031

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

コーピング用ジスク

商品番号：下記参照



コーピング

keystone

コーピングをフォーマーで作成可能にする特別ジスク



ワックスアップ時に使用するコーピングを、フォーマーで作成いただけます。

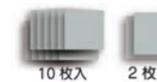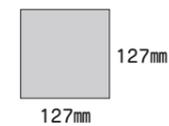

厚み	商品コード(10入/2入)	10入り	2入り
0.5mm	015951 / 025951	1,000円	220円
1.0mm	018006 / 028006	1,000円	220円

サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm
材質	樹脂
構造	1層構造
軟質 or 硬質	硬質シート
色	乳白色

一般医療機器届出番号：2382X10023000019

マウスガード用アクセサリ

商品番号：005948

アルミニウムトレーハンドル

keystone

簡単セットで楽々



個人トレーを作成した際に、即時重合レジンで簡単に接着いただける既製の取っ手です。

アルミニウム製のため軽くてサビにくいです。

10個入/箱



サイズ(W×H mm)	25×33 mm
本体価格	300円

ホットエアートーチ

商品番号：009013

ホットエアートーチ

Meinan

焦がし知らずの秘密はこのエアートーチです



炎の出ないトーチのため、軽がかさずだけで、対象物を焦がしたり変色させることなく適度な炎射効果があります。

マウスガードをシリコン系ポイントで辺縁部形態修正後、軽がかさしていただくと艶が出ます。(変形防止のため必ず模型の上でご使用下さい。)

未使用時に安心なロック付きです。

ガスボンベ1本付き



付属品	ライターカートリッジ、ガスボンベ
販売単位	1セット
本体価格	4,300円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

基礎床用ジスク

商品番号：下記参照


ベースプレート

keystone

基礎床をフォーマーで楽々作成



ベースプレートをフォーマーで作成いただけます。

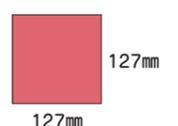

厚み	商品コード(10入/2入)	10入り	2入り
1.5mm	015931 / 025931	1,800円	380円
2.0mm	015933 / 025933	1,800円	380円
2.5mm	015932 / 025932	2,000円	440円

サイズ(W×H mm)	角形：127×127 mm
材質	樹脂
構造	1層構造
軟質 or 硬質	硬質シート
色	ピンク

一般医療機器届出番号：2382X10023000032

マウスガード用アクセサリ

商品番号：006008

V.A用ブロックアウト粘土

Meinan

ブロックアウトはお任せください



大きなアンダーカットのブロックアウトでも、再利用可能なためコストを気にせずご使用いただけます。

様々な形にフィット可能な自由に形作れる粘土です。

500g/個

名南の隠れたロングセラー商品です！



営業メンバーの声

本体価格	1,200円
------	--------

マウスガード用アクセサリ

商品番号：006004

スーパーシート

Meinan

簡単に素早く艶出しができる！



ジスク表面が素早く滑沢に仕上がります、マウスガード装着時の快適な使用感をお約束します。

ジスク表面をトーチ等で軟化させ、押し付けるだけで簡単に艶出しができます。

他の溶剤などは必要ありません。繰り返しご使用いただけます。

サイズ(W×D mm)	90×90 mm
厚み	約1 mm
販売単位	1枚入
本体価格	1,600円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名南公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名南公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！

マウスガード・関連機器材

レーザー溶接機

ファーンズ本体

ファーンズ関連機器材

ラボベンチ

ラボベンチ関連機器材

ラボ用スコープ

トリマーグラインダー本体

サクシジョンユニット本体

サバイヤー本体

マイクロモーター

バキュームフォーマー

フォーマー関連機器材

マウスガード

マウスガード関連機器材

技工材料

- レーザー溶接機
- ファーンズ本体
- ファーンズ関連機器材
- ラボベンチ
- ラボベンチ関連機器材
- ラボ用スコープ
- トリマーグラインダー本体
- サクシジョンユニット本体
- サバイヤー本体
- マイクロモーター
- バキュームフォーマー
- フォーマー関連機器材
- マウスガード
- マウスガード関連機器材



名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！





名南公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！





名南公式 Twitter では
新着ニュースを発信しています！





サンプル
ご提供が可能です。

こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



デモ器
お貸し出しが可能です。

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。



YouTube
商品紹介動画があります。

こちらのアイコンがある商品は YouTube で商品を取り扱った動画をご視聴いただけます。



<p>シエーラ キャスト・・・・・・・・・・60</p> <p>シエーラ ベスト RP・・・・・・・・・・60</p> <p>シエーラ マジックグリーン・・・・・・・・60</p> <p>シエーラ チタンイージー・・・・・・・・61</p> <p>シエーラ フィーナ 2000・・・・・・・・61</p> <p>シエーラ リラクサ・・・・・・・・・・62</p> <p>シエーラ マップルフリング・・・・・・・・62</p> <p>シエーラ バイオキャストイングライナー・・62</p> <p>シエーラ リキッド・・・・・・・・・・63</p> <p>シエーラ リキッドエクストラ・・・・・・・・63</p> <p>シエーラ ポル 705・・・・・・・・・・63</p> <p>シエーラ ダイヤルクス・・・・・・・・・・63</p> <p>シエーラ ピュア・・・・・・・・・・64</p> <p>シエーラ プレミアム・・・・・・・・・・64</p> <p>シエーラ ソツケルフルッシー・・・・・・・・64</p>	<p>ステンシルエコ 85・・・・・・・・・・65</p> <p>ベネシル・・・・・・・・・・65</p> <p>沈澱くん・・・・・・・・・・65</p> <p>パイブレーター・・・・・・・・・・65</p> <p>アドシルラピッド・・・・・・・・・・66</p> <p>オートシリコンディスペンサー evo・・・・66</p> <p>レプリシル・・・・・・・・・・67</p> <p>フラスコセット サイズ各種・・・・・・・・67</p> <p>スタビライザー サイズ各種・・・・・・・・67</p> <p>デンタルワックス・・・・・・・・・・68</p> <p>名南 UV パターンシリンジ・・・・・・・・68</p> <p>ビッグコーン シリコンポリッシャー・・・・69</p> <p>名南豚毛レーズブラシ・・・・・・・・・・69</p> <p>ウルトラシンジスク・・・・・・・・・・69</p> <p>フェルトホイール ソフト・・・・・・・・・・69</p> <p>カットオフディスク・・・・・・・・・・69</p> <p>ヒートレスホイール レギュラー・・・・・・・・69</p> <p>レッドフラッシュディスク・・・・・・・・・・69</p> <p>ミジー ヒートレスホイール・・・・・・・・69</p> <p>ミジー ヒートレスホイール ホワイト（微粒子タイプ）・・69</p> <p>技工用カーバイドカッター・・・・・・・・70</p> <p>ボルケーノ・・・・・・・・・・72</p> <p>ミリング用バー・・・・・・・・・・73</p> <p>センタートリマードリル／ハンドピースドリル／ ダウエルピンドリル・・・・・・・・・・73</p> <p>名南 ダウエルピン・・・・・・・・・・74</p> <p>カットイットノコ刃・・・・・・・・・・74</p> <p>ワークボックス・・・・・・・・・・74</p> <p>ダイロクトレー・・・・・・・・・・74</p> <p>名南モデルフォーマー・・・・・・・・・・74</p> <p>技工物ミニボックス（黒）・・・・・・・・75</p> <p>スケルトン技工物ミニボックス・・・・・・・・75</p> <p>ナショナルブローパイプ・・・・・・・・75</p> <p>ミニトーチ・・・・・・・・・・75</p> <p>インジェクター用アルミ容器ドーム型・・・・75</p> <p>メジャリングデバイス・・・・・・・・75</p>
--	---

- 埋没材・関連機器材
- 石膏・関連機器材
- シリコン・関連機器材
- ワックス・重合レジン
- 研磨材・ブラシ
- 埋没材・関連機器材
- カーバイドカッター
- ミリング用バー
- ダウエルピン・関連機器材
- その他技工関連機器材



名南公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！





デモ器
お貸し出しが可能です。

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



サンプル
ご提供が可能です。

こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！



金属床用リン酸塩系埋没材 商品番号：010819

シェーラ キャスト

安定した品質を維持しながら高い操作性と滑沢な表面を提供します。



高い流動性と十分な操作時間を提供し埋没から鋳造まで約90分の時間短縮を実現しました。

急速加熱法から従来の室温から上昇させるオーバーナイト法の両方に対応しています。

非常に粒度も細かく正確な耐火模型の作製が出来ます。

酸化膜の除去や掘り出しも非常に簡単に行えます。



安定した高い適合性能を得られるので、ドイツ国内外で大人気の埋没材です！



営業メンバーの声

用途	金属床用
混液比 (埋没)	粉 100g : 液 21mL
作業時間	4~6分
作業温度	20~23℃
鋳造時間	45分以上係留
硬化膨張率	メーカー非公開
カラー	ホワイト
梱包方法、販売単位	20kg (2.5kg/8入)
急速加熱	対応 (850℃ / 45分以上)

本体価格 12,800円

一般医療機器届出番号：2382X10023000260

3Dプリンター樹脂専用リン酸塩系埋没材 商品番号：010820


シェーラ ベスト RP

3Dプリンター用の樹脂で急速加熱が可能な高精度埋没材



3Dプリンター樹脂でもクラックやバリ・面荒れが発生しないように粒度や強度を最適化されている、急速加熱対応のリン酸塩系埋没材です。

様々な種類の合金に使用が出来ます。 ** チタンは除きます。発生する酸化物を抑え、精度の高い鋳造結果が得られます。20~25分でファーンズに入れられるため、時間短縮に繋がります。

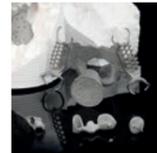

急速加熱及びオーバーナイト対応



3Dプリントしたものを鋳造するときには専用の埋没材が必須です。



営業メンバーの声

用途	3Dプリンター樹脂専用
混液比 (埋没)	粉 100g : 液 20mL
作業時間	4~6分
作業温度	20~23℃
鋳造時間	45分以上係留
硬化膨張率	メーカー非公開
カラー	ホワイト
梱包方法、販売単位	10kg (2.5kg/4入)
急速加熱	対応 (850℃ / 45分以上)

本体価格 9,800円

一般医療機器届出番号：2382X10023000261

コバルトクラウン・ボンド専用埋没材 商品番号：010801

シェーラ マジックグリーン

コバルトクラウン・コバルトボンドに特化した専用埋没材



混練段階では緑色で、ファーンズに入れる理想的な瞬間を視覚的に示し、硬化すると色が白に変わります。

シンプルな視覚効果により、ファーンズに入れるタイミングを逃す心配がありません。掘り出しが非常に簡単で、硬化も高速なので作業時間の短縮に繋がります。

急速加熱・オーバーナイト対応



バラツキが非常に少なくコンスタントに膨張が出せるため安心して使用することが出来ます。



営業メンバーの声

用途	コバルトクラウン・コバルトボンドに特化した専用埋没材
混液比	粉 180g : 液 34mL 粉 100g : 液 19mL
作業時間	5~6分
作業温度	20~23℃
鋳造時間	45分以上係留
硬化膨張率	リキッド 100%: 約 1.1%
カラー (加熱後)	グリーン
梱包方法、販売単位	4.5kg (180g/25入)
急速加熱	対応 (850℃ / 45分以上)

本体価格 9,800円

一般医療機器届出番号：2382X10023000212

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

チタン鋳造専用リン酸塩系埋没材 商品番号：010868

シェーラ チタンイージー

難しいチタン鋳造の頼もしい味方！



急速加熱及び従来のオーバーナイトにも対応している、チタン鋳造に最適な埋没材です。粒子が細かいので、鋳造体の表面が非常になめらかに仕上がります。

専用液 (シェーラリキッド・リキッドエクストラ) を併用してご使用頂く商品です。併用することにより、さらに正確な膨張が得られて後処理の作業時間をしっかりと短縮します。

最適な鋳造結果を得るために、リングライナー、マッフルリングとの併用を強くお勧め致します。

難しいチタン鋳造が簡単に安定して行える、シェーラ自慢の一品です。



営業メンバーの声



㈱メディナ様にて、チタン鋳造検証のご協力を頂きました。

用途	チタン鋳造用
混液比	粉 100g : 液 15mL 粉 300g : 液 45mL 粉 600g : 液 90mL
作業時間	6~7分
作業温度	20~23℃
鋳造時間	60分以上係留
硬化膨張率	メーカー非公開
カラー	ホワイト
梱包方法、販売単位	1.6kg
急速加熱	対応 (850℃ / 45分以上)

本体価格 13,800円

一般医療機器届出番号：2382X10023000389

クラウン・ブリッジ・プレスセラミック用リン酸塩系埋没材 商品番号：010808

シェーラ フィーナ 2000

鋳造からプレスセラミックまで対応した、プレミアムなC&B用リン酸塩系埋没材



プレシャスからノンプレシャス、またプレスセラミックまでお使い頂けるプレミアム品質の埋没材です。

非常に滑らかな表面と正確なフィット感を得る事ができます。鋳造する合金により、簡単に膨張率をコントロールすることができます。

急速加熱・オーバーナイト対応



用途	クラウン・ブリッジ・プレスセラミック
混液比	鋳造物と合金に応じて異なります。
作業時間	6~7分
作業温度	20~23℃
鋳造時間	45分以上係留
硬化膨張率	メーカー非公開
カラー	ホワイト
梱包方法、販売単位	6kg (100g/60入)
急速加熱	対応 (850℃ / 45分以上)

本体価格 15,800円

一般医療機器届出番号：2382X10023000224

埋没材のヒント

SHERA マッフルリングとリングライナーを使用をすると！

SHERA社の研究によれば、高い適合を得るには、SHERA製マッフルリングのように、通気性の高い多孔質(スポンジ状)のラバー製マッフルリングを使用することがベストです。埋没材の熱膨張は全方位に向かうので、金属やプラスチック製の硬いリングでは膨張が妨げられてしまいますが、柔らかいラバー製なら全方位に高い膨張を促します。また、リングライナーを一層ほど巻いてください。理由はリン酸塩系埋没材は硬化時にガスと水蒸気が発生します。これらがこもると、鋳造の原因となります。多孔質のマッフルリングとリングライナーの併用で、このガスをしっかりと放出することが可能になります。

粉と液を室温(21℃)にして使用をすると！

高い膨張と、最良の適合を得るために、埋没材と液を混ぜた際、室温(21℃)に近くなるように心がけてください。可能であれば、適切な温度管理のために保管庫の使用を推奨しております。これにより正しい化学反応が起こり、安定した高膨張と適合が得られます。

SHERA リラクサ(表面活性剤)の使用をすると！

表面活性剤で表面張力を下げておくことで、埋没材の流動性が更に良くなり、気泡のない綺麗な鋳造面結果が得られます。少しの手間で最高の鋳造を安定して行うことが出来ます。



弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！

表面活性剤 商品番号：下記参照

シェーラ リラクサ

親水性に優れた、印象およびワックスの表面活性剤



アルギン酸塩、ポリエーテル、シリコンの印象及びワックスパターンに使用できます。
石膏と埋没材の流動性を改善し、気泡の少ない模型を作製することが出来ます。

親油作用によりワックスの表面張力を解放し、細部にわたり埋没材を行き渡らせることが出来ます。

親水、疎水作用により非常に優れた表面活性効果を発揮します。特に少量で効果が発揮され経済的です。
面荒れの原因となるアルコールを含みませんので、滑らかな鑄造面が得られます。
** ホルムアルデヒドおよび溶剤を含みません。



匂い	無臭
カラー	透明**
梱包方法、販売単位	50mL (スプレー) 500mL (詰替え用)

**紫外線と酸化による影響で茶色に変色する場合がありますが、使用上は問題ありません。

スプレー後に洗い流したりエアで飛ばす必要がなく、そのまま石膏や埋没材を流しても問題ありません。



営業メンバーの声

商品番号	商品名	本体価格
010804	シェーラリラクサ 50ml	1,200円
010809	シェーラリラクサ 500ml ボトル 詰替え用	6,000円

リングフォーマー 商品番号：下記参照

シェーラ マップルリング

通気性が高く、全方位に膨張を促す特殊シリコン製のリング



柔らかい素材で、埋没材硬化時の膨張を全方位に妨げずに膨張を促すので、鑄造物のたわみを防止します。

通気性の高い特殊シリコンによってガスを効果的に外へ逃がすので、埋没材のクラッキングをしっかりと防ぎます。



内面にギザギザ加工がされており、リングの表面積を大幅に増やすことで、硬化時のガスの放出をより促します。
** シェーラバイオキャストイングライナーとの併用で、ガスの放出性が更に高まるためお勧めです。

サイズ	9x 9/16" L φ 75 mm 6x 9/16" M φ 58 mm 3x 9/16" S φ 47 mm MG (デンチャー用)
販売単位	各1セット入

商品番号	商品名	本体価格
010805	シェーラ マップルリング 3x サイズ S φ 47	6,000円
010806	シェーラ マップルリング 6x サイズ M φ 58	6,500円
010807	シェーラ マップルリング 9x サイズ L φ 75	7,000円
010840	シェーラ マップルリング MG (デンチャー用)	7,000円

保管時はきれいに洗ってしっかり乾燥させることで長持ちすることができます。



営業メンバーの声

リングライナー 商品番号：010846

シェーラ バイオキャストイングライナー

通気性が高く厚みもあるバイオリングライナー



埋没材の膨張をより促す極厚でソフトなライナーです。

体内で溶解する生体溶解性繊維を用いた、相容性の高い AES ウール** を使用しています。

** 人造非晶質繊維に関する発がん性分類、各種規制から除外された、人と環境に優しい製品です。

埋没材に含まれるアンモニアを効率よく外部へ放出することにより、鑄造欠陥を減らすことが出来ます。

** シェーラマップルリングとの併用がお勧めです。



鑄造エラーを最小限にしたい方には、リングライナーの使用はもはや必須です！



営業メンバーの声



サイズ (W x H mm)	50 x 1 mm
長さ	25メートル
耐熱性	1,260℃

本体価格 4,500円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

埋没材専用液 商品番号：下記参照

シェーラ リキッド

管理のしやすい全シェーラ製の埋没材に共用の専用リキッド



混水比を変えることにより膨張率のコントロールが簡単です。

膨張率によるバラツキが少なく、コンスタントな鑄造結果を得られます。

希釈タイプなので経済的です。
液の混合比率については、埋没材に付属している取扱説明書をご参照ください。

対応メーカー	シェーラ社埋没材専用
保管温度	5度~35度の保管庫内で保管
梱包方法、販売単位	1L / 5L

商品番号	商品名	本体価格
010802	シェーラリキッド 1L ボトル	3,700円
010821	シェーラリキッド 5L ボトル	13,200円

埋没材専用液 商品番号：010867

シェーラ リキッドエクストラ

シェーラリキッドと合わせて使う、より高い膨張が得られる高濃度リキッド



混水比を変えることにより膨張率を更にコントロールできます。

膨張率によるバラツキが少なく、コンスタントな鑄造結果を得られます。

希釈タイプなので経済的です。
液の混合比率については、埋没材に付属している取扱説明書をご参照ください。

** チタンイージー (P.61) には必須のリキッドです。

対応メーカー	シェーラ社埋没材専用
保管温度	5度~35度の保管庫内
梱包方法、販売単位	1L

本体価格 4,800円

汎用研磨材 商品番号：010857

シェーラ ポル 705

研磨力に定評ある研磨材



すべてのメタル、アクリルレジン、セラミックに使える万能タイプの研磨材です。

コバルトの研磨もワンステップで研磨可能です。

やみつきになる研磨力なので、サンプルでぜひ一度お試しください！



営業メンバーの声

容量 約 300g

本体価格 3,400円

一般医療機器届出番号：2382X10023000337

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

ジルコニア用研磨ペースト 商品番号：010858

シェーラ ダイアルクス

素早く光沢の出る、ジルコニア用つや出し研磨材



ジルコニアに、ダイヤモンドのような自然な輝きを与える、ダイヤモンド入りのプレミアムな研磨材です。

ジルコニアの他に、ノンプレシャス、セラミックの研磨にもお使いいただけます。

削れ過ぎずに自然な光沢が出るので、ジルコニアの研磨におすすめです！



営業メンバーの声

容量 20g

本体価格 10,800円

一般医療機器届出番号：2382X10023000336

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！



デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を動画で公開しています！

セラミスト向け超硬石膏 商品番号：010251

シェーラ ピュア

シェードの確認に最適。トーンにこだわったアンドレアス・ノルティ氏監修のセラミスト用超硬石膏



シェードの確認が非常にしやすい、トーンを落としたライトグレーを採用。硬化膨張が0.08%と小さく、精度の高い作業模型が製作できます。粒子が細かく、模型面も絹状の潤沢な表現を提供します。また、高い精度を長期間にわたり維持する堅牢さもシェーラピュアの特徴です。作業中の吸水による、模型の劣化・破折が少なく、チッピングしにくい「強度」を提供します。



用途	作業模型用
混液比	粉 100g : 水 20mL
作業時間	6~7分
作業温度	20~23℃
硬化時間	約30分
硬化膨張率	0.08%
圧縮強度	2時間後 310mPa 24時間後 330mPa
ブリネル硬度	270mPa 290mPa
カラー	ライトグレー
梱包方法、販売単位	3kg

本体価格 4,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000240

ポーセレンワークにおける色調調整に、石膏模型が最大限貢献できる「模型色」。この点に最もこだわりました。

模型の撮影時にポーセレンワークを美しく自然に引き立てるカラーとして、「ライトグレー」をご用意しました。

超硬石膏 商品番号：下記参照

シェーラ プレミアム

低膨張なのに盛りやすい！マルチに使える超硬石膏



安定した非常に細かい粒度の石膏です。盛り上げ作業が簡単に行えるほか、優れたチキソトロピー性により、弱いバイブレーションでも簡単に印象へ流し込むことが出来ます。マージン部などの薄い部分でもチッピングがしにくく、簡単に分割作業を行えます。



用途	作業模型用
混液比	粉 100g : 水 20mL
作業時間	4.5~5.5分
作業温度	20~23℃
硬化時間	30~40分
硬化膨張率	0.10%
圧縮強度	1時間後 60mPa 2時間後 270mPa 24時間後 290mPa
ブリネル硬度	270mPa 290mPa
カラー	ゴールドブラウン
梱包方法、販売単位	5kg / 20kg

商品番号	商品名	本体価格
010259	シェーラプレミアム 5kg	5,800円
010258	シェーラプレミアム 20kg	13,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000226

練った感じも硬すぎず、印象材に石膏も盛り上げる作業も簡単です。石膏の流れも非常に滑らかで、気泡の心配も少なく粒子が細かいので再現性が非常に高いです。



営業メンバーの声

台付け専用石膏 商品番号：下記参照

シェーラ ゾッケルフルッシー

寸法精度に優れた流動性の高い台付け専用石膏



流動性が高いためモデルフォーマーに流しやすく、1回の作業で多数のモデルフォーマーに流し込むことができます。寸法精度の高い安定した作業模型が製作できます。

<カラー>
・ターコイズブルー
・テラレッド

用途	台付け専用
混液比	粉 100g : 水 23mL
作業時間	4.5~5.5分
作業温度	20~23℃
硬化時間	35~45分
硬化膨張率	0.10%
圧縮強度	2時間後 230mPa 24時間後 250mPa
ブリネル硬度	270mPa 290mPa
カラー	ターコイズ、テラレッド
梱包方法、販売単位	20kg

商品番号	商品名	本体価格
010254	シェーラゾッケルフルッシー 20kg ターコイズ	各 12,800円
010866	シェーラゾッケルフルッシー 20kg テラレッド	

一般医療機器届出番号：23B2X10023000233

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

技工用パテシリコン(付加型) 商品番号：下記参照

ステンシルエコ 85

高い操作性と高精度を兼ね備えたドイツ製の付加型パテシリコン



Dent-e-con社は2020年に、社名変更を行いました。



べたつかない

アクチベーターを使用しない付加型なので、手がべたつきません。

高い操作性

縮合型と違い、付加型シリコンは1:1の分量でシリコンを使用します。色で判断できて、混ぜり具合を目視で確認できるため練りムラが発生しにくいです。

高精度

付加型シリコンは縮合型シリコンに比べてシリコンの純度が高く収縮が少ないため、寸法精度にすぐれた変形の無いコア作製が可能になります。



混ぜり具合がひと目で分かるので、練りムラの心配がありません！



営業メンバーの声

グローブ無しでお使いいただけます！

カラー	グリーン
練和時間	30秒
作業可能時間(23℃)	4分
シヨア硬度	85
圧縮強度	0.7%
細部再現性	50μ
耐熱温度	120℃
保管温度	4℃~30℃

商品番号	商品名	本体価格
007565	ステンシルエコ 85 3kg(1.5kg+1.5kg)	7,400円
007566	ステンシルエコ 85 10kg(5.0kg+5.0kg)	22,400円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000356

技工用パテシリコン(縮合型) 商品番号：下記参照

ベネシル

高い操作性と精度を提供する、スペアミントの香りがする縮合型シリコン



※硬化サンプルのみ



操作が簡単！

ベネシルは、非常に練りやすく、練和後の作業時間が「4分」と少し長めです。このため、時間に余裕を持って模型にセットできます。

**付属のスプーン1杯のシリコンに、約5cmのベネシルキャタリストが目安です。細部の再現性がよい！

ベネシルは、表面が非常になめらかで、ざらつきがほとんどありません。50ミクロンの高い精度により、歯頸部や咬合面まで高い表現性を提供します。



ベネシルキャタリスト使用量の目安



一般医療機器届出番号：23B2X10023000272



カラー	グリーン
練和時間	30秒
作業可能時間(23℃)	4分
シヨア硬度(24時間後)	75
細部再現性	50ミクロン
寸法変化	-0.1%
圧縮強度	0.7%
耐熱温度	120℃
保管温度	4℃~30℃

商品番号	商品名	本体価格
007580	ベネシル 1.6kg	2,200円
007581	ベネシル 5.0kg	6,600円
007583	ベネシル キャタリスト 60ml	1,100円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000272

石膏沈澱促進剤 商品番号：下記参照

沈澱くん

排水管のパイプ詰まりを解消するタブレット！



嫌な臭いをしっかり抑えます。石膏が沈澱して排水管を傷めません。環境に優しい素材を使用しているの、安心して排水できます。

成分	中性物質
販売単位	10個入



商品番号	商品名	本体価格
007546	沈澱くん GipEx 石膏沈澱促進剤 10入	4,800円
007547	お試し版 沈澱くん GipEx 石膏沈澱促進剤 1入	500円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

技工用バイブレーター 商品番号：007211

バイブレーター

コンパクトで使いやすい無段階調整タイプ



強力でも細やかな振動を得られる、ゴム振動方式です。

ベース台の大きさはφ107mmのゆったりサイズ。様々な用途でお使いいただけます。

コンパクトサイズなので、院内でも置き場に困りません！



営業メンバーの声

サイズ(W×D×H mm)	140×150×110mm
重さ	2.5kg
電源	100V 50/60hz

本体価格 14,000円



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！

歯科複模型用シリコン (付加型)

商品番号：下記参照

アドシルラピッド

ショア硬度24、硬化時間10分で作業効率アップ!



硬化時間が早い!
硬化時間はわずか10分。
硬化時間が早いので、作業効率がアップします。

サラサラとした操作感!
操作性に優れ、素早く均等に混ざり、凝固後もべとつきません。
また、脱泡性も高く、模型からも外しやすいです。



硬化時間が早いので、作業効率が上がります!

ユーザーの声



寸法精度と操作性に優れた、付加型シリコン複模型材です。大容量タイプも人気です!

商品番号	商品名	本体価格
007513	アドシルラピッド 2kg(1x1kg)	10,800円
007514	アドシルラピッド 12kg(6x6kg)	54,000円

用途	複模型用シリコン
作業時間	3~4分 (攪拌40秒)
硬化時間	約10分
ショア (硬度)	24
引き裂け強さ (N/mm)	約2.2N/mm ²
色	A剤: ホワイト B剤: オレンジ
保管温度	4℃~30℃

** 製品の色は多少異なる可能性があります。

一般医療機器届出番号：2382X10023000184

自動シリコン練和器

商品番号：下記参照

オートシリコンディスペンサー evo

精度と作業効率を高めたい、全てのシリコンヘビーユーザーのマストアイテム!



デモ器
貸出し可能です。

アドシル及びレプリシル用の、複模型シリコン専用オートディスペンサー。
** 他社シリコンの接続に関しては、当社では確認対象外となります。

器械が真空下でシリコンを吸い上げるため、気泡が入りにくく、均一な割合での練和が可能。手練りに比べ、シリコンのロスも少なく経済的です。



オプションのフットペダルを使えば、両手でフラスコを固定しながら抽出できるので大変便利です。

ボタン一つで誰が操作しても同じ品質のシリコンを練ることができます。



** 他社製シリコンの場合、容器の形状により適応しない場合もございます。

サイズ(W×D×H mm)	290×450×310 mm
重量 (kg)	12.5kg
電源 (V, Hz)	100V AC 50/60Hz
消費電力 (W, A)	250W

商品番号	商品名	本体価格
007590	オートシリコンディスペンサー evo	380,000円
007523	フットペダル (オプション品)	18,000円
007529	ミキシングチップ 100入	8,000円

一般医療機器届出番号：2382X10023000195

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

歯科複模型用シリコン (付加型)

商品番号：下記参照

レプリシル

ショア硬度22、シリコンの純度を限りなく高めたドイツ製ピュアシリコン!



Dent-e-con社は2020年に、社名変更を行いました。



増量材や混ぜ物を使わないピュアシリコン
レプリシルは、混ぜ物や添加物を排除し、シリコン本体の純度にこだわった印象材です。
この「ピュア」なシリコンにより、高い精度と硬化後時間が経ってもベタつきが出ない素材感を実現しました。
また、ベース剤に含まれる高級キャタリストが、硬化時の収縮を防ぎます。

高い操作性と流動性
高い引張抵抗力を持つので、着脱時に歯間部が裂けたりといった失敗を防ぎます。
また、時間が経過しても収縮・型崩れしにくいです。



模型を外しやすいのに裂けにくい。非常に扱いやすい、プレミアムなシリコンです!



営業メンバーの声

用途	複模型用シリコン
作業時間	約7分
硬化時間	約25分
破断伸び (%)	約400%
ショア	22
引き裂け強さ (N/mm)	約3.5N/mm ²
色	A剤: ホワイト B剤: ピンク
保管温度	4℃~30℃

** 製品の色は多少異なる可能性があります。

商品番号	商品名	本体価格
007550	レプリシル 2kg(1+1kg)	10,800円
007551	レプリシル 12kg(6+6kg)	59,800円

一般医療機器届出番号：2382X10023000265

複模型シリコン用アクセサリ

商品番号：下記参照

フラスコセット

経済性に優れた、使いやすいスタビライザーとフラスコセットです。



複模型のシリコン制作精度を高めたい全てのユーザー様へおすすめしたい商品です。



営業メンバーの声

フラスコセットとスタビライザーを併用することにより、シリコンの厚みが均一になり、更に使用するシリコンの量も抑えられて経済的です。

フラスコセット フラスコセット サイズ各種

スタビライザー スタビライザー サイズ各種

サイズ1 (68×81mm)

サイズ2 (73×91mm)



サイズ1用 (68×81mm用)

サイズ2用 (73×91mm用)



商品番号	商品名	本体価格
007507	フラスコセット サイズ1 (68×81mm)	各 3,900円
007508	フラスコセット サイズ2 (73×91mm)	

商品番号	商品名	本体価格
007509	スタビライザー サイズ1	各 1,900円
007510	スタビライザー サイズ2	

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では
新着ニュースを発信しています!

デモ器
こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル
こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています!

ワックス・重合レジン

技工用ワックス

デンタルワックス

使用用途に応じて使い分けられる、ドイツ製ワックス

サンプル 一般医療器届出番号: 2382X10023000171

	スカルプチャーワックス (歯冠用スタンダードワックス) 70g	一般医療器届出番号: 2382X10023000171
天然素材を使用、低融点で高い安定性を兼ね備えた、ワックスアップのための理想的なワックスです。適合・形態が見やすい光反射のない色調で、細かなディテールの再現性に優れています。		55°C
ページュ、ブルー、グリーン、グレー、イエロー		
	アッシュフリーワックス (プレスセラミック用ワックス) 70g	一般医療器届出番号: 2382X10023000168
合成物質を含まない天然ワックスです。複数回濾過してあらゆる不純物を除去したため、プレス直前の焼却で廃残滓が全く出ません。		55°C
ページュ、ブルー、グリーン、グレー、イエロー		
	CADCAM ワックス (CADCAM スキャニング用ワックス) 70g	一般医療器届出番号: 2382X10023000169
ワックスアップ後そのまま高精度なスキャニングができ、彫刻もしやすく操作性に優れたワックスです。キャストにはご使用いただけません。		62°C
グレー		
	ミリングワックス (ミリング用ワックス) 70g	一般医療器届出番号: 2382X10023000174
固めのワックスなのでチッピングが少なく、ミリング面はシャープに仕上がります。ベタつきが無く、ミリングバーに付着しにくいワックスです。*推奨回転数: 5,000rpm 以内		60°C
グリーン、グレー		
	サービカルワックス (マージン部形成用ワックス) 70g	一般医療器届出番号: 2382X10023000170
低収縮性による高い適合精度が特徴のワックスです。細部まで流れ込む流動性とマージン部に最適な弾力性を有していますので、薄く形成できます。		60°C
レッド		
	スティッキーワックス (固定用ワックス) 70g	一般医療器届出番号: 2382X10023000172
咬合器装着時等の模型固定や齙着などの補修に最適な、非常に高い粘着力と強度を持ったワックスです。熱湯できれいに流蟻でき、廃残滓が少ないため、完全に焼却できます。		75°C
ネオンオレンジ		
	ブロックアウトワックス (ブロックアウト用ワックス) 70g	一般医療器届出番号: 2382X10023000173
アンダーカット部のブロックアウト、クラスプ等の維持装置作製時などに使用でき、盛り上げたり削り取ったりと優れた操作性を持っています。		70°C
キャラメル		

光重合パターンレジン 商品番号: 008926

名南 UV パターンシリンジ 焼却後の残渣がない光重合パターンレジン



収縮率がわずか 0.05%なので、高い適合を得られます。

使いやすさと、垂れにくさを追求し、適度な流動性と粘度のバランスに調整されています。

未重合層が非常に少なく、アルコールできれいに拭拭できます。

UV ライト(36W)、320 ~ 360nmの波長で 3 ~ 5 分間光をあてていただくと硬化します。



容量	3g
硬化波長 (UV ライト)	320 ~ 360nm
入数	1 本入 (ノズル 3 個付)
本体価格	1,800 円

一般医療器届出番号: 2382X10023000303

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

研磨用シリコンポイント 商品番号: 下記参照

ビッグコーン シリコンポリリッシャー edenta e

研磨作業をビックにサポート！
熱を持ちにくく耐久性に優れています。目詰まりせず滑らかな使用を実感していただけます。



サイズ (通常) (小のみ)	研磨部: 25.0 mm (20.0 mm) 軸部: 35.0 mm
回転数	10,000~15,000rpm
回転数 (イエローのみ)	5,000~7,000rpm
材質	シリコンゴム粒子

商品番号	商品名	本体価格
004201	ビッグコーンシリコンポリリッシャー ブラウン 6 入 (コバルト)	各 2,400 円
004202	ビッグコーンシリコンポリリッシャー イエロー 6 入 (最終仕上)	
004203	ビッグコーンシリコンポリリッシャー グリーン 6 入 (前仕上)	
004204	ビッグコーンシリコンポリリッシャー グレー 6 入 (中仕上)	
004205	ビッグコーンシリコンポリリッシャー グレー 100 入 (中仕上)	33,000 円
004207	ビッグコーンシリコンポリリッシャー 小 グレー 6 入 (中仕上)	1,400 円

歯科用パフ 商品番号: 004906

フェルトホイール ソフト keystone

艶出し最終工程の強い味方！



** 最大 10,000rpm まで

ソフトで使いやすい、クローム加工に最適な HP 用のフェルトホイールです。

サイズ (径×厚み mm)	Φ 25.4 × 6.3 mm
材質	フェルト
入数	100 枚入

本体価格	8,000 円
-------------	----------------

一般医療器届出番号: 2382X10023000285

カッティングディスク 商品番号: 004919

カットオフディスク keystone

薄いの丈夫！スプルーカットや面均しに大変便利！



原寸大
** 最大 25,000rpm まで

31.8x1.6mm で扱いやすいサイズです。

スプルーカットや補綴物の面均しに大変便利な商品です。

サイズ (径×厚み mm)	Φ 31.8 × 1.6 mm
材質	アルミナ
入数	100 枚入/箱

本体価格	4500 円
-------------	---------------

一般医療器届出番号: 2382X10023000287

研磨用ホイール 商品番号: 下記参照

ヒートレスホイール レギュラー keystone

発熱しにくい炭化ケイ素材で作られたホイール



** 最大 20,000rpm まで

金属、アクリル、人工歯の形態修正にご使用いただけます。

発熱しにくい炭化ケイ素材で作られた研削用ホイールです。

ヒートレスホイール レギュラー #5 50 入	
サイズ (径×厚み mm)	Φ 22.0 × 3.1 mm
入数	50 枚/箱
ヒートレスホイール レギュラー #8 50 入	
サイズ (径×厚み mm)	Φ 19.0 × 3.1 mm
入数	50 枚/箱

一般医療器届出番号: 2382X10023000024


商品番号	商品名	本体価格
004912	ミジーヒートレスホイール #5 50 入	各 4,000 円
004909	ミジーヒートレスホイール #8 50 入	

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

レーズブラシ 商品番号: 下記参照

名南豚毛レーズブラシ Meinan

天然素材で丈夫なレーズ用ブラシ！

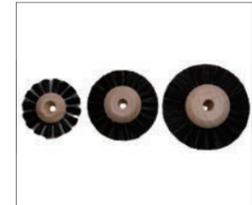

コシの強い豚毛を使用しています。研磨効率が高く、耐久性に優れています。アクリルレジンなどの荒研磨に有効です。

木軸を採用し、毛が抜けにくく最後まで使用できます。

サイズ (直径 mm)	1 列: Φ 48 mm 2 列: Φ 58 mm 3 列: Φ 68 mm
材質	豚毛・木軸
入数	10 個入

一般医療器届出番号: 2382X10023000082

商品番号	商品名	本体価格
004537	名南 豚毛レーズブラシ 1 列 10 入	1,700 円
004538	名南 豚毛レーズブラシ 2 列 10 入	2,500 円
004539	名南 豚毛レーズブラシ 3 列 10 入	3,200 円

カッティングディスク 商品番号: 001601

ウルトラシンジスク keystone

隣接面の強い味方



** 最大 12,000rpm まで

薄くて丈夫です！隣接面や細い歯間の切削と仕上げにご使用いただけます。

ポーセレンにも使用可能！純粋な炭化ケイ素研磨材で作られているため、ポーセレンに着色の心配なくご使用いただけます。

サイズ (径×厚み mm)	Φ 22.2 × 0.22 mm
材質	炭化ケイ素
入数	25 枚入


本体価格	2,000 円
-------------	----------------

一般医療器届出番号: 2382X10023000023

カッティングディスク 商品番号: 004922

レッドフラッシュディスク keystone

鋭い切れ味！

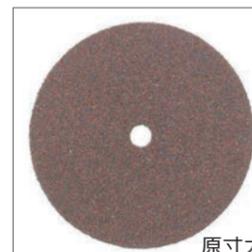

原寸大
** 最大 25,000rpm まで

すべてのクローム、貴金属、非貴金属合金を素早く切削する、大変便利なディスクです。

サイズ (径×厚み mm)	Φ 31.8 × 0.63 mm
材質	アルミナ
入数	100 枚入/箱

本体価格	4,000 円
-------------	----------------

一般医療器届出番号: 2382X10023000286

研磨用ホイール 商品番号: 下記参照

ヒートレスホイール ホワイト (微粒子タイプ) keystone

酸化アルミニウム材で作られたホイール



** 最大 20,000rpm まで

金属・ポーセレン用の形態修正にご使用いただけます。

ヒートレスホイール ホワイトは酸化アルミニウム材で作られており、高い切削力を持ちます。

ヒートレスホイール ホワイト #5 50 入	
サイズ (径×厚み mm)	Φ 22.0 × 3.1 mm
入数	50 枚/箱
ヒートレスホイール ホワイト #8 50 入	
サイズ (径×厚み mm)	Φ 19.0 × 3.1 mm
入数	50 枚/箱

一般医療器届出番号: 2382X10023000024

商品番号	商品名	本体価格
004917	ミジーヒートレスホイール #5 ホワイト 50 入	各 4,000 円
004918	ミジーヒートレスホイール #8 ホワイト 50 入	



名商公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！

技工用カーバイドカッター

技工用カーバイドカッター



あらゆるタイプの材料に分類されたの品質の表面仕上げを施したタングステンカーバイドカッター

各南ロングセラーのスイス製カーバイドカッターです。
石膏、アクリル、金属、貴金属、チタン、またはポーセレンなどにご使用いただけます。
各材料に合わせて調整された刃の形状設計は長い耐用年数および高い切削力を発揮します。

A クロスカット・コース (Coarse)


貴金属、コバルトクローム、ニッケルクローム、レジンの切削

【最高許容回転数】


①40,000rpm以下 ②30,000rpm以下 ③20,000rpm以下

素材	タングステンカーバイド (軸部：ステンレス)
販売単位	1本入

一般医療機器届出番号：2382X10023000138

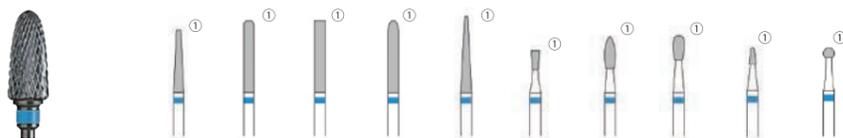


Order No.	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-10
頭(刃)部長さ (mm)	14.0		16.0		17.0	5.3	7.0	5.3	3.5	2.0
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	023									014 023
価格	¥1,900									

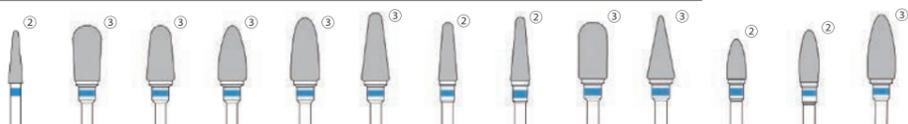

Order No.	A-11	A-12	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17	A-18	A-19	A-20	A-21	A-22	A-23	
頭(刃)部長さ (mm)	11.5		12.2		13.9	15.0	12.9	14.1	12.5	13.9	8.9	11.5	14.2	
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	031	060					045	040	060		040			060
価格	¥2,400													

B クロスカット・ファイン (Fine)


貴金属、ポーセレンのトリミング

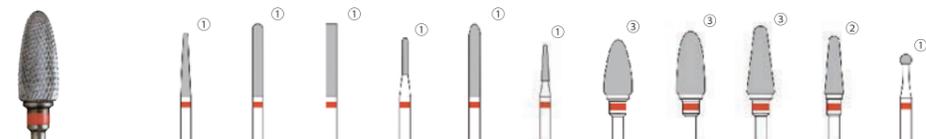

Order No.	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11
頭(刃)部長さ (mm)	14.0	16.0		8.0	16.0	8.0	12.2	13.9	15.9	12.9	2.0
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	023		010	023	016	060			045	023	
価格	¥1,900					¥2,900				¥1,900	

C スパイラルカット・ファイン (Fine)


セミプレシヤス、ノンプレシヤス、チタン、クラウンブリッジのトリミング

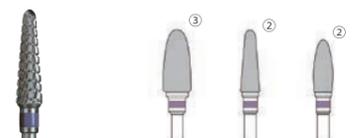

Order No.	C-1	C-2	C-3
頭(刃)部長さ (mm)	13.9	13.7	11.5
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	060	040	
価格	¥2,900		

D スパイラルカット・エクストラファイン (Extra Fine)


セミプレシヤス、ノンプレシヤス、チタンのトリミング

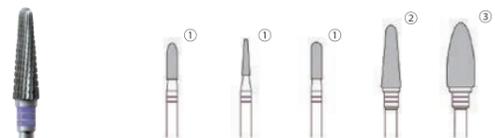

Order No.	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
頭(刃)部長さ (mm)	8.0			13.7	14.2
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	023	016	023	040	060
価格	¥2,400			¥2,900	

E クロスカット・スーパーファイン (Super Fine)

ポーセレン、プレシヤス、ノンプレシヤス、レジンの仕上げ

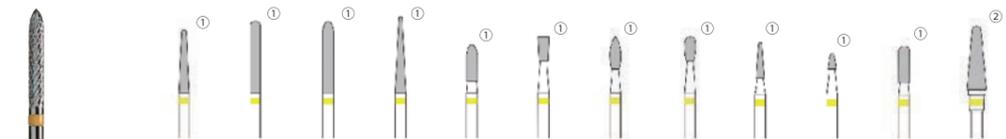


Order No.	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	
頭(刃)部長さ (mm)	14.0	16.0		17.0	8.0	5.3	7.0	5.3	8.0	3.5	8.0	14.1	
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	023									016	014	023	045
価格	¥2,400											¥2,900	

技工用カーバイドカッター

F チタンコーティング・スーパーファイン (Super Fine)


ポーセレン、プレシヤスアロイの仕上げ

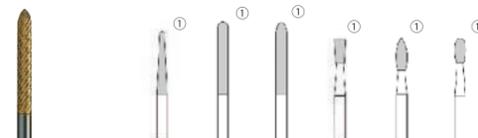

Order No.	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6
頭(刃)部長さ (mm)	14.0	16.0	5.3	7.0	5.3	
部幅 (Φ1/10mm)	023					
価格	¥2,900					

H クロスカット・ベリーコース (Very Coarse)


石膏、レジンの切削

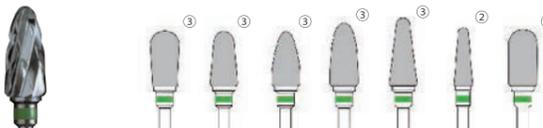

Order No.	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7
頭(刃)部長さ (mm)	12.2		13.9	15.0	12.9	12.5	
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	060					045	060
価格	¥2,900						

J プレインカット・スーパーファイン (Super Fine)

プレシヤスアロイ、レジンのトリミング

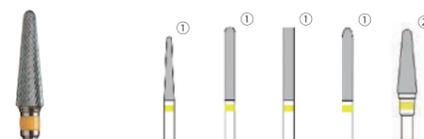

Order No.	J-1	J-2	J-3	J-4	J-5
頭(刃)部長さ (mm)	14.0	16.0		14.1	
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	023			045	
価格	¥1,900				¥2,400

G ダイヤモンドカット・プリズム (Prism)


クラウンブリッジの調整



Order No.	G-1	G-2	G-3	G-4
頭(刃)部長さ (mm)	14.0	16.0	14.1	
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	023		045	
価格	¥2,400		¥2,900	

I クロスカット・エクストラコース (Extra Coarse)


石膏、レジンの荒仕上げ

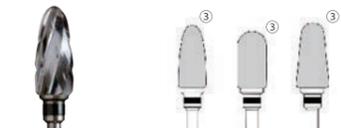

Order No.	I-1	I-2	I-3
頭(刃)部長さ (mm)	13.9	12.5	14.2
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	060		070
価格	¥2,900		

K プレインカット・コース (Coarse)

プレシヤスアロイ、レジンの切削

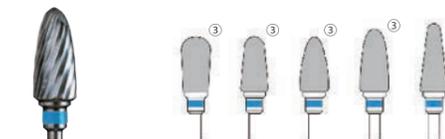

Order No.	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
頭(刃)部長さ (mm)	12.2		13.9	15.0	
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	060				
価格	¥2,400				


世界的に有名なメーカーのスイス製カーバイドカッター。安心してお使いいただけます！

営業メンバーの声

Order No.	K-6	K-7	K-8	K-9	K-10	K-11	K-12	K-13	K-14	K-15
頭(刃)部長さ (mm)	12.9	12.5	13.9	9.4	11.5	12.5	2.4	2.8	3.4	14.2
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	045	060								
価格	¥2,400									

L プレインカット・ベリーコース (Very Coarse)


石膏、レジンの切削

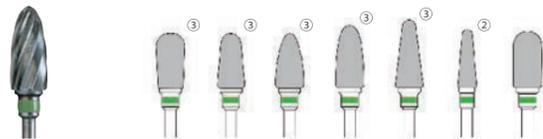

Order No.	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7
頭(刃)部長さ (mm)	12.2		13.9	15.0	12.9	12.5	
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	060						045 060
価格	¥2,900						

M プレインカット・エクストラコース (Extra Coarse)

石膏、レジン荒切削

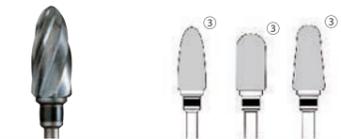

Order No.	M-1	M-2	M-3
頭(刃)部長さ (mm)	13.9	12.5	14.2
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	060		070
価格	¥2,900		

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。



名商公式 facebook では
最新ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名商公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方を動画で公開しています！

技工用カーバイドカッター

ボルケーノ



高い切削性能と耐久性を兼ね備えた DLC コーティングカーバイドバー

ボルケーノは DLC (ダイヤモンド・ライク・カーボン) コーティングを施した、超硬質のカーバイドカッターです。パフォーマンスを向上させる高い切断性能と耐用年数を備えています。

ボルケーノ・クロスカット・コース

VA(Coarse)

貴金属、コバルトクローム、ニッケルクローム、レジンの切削

メタル	10,000~12,000rpm
石膏	8,000~10,000rpm
レジン	10,000~15,000rpm



Order No.	V A-14	V A-16	V A-17	V A-18	V A-23
頭(刃)部長さ (mm)	12.0	15.0	13.0	14.0	14.0
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	060	060	045	040	060
価格	¥4,000				

ボルケーノ・クロスカット・ファイン

VB(Fine)


貴金属、ポーセレンの研磨

メタル	10,000~12,000rpm
セラミック	15,000~20,000rpm



Order No.	V B-10
頭(刃)部長さ (mm)	13.0
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	045
価格	¥5,000

耐久性を表すグラフ

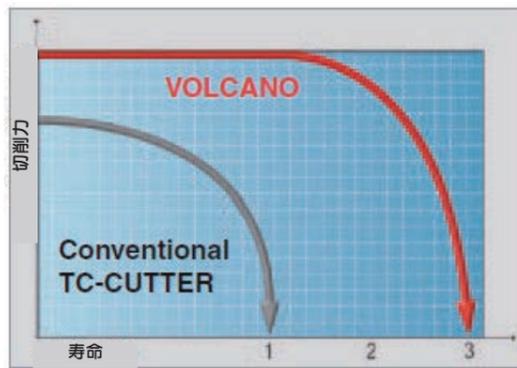

3倍長持ち!

ボルケーノ・クロスカット・ベリコース

VH (Very Coarse)

石膏、レジンの除去

石膏	8,000~10,000rpm
レジン	10,000~15,000rpm



Order No.	VH-4	VH-6
頭(刃)部長さ (mm)	14.0	13.0
頭(刃)部幅 (Φ1/10mm)	060	045
価格	¥5,000	

耐久性もさることながら、ぜひこの切削力を味わっていただきたいです!



営業メンバーの声

DLC コーティングとは?

DLC (Diamond-Like Carbon) コーティングとは、主に炭素と水素で構成される、ナノレベルの薄膜を金属表面にコーティングする技術です。このコーティングは非常に薄いにもかかわらず硬質であるため、今までになかった「低摩耗性」と「高潤滑性」をもたらします。

素材	タングステンカーバイド (軸部: ステンレス)
販売単位	1本入

一般医療機器届出番号: 2382X10023000138

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

ミリングマシン専用バー

商品番号: 下記参照

ミリング用バー



全てのバーに高品質の表面仕上げを施しています。

ミリング加工に要求される「最高の精度」を提供する、高品質バーです! 最適に調整された切削刃の形状デザインにより、精密なミリング加工が可能になります。高い耐久性と切断能力を提供します!

CCCG (3,000 ~ 5,000rpm)

コーンカッター (フラットエンド)



商品番号	004373	004374	004375
L mm	13.0	13.0	13.0
Φ1/10mm	023	031	040
角度	2°	4°	6°
価格	¥4,000		

CCF (6,000rpm)

コーンカッター (面取り)



商品番号	004303	004304	004305
L mm	13.0	13.0	13.0
Φ1/10mm	023	031	040
角度	2°	4°	6°
価格	¥4,000		

CCR (3,000 ~ 5,000rpm)


コーンカッター (ラウンドエンド)



商品番号	004389	004391	004392
L mm	13.0	13.0	13.0
Φ1/10mm	023	031	040
角度	2°	4°	6°
価格	¥4,000		

PC (3,000 ~ 5,000rpm)

パラレルカッター (フラットエンド)

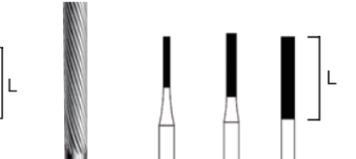

商品番号	004376	004377	004378
L mm	8.0	10.0	15.0
Φ1/10mm	010	015	023
価格	¥3,000		

PCCG (6,000rpm)

パラレルカッター (面取り)



商品番号	004394	004395	004396
L mm	8.0	10.0	15.0
Φ1/10mm	010	015	023
価格	¥3,000		

PCEC (3,000 ~ 5,000rpm)

パラレルカッター (エンドカッティング)



商品番号	004383	004384	004385
L mm	8.0	10.0	15.0
Φ1/10mm	010	015	023
価格	¥3,200		

PCR (3,000 ~ 5,000rpm)

パラレルカッター (ラウンドエンド)



商品番号	004397	004398	004390
L mm	8.0	10.0	15.0
Φ1/10mm	010	015	023
価格	¥3,000		

PWC (3,000rpm)


パラレルフックスカッター



商品番号	004306	004387
L mm	10.0	15.0
Φ1/10mm	015	023
価格	¥3,600	

TPWC (3,000rpm)

テーパーフックスカッター

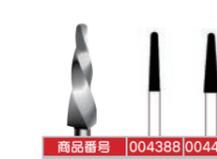

商品番号	004388	004400	004401
L mm	13.0	13.0	13.0
Φ1/10mm	023	031	040
角度	2°	4°	6°
価格	¥3,600		

TD (5,000 ~ 10,000rpm)

ツイストドリル



商品番号	004393	004379	004380
L mm	9.0	9.0	12.0
Φ1/10mm	009	010	012
価格	¥3,200		

コースポリッシャー

- ブラウン (予備研磨) (5,000rpm)
- グリーン (最終仕上げ) (3,000rpm)

L mm	12.0
Φ1/10mm	140
価格	¥400



ミリング用バー各種

素材	タングステンカーバイド (軸部: ステンレス)
販売単位	1本入

コースポリッシャー (ブラウン・グリーン)

素材	シリコンゴム粒子 (軸部: ステンレス)
販売単位	1本入

一般医療機器届出番号: 2382X10023000139

一般医療機器届出番号: 2382X10023000140

ダウエルピン用ドリル

センタートリマードリル/ハンドピースドリル/ダウエルピンドリル



切れ味と耐久性を兼ね備えたダウエルピン用ドリル各種

タングステンカーバイド製で、摩擦熱に強く硬質のため、切れ味と耐久性に優れており、長くご使用いただけます。

商品番号: 002115
センタートリマードリル (CTドリル) 3本入

刃先直径	Φ 2.00 mm
シャンク径	Φ 3.00 mm
素材	タングステンカーバイド
販売単位	3本入

本体価格 18,000円

商品番号: 003102
ハンドピースドリル (HPドリル)

刃先直径	Φ 2.00 mm
シャンク径	Φ 2.35 mm
素材	タングステンカーバイド
販売単位	1本入

本体価格 5,200円

商品番号: 003103
ダウエルピンドリル (DPドリル)

刃先直径	Φ 2.00 mm
シャンク径	Φ 3.00 mm
素材	タングステンカーバイド
販売単位	1本入

本体価格 6,500円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

カーバイドカッター

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

シリコン
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

研磨材
・ブラシ

埋没材
・関連機器材

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

ミリング用バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

シリコン
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

研磨材
・ブラシ

埋没材
・関連機器材

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材



デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。


サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



ダウエルピン 商品番号：下記参照

名南 ニューダウエルピン

面の滑らかさが自慢のロングセラーダウエルピン

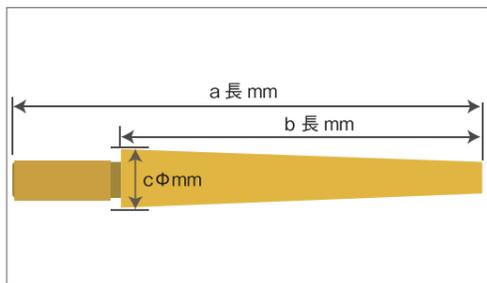

スタンダードな真鍮製のダウエルピンです。メッキ処理でサビに強く丈夫です。上部は接着剤がしっかり入り込み外れにくい網目仕様、下部は模型から外し易いスムーズな面に仕上げました。



名南のダウエルピンはカット面がしっかりしているの、模型台からズレません！



名南のロングセラー商品です！

営業メンバーの声

商品名	名南ニューダウエルピン#2 (単面カット) ゴールド	名南ニューダウエルピン#1 (単面カット) ゴールド	名南ニューダウエルピン#2 (両面カット) ゴールド	名南ニューダウエルピン#1 (両面カット) ゴールド
商品番号	002726 (シルバー:002717)	002727 (シルバー:002719)	002728 (シルバー:002721)	002729 (シルバー:002723)
a長 mm	22.0 mm			
b長 mm	17.0 mm			
cφ mm	3.0 mm	2.2 mm	3.0 mm	2.2 mm
本体価格	3,000 円	3,000 円	3,500 円	3,500 円

**シルバーカラーをご希望の場合は、カッコ内の商品番号と商品名の最後に「シルバー」をご記入ください。
**シルバーカラーの販売は供給国の規制により販売中止となる可能性がございます。予めご了承ください。

サイズ(W×D×H mm)	各種表参照
材質	真鍮製
カラー	ゴールド、シルバー
販売単位	1,000 本入/箱

石膏用ノコ刃 商品番号：003502

カットイットノコ刃

切れ味バツグンのノコ刃



切れ味と耐久性に優れたノコ刃です。0.2mmの薄い刃で繊細な分割にも最適です。

刃の色は少し青みがかった黒色です。

ネイ社(米国)のフレームをご使用の方は本商品が使用できます。

**ノコ本体(フレーム)は付属していません。



サイズ(全長 mm)	約 13.3 mm
穴~穴間	約 12.8 mm
厚み	約 2.8 mm (刃部分: 約 1.5 mm)
販売単位	10 本入

本体価格 1,800 円

台付けトレイ 商品番号：002601

ダイロクトレー

小さな模型はダウエルピンいらず



耐久性に優れた樹脂製トレイです。ダウエルピンを使用せず、分割模型の作成が可能になります。(局部用)

サイズ(W×D×H mm)	76 × 31 × 23 mm
材質	樹脂製
販売単位	1 個

本体価格 1,000 円

模型保管ケース 商品番号：下記参照

ワークボックス

一目で便利カラートレーボックス



多彩なカラー！7色あるので、曜日ごとの色分けや、症例ごとの色分けが出来ます。一目で分かり大変便利です。

紙類(指示書など)をクリップ出来るピン付で安心です。

使わない時は重ねて収納できるため場所を取りません。


サイズ(W×D×H mm)	140 × 180 × 170 mm
材料	プラスチック製
販売単位	1 個入

商品番号	商品名	本体価格
002771	ワークボックス レッド	各 500 円
002772	ワークボックス ホワイト	
002773	ワークボックス ピンク	
002774	ワークボックス ベージュ	
002775	ワークボックス ブルー	
002776	ワークボックス イエロー	
002777	ワークボックス グリーン	

台付けフォーマー 商品番号：下記参照

名南モデルフォーマー

特殊なサイズにお応えします

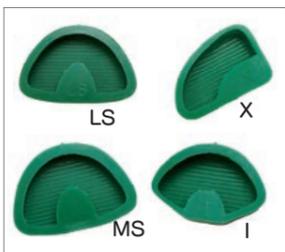

各サイズを取り揃えています。

モデルフォーマー LS：大顎短用
モデルフォーマー MS：中顎短用
モデルフォーマー X：臼歯片側用
モデルフォーマー I：局部用

商品番号	商品名	内寸最長部(mm)縦×横	本体価格
004003	名南モデルフォーマー LS	77 × 46 mm	各 1,400 円
004005	名南モデルフォーマー MS	70 × 46 mm	
004006	名南モデルフォーマー X	61 × 40 mm	
004008	名南モデルフォーマー I	64 × 40 mm	

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

クラウン・ブリッジケース 商品番号：下記参照

技工物ミニボックス(黒)

ハイクオリティな納品スタイルに欠かせない技工用ミニボックス



上下2枚のスポンジでやさしくホールドするため、壊れやすい技工物でも安心して納品いただけます。

コストパフォーマンスが高いので、低コストで高級感をアピールできます！

<サイズラインナップ>
(大) 幅：42mm 奥行：55mm 高さ：23mm
(小) 幅：28mm 奥行：28mm 高さ：24mm

サイズ(W×D×H mm)	上記参照
材質	プラスチック製
販売単位	大：25 個入 小：50 個入

商品番号	商品名	本体価格
010104	技工物ミニボックス黒(大) 25 入	700 円
010105	技工物ミニボックス黒(小) 50 入	900 円

ガストーチ 商品番号：009010

ミニトーチ

充填式でハンディなトーチ



着火ボタンを押すだけの簡単操作です。

ロウ着可能なピンポイントな炎から、ワックスの軟化に適した炎まで調整ができます。

ガス充填量：20mℓ
ガス満充填時燃焼時間：30分
炎の温度：650℃

**ガスボンベは別売りです。

サイズ(W×D×H mm)	80 × 72 × 160 mm
注入方法	ボタンガスボンベ
販売単位	1 個入

本体価格 4,800 円

熱可塑性樹脂用アルミ容器 商品番号：008823

インジェクター用アルミ容器ドーム型

汎用性の高いスタンダードサイズを低価格で！



コストパフォーマンスに優れた、ディスクタイプの熱可塑性樹脂充填用のアルミ容器です。汎用性が高いので、各種インジェクターでお使いいただけます！一箱に10本入で大変オトクです！



試用のためのサンプルもご用意しておりますので、ぜひご連絡ください！



サイズ(W×D×H mm)	左図参照
アルミ容器内径	±0.25 mm
材質	アルミ製
販売単位	10 本入/箱

25mm
18mm
108mm

本体価格 1,400 円

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

保管ケース 商品番号：010103

スケルトン技工物ミニボックス

シートで挟んで技工物を傷付けない、透明なミニボックス



デリケートな補綴物の保管や納品時にご使用いただけます。

ケースの中には伸縮性のある透明フィルムがあり、上下のフィルムでしっかり保護します。


サイズ(W×D×H mm)	50 × 55 × 25 mm
材質	プラスチック製
販売単位	10 個入

本体価格 1,000 円

ブローパイプ 商品番号：004801

ナショナルブローパイプ

ブローパイプのスタンダードモデル！

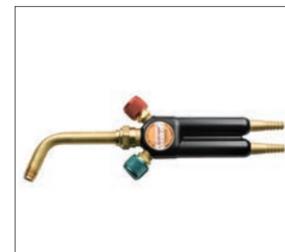

エア用(2種類)、酸素用(1種類)のノズルを標準付属しています。

調整ノブはどんなに回転してもガス漏れしないOリングジョイントを採用しています。



サイズ全長	230 mm
エルボー長	120 mm
付属品	N1、N2、OX3

本体価格 30,000 円

メジャリングデバイス 商品番号：下記参照

メジャリングデバイス

補綴物の厚み測定ならおまかせ



10分の1ミリ単位で測定可能です。

両面にメモリがついているので、右利き左利きを問わずご使用いただけます。

ワックス用は先端が丸く、キズが付きにくい形態です。メタル用は先端が細くピンポイントでの測定が可能です。



サイズ(mm)	全長：103 mm
材質	ステンレス製
測定範囲	0.1 ~ 10 mm

商品番号	商品名	本体価格
005703	メジャリングデバイス ワックス用	各 2,600 円
005704	メジャリングデバイス メタル用	

埋没材・関連機器材

石膏・関連機器材

シリコン・関連機器材

ワックス・重合レジン

研磨材・ブラシ

埋没材・関連機器材

カーバイドカッター

ミリング用バー

ダウエルピン・関連機器材

その他技工関連機器材



名南公式 facebook では新着ニュースを発信しています！

デモ器 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

サンプル こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。



名南公式 YouTube チャンネルにて新商品や使い方を公開しています！



会社概要

診療用器械・器材関連

P.5~

	製品紹介 歯科用ルーベ シャドーレスルーベ		製品紹介 ワイヤレス口腔内カメラ パットカムワイヤレス
	製品紹介 インスツルメント フラップホルディング グライヤー		製品紹介 インスツルメント ガッタパーチャ リムーバー
	製品紹介 インスツルメント エンドファイル ホルダー		製品紹介 インスツルメント MTAブロック CLEE
	製品紹介 歯鏡 フロント サーフェスマー		製品紹介 パキューム内蔵型集塵器 キューイン NEO
	製品紹介 滅菌バック セルフシールパウチ		製品紹介 プロフィペースト ジェラート プロフィペースト

デジタルソリューション関連

P.21~

	製品紹介 3D スキャナー 3D スキャナー UP300		製品紹介 3D プリンター アシガ PRO4K 80 UV
	製品紹介 CAD ソフトウェア イーザーベースでベース プレートを設計・制作		製品紹介 3D スキャナー樹脂 デンタキャスト グリーン
	製品紹介 CAD ソフトウェア イーザーベースで 個人トレーを製作		製品紹介 アボアナログ デュアルアナログ・ スキャンボディ
	コラボ イーザーベース クワイークス様 対談 (デジタル製作)		製品紹介 塗薬充填式重合器 オートフラッシュ
	コラボ アシガ MAX UV 阿部先生 対談 (デジタルデンチャー)		特集 3D プリンター特集 歯科向け3D プリンター と構築方式について

技工用器械関連

P.37~

	製品紹介 レーザー溶接機 DaDo アルゴン		特集 レーザー溶接機 DaDo アルゴン セットアップガイド ~開梱編~
	製品紹介 乾式モデルトリマー ドライトリマー		製品紹介 注水式エアタービン エアターボ MAT-300W
	製品紹介 2層式ハイブリッドジスク コンピロックプラス		特集 パキュームフォーマー パキュームフォーマー を使ったマウスガード・ スプリントの作り方
	製品紹介 プレス冷却器 バリオ SC		特集 マウスガード マウスガードの種類と おすすめ用途について
	コラボ 技工機 東海デンタル様と ラボベンチ		

技工材料関連

P.59~

	製品紹介 チタン鋳造専用 シェーラ チタンイーザー		製品紹介 石膏沈澱促進剤 沈澱くん
	製品紹介 台付け専用石膏 シェーラ ゾッケルフルッシー		製品紹介 技工用カーバイドカッター ボルケーノ
	製品紹介 模型用超硬石膏 シェーラ プレミアム		製品紹介 付加型シリコン ステンシルエコ 85

今後もさまざまな新商品の紹介、実際に商品を使用した検証動画をアップロードしていきます。ぜひチャンネル登録をして、新着動画をご確認ください。




社名	名南歯科貿易株式会社
代表者	代表取締役会長 新美 才治 代表取締役社長 新美 洋平
名古屋本社	〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2-26 TEL : (052) 799-4075 FAX : (052) 353-6610
東京オフィス&ショールーム	〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F TEL : (03) 6261-3523 FAX : (03) 6261-3524
千葉サービスセンター	〒102-0082 千葉県市原市柏井町 3-619 植草倉庫 3号棟
資本金	1,000 万円
設立	1981 年 1 月
取引銀行	三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、愛知銀行、岡崎信用金庫、十六銀行
主要取引国	ドイツ、フランス、イタリア、スイス、アメリカ、中国、韓国他
主要取扱品目	歯科用器械材料、歯科技工用器械材料、CAD ソフトウェア、歯科衛生製品、 オーラルケア関連商品
業機・許可番号	第二種医療機器製造販売業許可：23B2X10023 医療機器製造業許可：23BZ200031 医療機器修理業許可（本社）：23BS200073 医療機器修理業許可（東京オフィス）：13BS201133

会社沿革


- 1981 ● 新美才治、名南歯科貿易株式会社を名古屋市中村区に設立
- 1982 ● 医療用具輸入販売業許可取得
- 1987 ● 本社を名古屋市中村区に移転
- 2001 ● 東京都港区に東京オフィスを設立
- 2007 ● 名古屋市中村区に本社新社屋が完成
- 2008 ● 東京都中央区に東京オフィスを移転
- 2014 ● 第二種医療機器製造販売業許可取得（許可番号：23B2X10023）
- 東京都千代田区に東京オフィス移転及び東京ショールーム開設
- 2016 ● 新美才治、代表取締役会長就任
● 新美洋平、代表取締役社長就任
- 2017 ● YouTube にて「名南チャンネル」を開設、動画配信開始
- 2018 ● 千葉県市原市に千葉サービスセンター開設
- 2021 ● 創業 40 周年



名南の SNS の公式アカウント

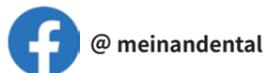

名南歯科貿易株式会社
公式チャンネル

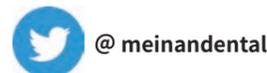

カタログとあわせて名南webサイトもご活用ください。

2021/2022 名南歯科貿易総合カタログは、名南 web サイトにも掲載しています。スマートフォンやタブレットでもご覧いただけます。また、商品情報ページには最新情報を掲載しておりますので、本カタログとあわせてご活用ください。

<http://www.meinandental.com/>



