



作業模型用 超硬石膏

シェーラ プレミアム ゴールドンプラウン

5kg

販売価格

¥6,600 (税別)


- 安定した非常に細かい粒度の超硬石膏で、最高品質の模型製作を実現します。
- 盛り上げ作業が簡単に行えるほか、優れたチキソトロピー性により、弱いバイブレーションでも簡単に印象へ流し込むことができます。
- マージン部などの薄い部分でもチッピングがしにくく、簡単に分割作業を行えます。



操作性にこだわった、
ドイツ製の超硬石膏。

商品のプロモーション動画もございます。
ぜひチェックしてみてください。

YouTube

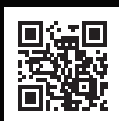

スペック

内容量	5kg
用途	作業模型用
混合比	100g (粉末) : 20mL (水)
作業時間	4.5~5.5分
硬化時間	35~40分
膨張率	0.10%
硬化硬度	60MPa (硬化後1時間) 270MPa (硬化後2時間) 290MPa (硬化後24時間)

一般的名称: 歯科用硬質石膏

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000226

関連商品

コストパフォーマンス抜群の
ロングセラーダウエルピン

サンプル品
 ご依頼OK!

名南ニューダウエルピン 1,000入

- 単面カット No.1 ¥3,800-
 No.2 ¥3,800-
 両面カット No.1 ¥4,800-
 No.2 ¥4,800-



- スタンダードな真鍮製のダウエルピンです。
- メッキ処理でサビに強く丈夫です。
- 上部は接着剤がしっかり入り込み外れにくい網目仕様、下部は模型から外し易いスムーズな面に仕上げました。

リニューアルした定番の低粘度接着剤

クイックタイト 2g x 20入

¥6,000-


- 2gずつの小分けサイズなので、いつも開けたて新鮮でお使いいただけます。
- 細部への使用に大変便利なポリ管ノズル付きです。
- 低粘度タイプで接着面に厚みを出さずにご使用いただけます。



タフでシャープな交換用ノコ刃

カットイトノコ刃 10本入

¥1,800-

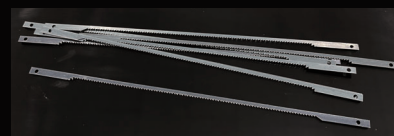

- 切れ味と耐久性に優れたノコ刃です。
- 0.2mmの薄い刃で繊細な分割に最適です。

10本入
 全長: 133mm 幅: 2.8mm 厚み: 約0.2mm

商品価格は全て税別となります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社: 〒454-0805 愛知県名古屋市千川区舟戸町2番26号
 TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610

東京オフィス: 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F & ショールーム
 TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524

お取扱店