

吸引型マウスガード成型器

バキュームアダプター

容易にマウスピース作成が可能です。5.0mmの厚手シートの圧接も可能です。
本体は鋳鉄製、プラットフォームはアルミ製の為、錆などの心配が無く長持ちします。
ヒーティングエレメントは左右対称に設計されており、均一に加熱することができます。
バキューム内蔵型、100Vコンセントのみで使用可能です。



ヒーターエレメントカバー

左右対称のシンメトリーな
ヒーターエレメント

真空プラットフォーム

耐久性の高い鋳鉄製のベース



挟んだシートの加熱位置（高さ）を
調整するためのハンドル

フレームを開閉するハンドル

熱と真空を作動させるための
切り替えスイッチ

YouTube
YouTubeで使い方の
動画も公開しています！



本体スペック

サイズ	230×210×366 mm
重量	6.5kg
電源	110V 50/60Hz
消費電力	1,475W

販売価格 83,000円(税別)

(税込：91,300円)

一般医療機器届出番号 23B2X1002300001

関連商品一覧

シリコンスプレー **準備**



模型の上からシュートと一吹き。
ジスクの分離剤としてお使いください。

販売価格 1,500円(税別)


スプリントシステムキット **準備** **成型**



精度の高いスプリント成形を補助します。
余分なアンダーカット部分を埋めることで、
模型からの取り外しが容易になります。

販売価格 16,000円(税別)

ジスク用トレー2枚組(角/丸) **準備**

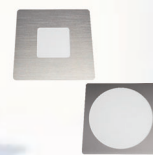

角型ジスクを4分割使用できます。
丸型は穴部分の直径110mmサイズと
なっております。このトレーを使うことで
本製品で丸型シートの成型ができます。

販売価格 各6,000円(税別)

ブロックアウト粘土(500g) **準備**



大きなアンダーカットの
ブロックアウトにも。

販売価格 1,200円(税別)

ソニックカッター ZO41-II **除去**



ハサミでは切ることの難しかった
硬くて厚いジスクも、超音波の力で
楽にカットができます。

販売価格 68,000円(税別)

ハンディートーチ MJ600 **仕上げ**



炎の出ないトーチで焦がしたり変色
させることなく適度な炎射効果で
周縁部を滑らかにしたり、艶出しを
するのに便利です。

販売価格 4,300円(税別)


アルミニウムトレー ハンドル(10入) **仕上げ**

スポーツガード用 ストラップ(10入) **仕上げ**



販売価格 各300円(税別)

スーパーシート(艶出しシート) **仕上げ**

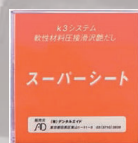

トーチで軟化させたジスクに軽く押し
付けるだけで艶出しができます。

販売価格 1,600円(税別)

セントリフューズキット **仕上げ**



マウスガードヘラミネート加工が
可能になります。
このキットを持っていれば簡単に
オリジナルのマウスピースを作成
することができます。

販売価格 33,000円(税別)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

2021.09.30 n/a



取扱店

www.meinandental.com

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F

TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

