

Keystone Wax

技工用ワックス

keystone[®]
industries

CAD/CAM Wax



お勧めします。

単冠、ブリッジからインプラント
上部構造まで、スキャン前の
ワックスアップに最適です。
CADスキャン用スプレー
噴射の必要がないので、手早
く低コスト、模型も汚れません。
お勧めします。



株式会社Vogue代表
歯科技工士
瀬田 寿樹氏
Wieland社認定ラボ
CM社インストラクター
PSDインストラクター

ワックスアップ
スキャン前のスプレーは
必要ありません。

スキャニングを
実施します。

スカルプチャーワックス

歯冠用スタンダードワックス

4,800円(税別) (容量: 70g)



ブルー

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000171

55℃

- 低融点により、長い操作時間を実現。天然素材を使用した、ワックスアップに理想的なワックスです。
- 目に優しい光反射のない色調です。

- 細かなディテールの再現性に優れています。
- ワックスの削り面が非常に綺麗です。



ベージュ



グリーン



グレー



イエロー

アッシュフリーワックス

プレスセラミック用ワックス

4,800円(税別) (容量: 70g)



グリーン

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000168

55℃

- 複数回濾過してあらゆる不純物を除去したため、キャスト後の廃残滓が全く出ません。
- 合成物質を含まない天然ワックスです。

- コーンテクニクを用いて築盛することもできます。
- あらゆるプレスサブルセラミック・キャストサブルセラミックシステムにお使いいただけます。



ベージュ



ブルー



グレー



イエロー

サービカルワックス

マージン部形成用ワックス

ミリングワックス

ミリング用ワックス



レッド

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000170


60℃

- 低収縮で弾性もわずかなため、全く引張応力はありません。
- マージン部に最適な物性を有し、限界まで薄く確実に形成できます。

4,800円(税別)
(容量: 70g)



グリーン

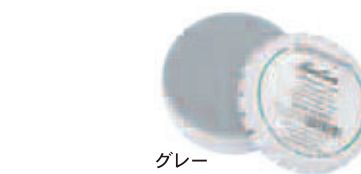

グレー

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000174

60℃

- チッピングが少なく、ミリング面はシャープに仕上がります。
- 滑らかな切削面が得られ、ミリングバーによる変形や歪みがありません。
- ミリングバーに付着しにくいワックスです。
※推奨回転数: 5,000rpm以内

4,800円(税別)
(容量: 70g)

スティッキーワックス

固定用ワックス



ネオンオレンジ

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000172

75℃

- 咬合器装着時等の固定や蝋着などの補修に最適です。
- 非常に高い粘着力と強度を持ったワックスです。熱湯できれいに流蟻でき、灰分率が低いので、完全に焼却できます。

(容量: 70g) 4,800円(税別)



グレー



グレー

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000169

62℃

- ワックスアップ後そのまま高精度なスキヤニングができ、彫刻もしやすく操作性に優れたワックスです。
- スキヤン用スプレーが不要で、コストダウンにもつながり、必要以上に作業模型を汚すこともありません。

5,800円(税別)
(容量: 70g)

ブロックアウトワックス

ブロックアウト用ワックス



キャラメル

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000173

70℃

- アンダーカット部のブロックアウト、クラスプの作製時などに使用でき、盛り上げたり削ったりと優れた操作性を持っています。

4,800円(税別)
(容量: 70g)

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社: 〒454-0805 愛知県名古屋市千代田区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス: 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F & ショールーム
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

お取扱店