

高純度ピュアシリコン

低収縮率で高精度、ベタつきを抑える。

SILCONIC®
Silicone Experts



歯科技工用 複模型用シリコン

レプリシル



1 + 1kg (2kg)



6 + 6kg (12kg)



Meinan

名南歯科貿易株式会社

ショア硬度A 22、裂けにくくて高精度

ピュアシリコンで印象を高品質に

混ぜ物や添加物を排除し、シリコン本体の純度こだわった印象材です。この「ピュア」なシリコンにより、高い精度と硬化後時間が経ってもベタつきが出ない素材感を実現しました。

また、ベース剤に含まれる高級キャタリストが、硬化時の収縮を防ぎます。



裂けにくく、高い操作性と流動性

高い引張抵抗により、時間が経過しても収縮・型崩れしにくく、加えて脱着時に歯間部が裂ける失敗を防ぎます。流動性が高いため、細部への流し込みも容易です。脱離時にアンダーカット部が裂ける失敗も防ぎます。



製品仕様

容量	1kg+1kg / 6kg+6kg
カラー	ピンク
混合比	1 : 1
混合時間(23℃)	40秒
作業時間(23℃)	約6分
硬化時間	約25分
引張抵抗	約3.5N/cm ²
引張率	約400%
ショア硬度(60分後)	ショアA 22
保管温度	4~30℃

商品番号: 007550

レプリシル 2kg (1+1kg)



商品番号: 007551

レプリシル 12kg (6+6kg)



標準価格 **15,800円(税別)**

標準価格 **87,800円(税別)**

販売名: レプリシル 一般的名称: 歯科複製型用ゴム質弾性印象材料 一般医療機器届出番号: 23B2X10023000265

関連商品

商品番号: 007590

オートシリコンディスペンサーevo



- オートシリコンディスペンサーevo本体
- 電源コード ●ミキシングチップ(100入)
- アドシル 1x1kg用ジョイント ●アドシル 6x6kg用ジョイント

製品情報

- 型番: DA2000 ■電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 250w
- 重量: 12.5kg ■サイズ(WxDxH): 290x450x310mm




オプション品のフットペダルの使用で、両手でフラスコを固定しながら自動練和が行えるため、フラスコへの注入に集中することができます。

オートシリコンディスペンサー本体 **450,000円(税別)**

フットペダル (オプション) **18,000円(税別)**

販売名: オートシリコンディスペンサー 一般名称: 歯科用練成器具 一般医療機器届出番号: 23B2X10023000195

フラスコ・スタビライザー各種

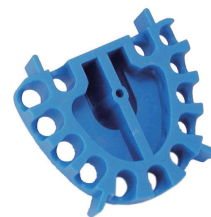

- フラスコセット 商品番号
- ・サイズ1 (68x81mm) 007507
- ・サイズ2 (73x91mm) 007508

繰り返し使えるので経済的で、安定した複製型シリコンが製作できます。

- スタビライザー 商品番号
- ・サイズ1用 007509
- ・サイズ2用 007510

シリコンの厚みが均一になり、複製型シリコンの製作精度が上がります。

各サイズ **4,400円(税別)**

各サイズ **2,400円(税別)**

※製品の外觀は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

製造販売元 **名南歯科貿易株式会社**



本社: 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス: 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

Web サイト



YouTube



お取扱店