

CADソフトウェア

SHERA イージーベース



個人トレーやベースプレート製作をデジタル化



毎年の更新料無しの完全永続ライセンス！



Meinan
名南歯科貿易株式会社


トレー製作をデジタル化!

アナログ製作の限界



- ▶ 印象材が均一でない為に精度が悪い...
- ▶ サイズが合っていない為に、正確な印象が取れていない...


デジタル製作のメリット

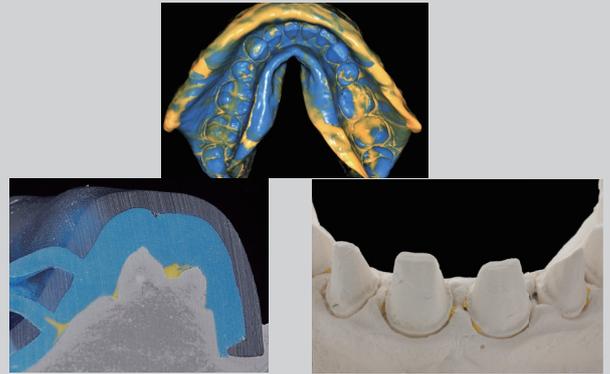

- ▶ 各材料や用途に合わせ、最適化された印象スペースが自動で設定されます。
- ▶ 手作業では難しいトレー内面のエッジの付与により印象材を逃がすことなく均一で精度の高い印象採得が可能になります。

デジタル製作に移行することで、誰でも均一でより精度の高い個人トレーを、効率よく安定して製作することができます。
また、材料に合わせたスペースを確保することにより、実際に必要な印象材のみがトレーに置かれるため、最大で40%節約できます。


個人トレー製作

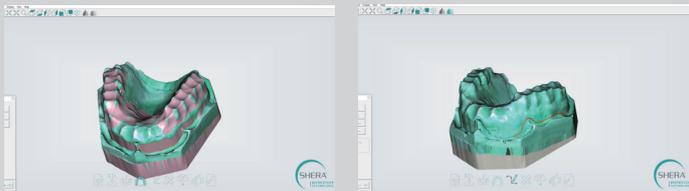


- ▶ 必要な部分にブロックアウトや円柱状のスペースを簡単に付与できます。
- ▶ 模型に外形線を描く事により、線を認識し簡単に設計が可能になります。




- ▶ トレーの枝や保持装置も簡単に設定が可能です。
- ▶ 印象採得時の圧を逃がす為の穴も、均一にエリアでの設定が可能です。

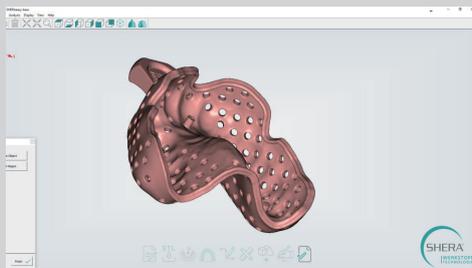


ベースプレート製作

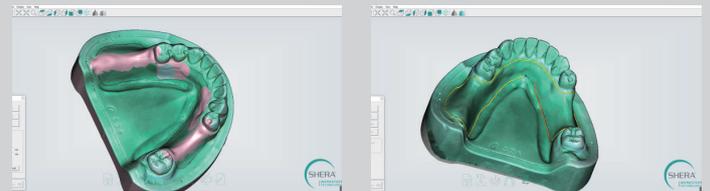

- ▶ 必要な部分に必要な量のリリーフを簡単に付与できます。
- ▶ 外形線を描く事により線を認識し簡単にベースプレートの設計が可能になります。

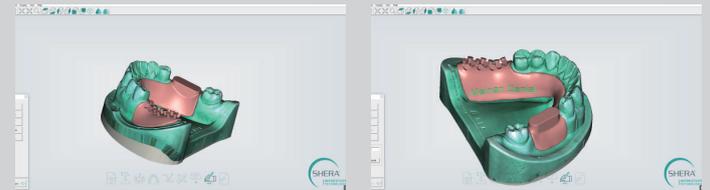

- ▶ パラフィンワックスなどの脱離防止のリテンションや節約の為の床の設定も可能です。
- ▶ 患者様の名前や会社名などの名入れも可能です。
*半角英数のみ可能

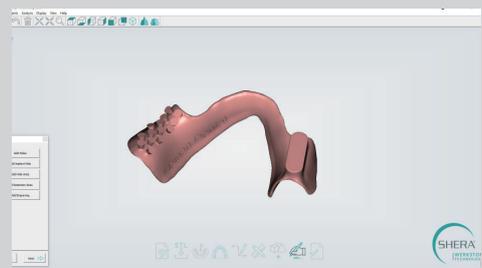

■ 内容物

- ・ USBライセンス dongle
- ・ ソフトウェア (名南HPよりダウンロード可)

本体価格

¥ 350,000 (税別)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2020.06.29 1000

■ 製造販売元



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524