

チタン鑄造専用リン酸塩系埋没材

シェーラ チタンイージー

SHERATITAN EASY



一般的名称: 歯科高温鑄造用埋没材 一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000389

Ti

標準
加熱

急速
加熱

1.6kg


ドイツ シェーラ社が開発した、あらゆるチタン鑄造を最適化するために開発された、高品質な専用埋没材です。

難しいチタン鑄造の工程や調整をシンプルにします。

細かな粒子で、鑄造体の表面を
なめらかにします。
これにより、鑄造後に行う研磨
工程の負担を減らします。

急速加熱および従来のオーバー
ナイト(標準加熱)に対応しています。

** 耐火模型作成、二次埋没については取扱い説明書をご確認ください。

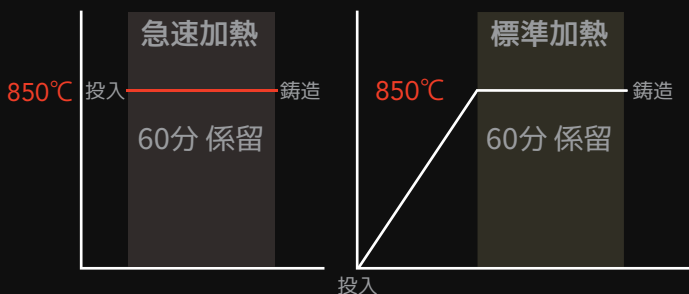

** 上記係留時間は参考数値です。鑄造量が多い場合、係留を長めに調整ください。

専用液を併用するので、リン酸塩
系埋没材の特徴である正確な膨張
結果が得られます。

** 下記シェーラリキッドと、シェーラリキッド エクストラをご用意ください。

鑄造後のフィッティング精度も高く、
安心してご使用いただけます。

(株)メディナ様にて、チタン鑄造検証のご協力を頂きました。

内容量	1.6 kg
用途	チタン鑄造用
混合比	100 g (粉末) : 15 mL (専用液+蒸留水) 300 g (粉末) : 45 mL (専用液+蒸留水)
作業時間/温度	6~7分/20~23 °C
鑄造時間	60分以上 係留
急速加熱	対応 (850 °C / 45分以上)

販売価格 13,800 円(税別)

シェーラ 埋没材用アクセサリ



埋没材専用の混合液

シェーラリキッド

1L : 4,200 円(税別)
5L : 14,800 円(税別)

正確な膨張を促す、
シェーラ社埋没材専用の混合液です。

SHERALIKUID



SHERALIKUID EXTRA

チタン埋没材専用の高濃度混合液

シェーラリキッド エクストラ

1 L : 5,200 円(税別)

膨張率によるバラツキが少なく、コンスタントな
鑄造結果を得られます。希釈タイプです。

** チタンイージーには必須のリキッドです。

** その他の埋没材では不要です。

シェーラ マップルリング シェーラ マップルリング MG

3x Sサイズ Φ47cm : 7,000 円(税別)
6x Mサイズ Φ58cm : 7,500 円(税別)
9x Lサイズ Φ75cm : 8,000 円(税別)

8,000 円(税別) 金属床用
(デンチャー用)
マップルリング



SHERAMUFFEL FORMER

全方位の膨張を促す、
軟性のクラウン・ブリッジ用のマップルリングです。

表面張力を下げて
埋没材の流動性を上げる
界面活性剤

シェーラリラクサ

スプレー50mL 1,400 円(税別)
詰替用 500mL 7,000 円(税別)

サンプル品
ご依頼OK!




SHERARELAXA

ガス放出性が高い、バイオキャストイング
ライナー

シェーラリングライナー

幅 50mm x 厚 1mm
合計 25 M (メートル)
4,500 円(税別)

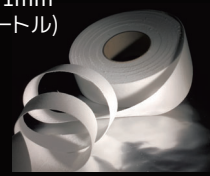

SHERABIO-RINGLINER

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本 社 : 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号
TEL : (052)799-4075 FAX : (052)353-6610

東京オフィス : 〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F
& ショールーム TEL : (03)6261-3523 FAX : (03)6261-3524



YouTube

お取扱店