

複模型用シリコン自動練和器

オートシリコンディスペンサー evo




Auto Silicone Dispenser

スピードと、均一な練和を実現。



Meinan
名南歯科貿易株式会社

手練りの煩わしさを、解消。

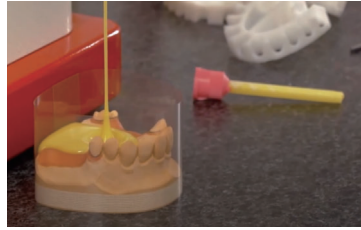

ボタンを押すだけで自動的に練和と抽出でき、作業の労力や負担を減らします。

硬化時間10分のアドシルラピッドも販売しております。

** 他社製シリコンの場合、装着できなかつたり、十分な練和ができない場合がございます。

機器特長

手練りのあらゆる無駄を解消

手練りで発生するロス（練和容器に付着したシリコン等）が出ません。

作業時間を大幅に短縮

シリコンの練和から抽出がボタンひとつで実現。手練りの作業や器具に付着したシリコンの清掃などが発生しないため、時間短縮になります。

モーターで均一な練和を実現


器械が自動的にモーターで練和するので、均一で安定した注入が実現できます。

気泡が入りにくい真空下練和

真空下で練和するため、練和時に抽出されるシリコンへの気泡が入りにくくなり、より正確な複製型印象の製作ができます。

オプション品

フットペダル

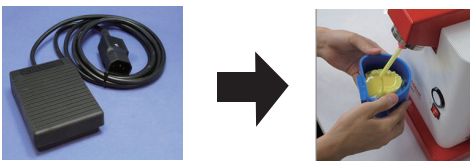

フットペダルの使用で、両手でフラスコを固定しながら自動練和ができるため、フラスコへの注入に集中することができます。

販売価格 **18,000円**(税別)

セット内容



商品番号: 007590

オートシリコンディスペンサー-evo

オートシリコンディスペンサー-evo本体
電源コード
ミキシングチップ(100入)
アドシル 1x1kg用ジョイント
アドシル 6x6kg用ジョイント

販売価格 **380,000円**(税別)

一般医療機器届出番号：23B2X10023000195

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2022.06.23 100

www.meinandental.com

製造販売元



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

●名古屋本社
〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム
〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書館ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店

Meinan
名南歯科貿易株式会社