

マルチ800

# Multi 800

思うままに操作する、ニータイプの技工用ブラシレスマイクロモーター



膝で操作する  
“ニータイプ”  
Knee Type

## Point1

# スペースを有効活用できる、ニータイプ

機器を足元に設置し、デスク上の作業スペースを確保。ワークフローで発生するフットペダルを探すストレスを徹底的に削減する、膝で押すニータイプモデルです。



- ✓ 疲れにくい
- ✓ 操作性
- ✓ 時短

## Point2

# 高トルクでブラシレス

最大7.6Ncmの高トルクで技工作業を徹底的にサポート。また、ブラシレスなためカーボンブラシが交換不要で、加えて高い耐久性も両立しています。

## Point3

# 誰でも簡単な設置方法

穴開け用の台紙が同梱されており、名南ラボベンチに加え、すでに導入している技工机にも取り付けが可能です。

※ 機の仕様や形状によっては、一部取り付けが出来ないタイプもございます。

## ハンドピース SDE-BS50C

- ・最高回転数 50,000rpm ・最大トルク 7.6Ncm
- ・寸法 L160×Φ27mm ・重量 215g (コード含まず) ・コード長 1.5m



## 本体 MULTI-800

一般的名称：歯科技工用モーター  
一般医療機器届出番号：23B2X10023000424

サイズ(W×D×Hmm)	112.5×237×218 mm
重量	2.80kg (ハンドピース、コード含まず)
電源	100-120 V 50/60Hz

### ■セット内容

ハンドピース、ハンドピーススタンド  
電源コード、取り付けブラケット/ナット・ボルト  
取り付け用台紙

### 販売価格

160,000円(税別)

## MULTI-800

### オートクルーズ 機能搭載

同じ位置で押し込みを"2秒間"  
キープすると、ひざコントローラー  
を離しても任意の回転数で  
自動的に回転し続けます。



右回転/左回転  
対応


ひざ/ハンドモード  
切替可能

オートクルーズ  
切替可能

オプション品

## Option

### フットペダル

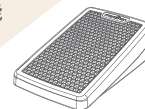

販売価格

8,000円(税別)

## 関連商品

### 技工机 ラボベンチ

ロングセラーの歯科技工用机です。  
安心の初期装備で直ぐにお使いいただけます。

サイズ (W×D×H mm) : 1,210 × 600 × 約 835 mm  
棚の高さ (1段) : 約 250mm  
電源 : 100V ACアダプター 50/60 Hz  
照明 : 1,055 lm 11.9 W  
本体カラー : シルバーグレー

A1S イエロー A1S シルバーグレー

販売価格 330,000円(税別)

※バキュームモーター別売



※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

### ■製造販売元

## 名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F

& ショールーム TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524



取扱店

