

SMT サーベイヤー 可動式


(モデルテーブル付き)



正確なサベイラインを引き、 アンダーカット量を測定。

鉤線の位置決定にも最適な 軽量コンパクトモデル。

ツールセットが標準付属

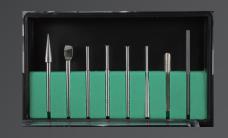



シンプルで扱いやす<u>い</u> エントリーモデル

シンプルなアーム構造で扱いやすい、 エントリーモデルのサーベイヤーです。

モデルテーブルと ツールセットが標準付属

全方向フリーのモデルテーブルと、 ツールセットが標準付属なのですぐに 模型を固定して使えます。

コンパクトサイズで スペースを有効活用

コンパクトサイズでラボ内や技工机上 のスペースを有効活用できます。

高さ 241 mm



底面 Φ168 mm

** アームの稼働によって横幅の 最大値は変わってきます。

高さを固定して アームを自由に伸縮。 付属のツール(6種類)を 自由に付け替え可能。





本体	
サイズ(W×D×H mm)	Ф168 × 241 mm
重量	1.9 kg

別売りオプション

ハンドピースホルダー

ハンドピースを装着するためのハンドピースホルダー。 簡易的なミリングを行いたい際にオススメです。





8,400円 (税別) 標準価格

同梱物

本体とモデルテーブルの他に、ツール(6種類)が標準付属しています。

- ・アナライジングロッド ・カーボンホルダー
- ・カーボンマーカー
- ·アンダーカットゲージ(0.25、0.50、0.75mm)
- ・ワックストリマー
- ・テーパーツール6°



- ** 単体販売も可能です。 標準価格: 6,000円(积8 ** 各種ツールの単体販売も可能です。 価格はお問い合わせ下さい。





・モデルテーブル ** 単体販売も可能です。 標準価格: 22,000円(税別)



標準価格 72,000円(税別)

※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

製造販売 名南歯科貿易株式会社



〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2番 26号 TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

東京オフィス: 〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F Meinan & ЭЭ-Л-4 TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524





お取扱店