

# ENDO DONTICS

## エンド治療用インスツルメント

### ガッタパーチャ除去用インスツルメント

ガッタパーチャを除去するために特別に設計された、寺内吉継先生デザインのドイツ製リムーバーです。

### ガッタパーチャリムーバー



ダイヤモンドコーティングされたELESで挿入口を作り、EGPRでガッタパーチャを効率的にかき出します。歯根に挿入しても視界を保てるように、限界まで細く設計された0.3ミリの「返し」が特徴です。

### ELES

ガッタパーチャへ挿入口を作るための専用インスツルメント

原寸大




### EGPR L/R(左/右)、EGPR U/D(上/下)

ガッタパーチャをかき出すための専用インスツルメント



EGPRシリーズは両方とも26mm長になります。

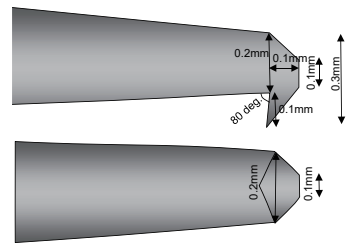

●ガッタパーチャリムーバー-L/R

針先方向(挿入方向)に対して、返しが左右にあります。

●ガッタパーチャリムーバー-U/D

針先方向(挿入方向)に対して、返しが上下にあります。



### 寺内 吉継 先生

- 医療法人社団インテリデント 理事長
- 東京医科歯科大学大学院 非常勤講師
- ボストン大学歯学部歯内療法科 非常勤臨床准教授
- パチェシア大学歯学部歯内療法科 非常勤教授
- トロント大学スタディープログラム講師
- AAE (米国歯内療法学会) 認定講師
- 日本顕微鏡歯科学会認定指導医

寺内先生は、東京医科歯科大学大学院の非常勤講師です。1993年にDDSを取得、1995年に東京医科歯科大学で研修医を修了・歯内療法学部から博士号を取得しました。特に破折ファイル除去における世界的権威の一人として、器具開発にも携わっています。国内外の学術雑誌にも記事を発表しており、「Cohen's Pathways of the Pulp」の第11版、第12版を含む、多くの章において執筆をされています。

### 価格表


全長：155mm 重量：約11.8g 材質：ステンレス/PEEK材  
\*\* 全てオートクレーブに対応しております。

商品番号	商品名	販売価格(税別)
015021	ガッタパーチャリムーバー EGPR-L/R 26 PEEK	各24,800円
015022	ガッタパーチャリムーバー EGPR-U/D 26 PEEK	
015023	ガッタパーチャリムーバー ELES 18/26 PEEK	
015010	ガッタパーチャリムーバー 3本セット	69,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000333



# エンドファイルホルダー

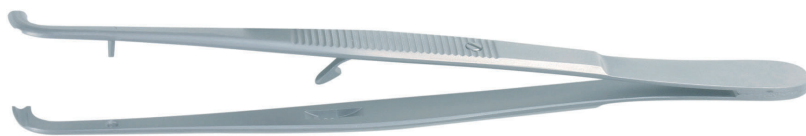

指や甲が邪魔にならず視界が確保できるため、口腔内が見やすくなります。

必要以上に口を大きく開ける必要がないため、患者様の負担を軽減できます。

「近心根、遠心根」に対応できる2通りの挟み方で、今まで届きにくかった近心時・遠心時・前歯裏や臼歯にもアクセスしやすくなります。

\*\* オートクレーブに対応しております。

遠近心時にファイルを保持した状態

しっかりとロックするので、口腔内での取り落としリスクを減らせます。

\*\*一部対応していないファイルがございます。



近心時

遠心時

全長：145mm 重量：約30.7g 材質：ステンレス

商品番号	商品名	販売価格(税別)
015016	エンドファイルホルダー	9,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000301

## MTA用インスツルメント

MTAのデリバリーのしやすさにこだわった専用インスツルメント

# MTA コンポジット インスツルメント CLEE



MTAブロックとセットで使いやすい、MTAセメント専用のデリバリーインスツルメントです。

ブラックコーティングで照明の光反射が軽減されるため、治療に専念できます。

垂直方向と水平方向に平らな面が双頭になっており、それぞれをデリバリー用(D)と余剰カット用(C)に使用します。

\*\* オートクレーブに対応しております。  
ケミクレーブはお避けください。

治療時の照明による反射の違い



未加工

サンド加工

ブラックコーティング

全長：158mm 重量：約11.9g 材質：ステンレス/PEEK材

商品番号	商品名	販売価格(税別)
015015	MTAコンポジットインスツルメント CLEE	10,800円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000334

## MTA用インスツルメント

必要な量だけMTAペーストを簡単計量

# MTA ブロック



必要な量だけMTAペーストを簡単計量できる、MTA用インスツルメントです。

0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm、1.2mmの溝盛りとレーザー刻印の表記でセメントで隠れてしまうことがなく、使いやすい形状です。

\*\* オートクレーブに対応しております。  
材質はPPSU(ポリフェニルスルホン)です。



全長：77mm 重量：約6.1g 材質：PPSU材

商品番号	商品名	販売価格(税別)
015014	MTAブロック	17,800円

\*製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2021.11.11 500

www.meinandental.com

製造販売元



名南歯科貿易株式会社  
www.meinandental.com

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書館ビル2F

TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



取扱店

