

ドイツ製の タングステン カーバイド使用

硬いメタルも
軽々と切削、
高強度な設計

毎日パワフルに使える、
FG用カーバイドバー。

折れにくくて削りやすい、
日々発生するコストを
しっかり抑えます。

Bur+Plus



1931

1958

バープラス ゴールド

メタル除去用

330

1557

1558



バープラス


天然歯治療用

高い切削力と耐久性、どちらも実現。

高切削力(約40g)と高耐久性

ドイツ製タングステンカーバイドの刃と安定した軸により、価格以上の高い切削力を実現しました。

また、ツーピースのカーバイドバーでよくあるネック部（刃部）が破折してしまう使用上のトラブルを根本的に解決しており、治療時のストレスを大きく削減できます。

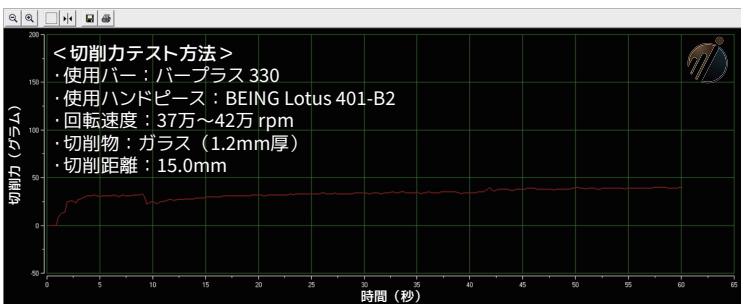

人気の形状から選べます

人気のある形状でラインナップをご用意しました。

メタル除去用



天然歯治療用



破折しにくい設計、思う存分つかえる。

メタル除去用 バープラスゴールド各種



ドイツ製タングステンカーバイド

1本彫で、高品質なドイツ製タングステンカーバイドを使用しています。安定した性能でメタル除去作業を行いたい方へオススメです。

天然歯治療用 バープラス各種



ドイツ製タングステンカーバイド

ステンレススチール

ブレイジング溶接

一番太い箇所で溶接をしているので、折れにくく、軸ブレが少ないのが特徴です。

カッター部（刃先）はドイツ製タングステンカーバイドを使用しています。従来の根本から破折するFG用カーバイドバーの溶接ポイントの設計を見直し、高耐久性を実現しました。

ラインナップ

各バー性能：推奨回転数 300,000rpm以下
最大許容回転数 450,000rpm

330	1557	1558	1931	1958
全長(mm): 19mm ヘッド直径(mm): 0.8mm ヘッド長さ(mm): 1.9mm	全長(mm): 19mm ヘッド直径(mm): 1.0mm ヘッド長さ(mm): 4.2mm	全長(mm): 19mm ヘッド直径(mm): 1.2mm ヘッド長さ(mm): 4.2mm	全長(mm): 19mm ヘッド直径(mm): 1.0mm ヘッド長さ(mm): 2.0mm	全長(mm): 19mm ヘッド直径(mm): 1.2mm ヘッド長さ(mm): 4.2mm

天然歯治療用 バープラス各種

ツーピース構造

各1シート5本入

¥700 (税別)

一般の名称：歯科用カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：23B2X10023000365

メタル除去用 バープラスゴールド各種

ワンピース構造

各1シート5本入

¥1,250 (税別)

一般の名称：歯科用カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：23B2X10023000366

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

www.meinandental.com

製造販売元

2022.09.02 3500DM



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

●名古屋本社
〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム
〒102-0082 東京都千代田区一橋町27-2精工図書ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店