




誰でも扱えるモデルビルダーを開発

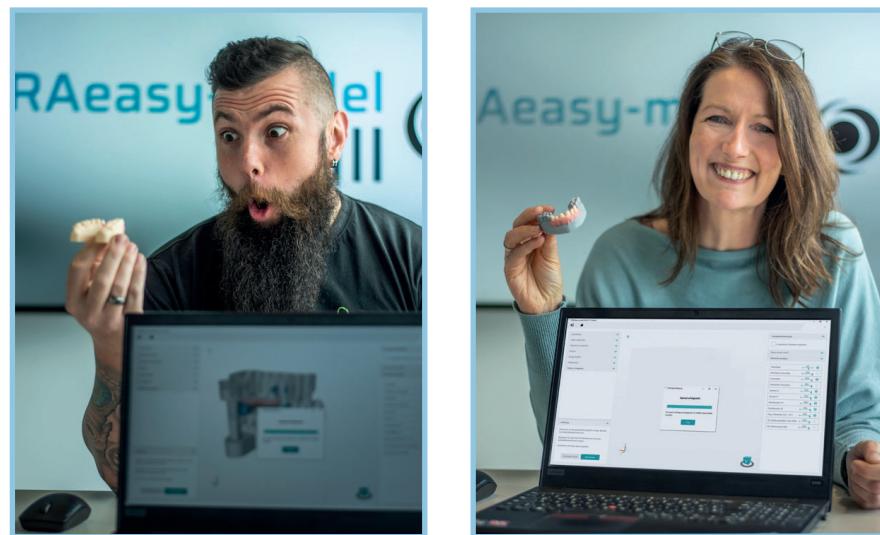

シェーライージーモデルは誰でも扱えて、高精度な歯科模型を製作できるCADソフトウェアです。

CADソフトウェアの機能をモデルビルダーに限定することで、導入しやすい価格を実現しました。製作できる模型は、歯科模型・支台歯模型・インプラント模型・平行模型 (**ロイヤル版のみ) で、幅広い製作業務に対応しています。

本商品と合わせて、下記にある3Dプリンター・関連商品もご参考ください。

関連商品

3Dプリンター

アシガMAX UV



XY解像度
62μm
積層ピッチ
最小10μm
院内にも!
コンパクト
サイズ

コンパクトなのに広い積層サイズ。静音性に優れた、ASIGAロングセラーの高精度出力3Dプリンターです。

詳細は弊社Webサイトにてご確認ください。

販売価格 1,800,000円(税別)

別途、トレーニング費・搬入取付費などが発生致します。
一般的名称：歯科技工用3Dプリンタ
一般医療機器登録番号:23B2X10023000346



3Dプリンター用樹脂も
多数揃えています。

窒素充填型光重合器 オトフラッシュ G171N2



口腔内で使用する積層物は生体親和性を最も要求されます。本機では、その生体親和性を確保できる便利な重合機です。

窒素充填下で酸素を排出してから光重合することで、未重合層を最小限にします。

対応波長：280-700nm、電源：AC100V 50/60Hz
** 別途窒素ガスをご用意頂く必要がございます。

販売価格 498,000円(税別)

一般的名称：歯科技工用重合装置 一般医療機器登録番号: 23B2X10023000346

弊社のデジタル機器は右にあるQRコードより
ご確認頂けます。
また、YouTubeの名南チャンネルでも紹介動画
を公開しております、是非チャンネル登録をして
ご視聴ください。



デジタル機器 商品ページ

模型製作用CADソフトウェア

SHERA
WERKSTOFF
TECHNOLOGIE

SHERAeasy-model

CAD Software for the model design



口腔内スキャナーで採取した印象データを
簡単にデジタルで模型製作できるCADソフト

 **Meinan**
名南歯科貿易株式会社

製造販売元

Meinan
名南歯科貿易株式会社

名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号
TEL : (052)799-4075 FAX : (052)353-6610
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F
& ショールーム TEL : (03)6261-3523 FAX : (03)6261-3524



お取扱店

SHERAeasy-model




Easy. Sure.
The new model builder.



SHERAeasy-model シェーライージーモデル

基本機能

イージーモデルでは、以下の基本機能で模型製作が可能です。

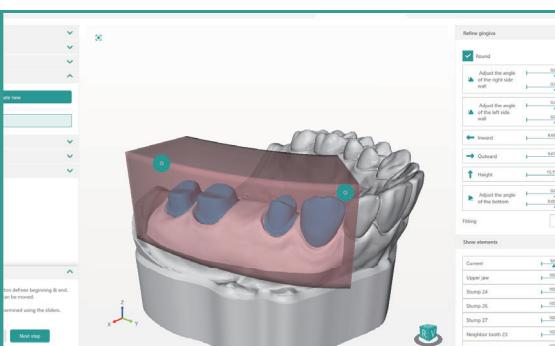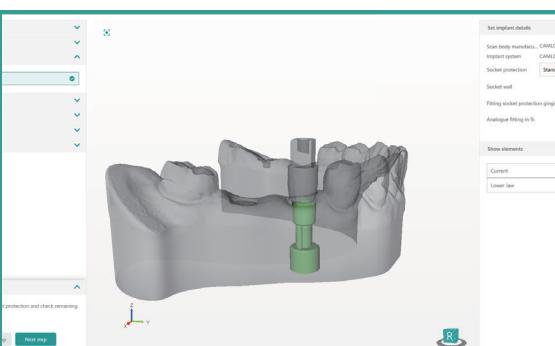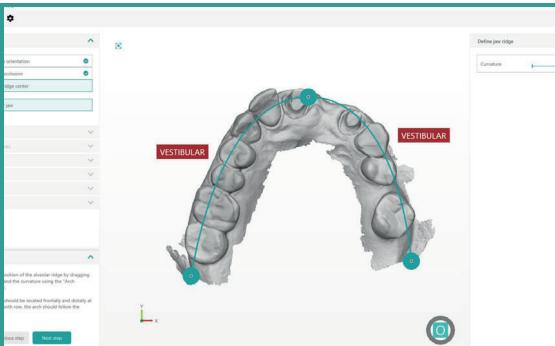

簡単な操作で模型製作

全顎模型から片顎模型まで、自由に製作が可能です。それぞれ支台歯模型やインプラント模型、矯正用の模型などあらゆる用途で使用していただけます。

スキャンデータの表面が荒れている場合、ソフト内のツールで調節・カットが行えます。

インプラント模型を製作

インプラントのアタッチメントとソケット装着を想定した模型製作ができます。これにより、プリント後に安心してラボアナログを挿入でき、そのまま技工物の製作が可能です。

** 対応していないメーカーもあります。順次追加予定です。

歯肉マスクも自由に設計



歯肉マスク（ガム）が必要な模型も簡単に製作可能です。支台歯の判定もワンクリックでできるため、支台歯のあるガム模型も最小限の手順で製作可能です。

** 歯肉マスク（ガム）の3Dプリントには、専用の樹脂を使用してください。

** ASIGA以外の3Dプリンターを使用する場合、ご自身でのパラメーター設定が必要です。

SHERAeasy-model Royal シェーライージーモデル ロイヤル

ロイヤル版には、基本機能に加えて以下のアドオンが付属しております。

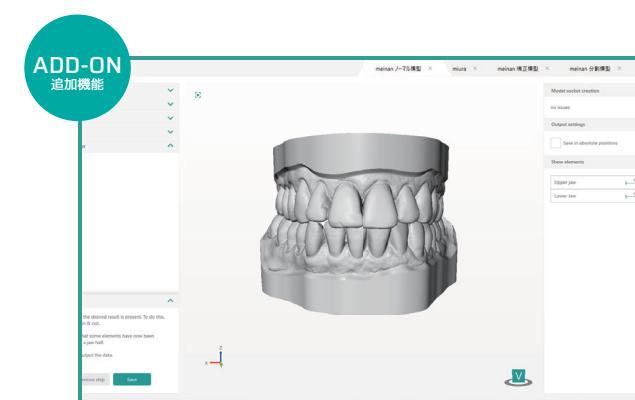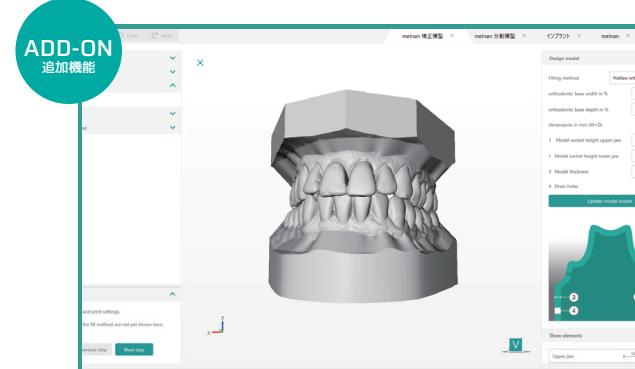

平行模型デザイン

矯正で必須の平行模型を製作できるアドオンです。台座のサイズや厚みも簡単に調節可能です。

大量に製作依頼が来ても、簡単に速く対応できるため、作業効率の大幅な向上に貢献できます。

ワンクリックデザイン

支台歯の無い歯科模型をワンクリックで製作できます。エクスポート前に細かな微修正も入れられるため、高品質な模型を短い製作時間で製作できます。

** データ荒れが無い、綺麗なSTLデータのみに対応しています。
データ荒れがある場合、正常な模型出力が出来ない場合があります。

比較表

製作機能	SHERAeasy-model	SHERAeasy-model Royal
歯科模型	●	●
支台歯模型	●	●
インプラント模型	●	●
平行模型	-	●
ワンクリックデザイン	-	●
販売価格	260,000円(税別)	290,000円(税別)

インストール費、トレーニング費用が別途発生します。また、年間更新料が発生します。詳細はお問い合わせください。

【PCの推奨スペック】
システム：Windows 11 64bit
グラフィック: DirectX 11 対応
RAM : 8 GB以上

