



Meinan
名南歯科貿易株式会社

スプリントなどの硬質シートの カットに最適



*写真ではZO-80 IIを使用しています。

切れる!

超音波ジスクッター ソニックカッター

スーパーハイモード搭載で堅牢性が高い
最上位モデル



ソニックカッター **ZO-80II**

- S-High
- High
- Normal

ソニックカッター **ZO-41II**

- High
- Normal

導入しやすい基本モデル



選べるモードで 快適な切れ味を実現

超音波ジスクッター 3つの特徴

01 硬質シートを簡単に高速カット



厚い硬質シートでもストレス無くスムーズなカットが可能です。作業速度と効率のアップで全体の生産性が向上します。

02 簡単な操作性で負担を軽減



ON/OFFボタンの簡単操作で直ぐにカットが開始できます。太すぎないハンドピースで握りやすく使用中も疲れません。

03 温度センサー搭載の安全設計

ZO-80II	S-High	最長 3 分動作
	High	最長 5 分動作
	Normal	最長 10 分動作
ZO-41II	High	最長 5 分動作
	Normal	最長 10 分動作


熱破損を防ぐセンサーにより、各モードで自動停止機能を搭載。機器へのダメージを防ぎ、安心してお使いいただけます。

ZO-80II

対応モード **Normal** **High** **S-High**

ソニックカッターZO-80 II は、ノーマルとハイに加えて、「スーパーハイ」モード** を搭載。成形した硬質シートをストレス無くカットできます。自動調整機能(T.A.F回路)や、内部パーツが最適化されており、堅牢性が高い最上位モデルです。

** スーパーハイは常時使う機能ではありません。

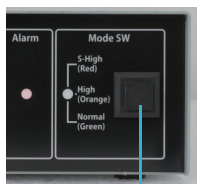

ボタンでモードの切り替えが可能

■販売価格
99,800円(税別)


■仕様

サイズ(W×D×H mm)	本体:185×169×55 mm ハンドピース:φ28×150 mm(刃含む) ハンドピーススケール:1.6メートル(ストレート)
重量(kg)	本体:約1.2 kg ハンドピース:約 350 g(ハンドピーススケール含む)
電源	100 V 50/60 Hz
消費電力	最大110 VA
定格電圧	DC 12 V
環境条件	10~35 °C
回路保護	ハンドピース内部に温度センサーを搭載

ZO-41II

対応モード **Normal** **High**

ソニックカッターZO-41 II は、ノーマルとハイの2つのパワーモードを搭載。自動調整機能(T.A.F回路)が採用されており、オーバーヒートによる回路へのダメージを防ぎます。ZOシリーズで一番販売されている人気の基本モデルです。

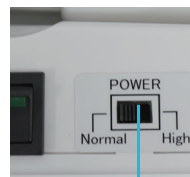

スイッチでモードの切り替えが可能

■販売価格
68,000円(税別)

サイズ(W×D×H mm)	本体:173×89×76 mm ハンドピース:φ32×144 mm(刃含む) ハンドピーススケール:1.6メートル(ストレート)
重量(g)	本体:約 260 g ハンドピース:約100 g(ハンドピーススケール含む)
電源	100 V 50/60 Hz
消費電力	最大80 VA
定格電圧	DC 12 V
環境条件	10~35 °C
回路保護	ハンドピース内部に温度センサーを搭載

ZO-80II専用 オプション フットスイッチ



ZO-80 II に接続して足で操作可能な、ON/OFFスイッチです。

■販売価格
10,000円(税別)

付属品

(ZO-80 II、ZO-41 II 共通)

- BDC-200P:1ケース(替刃約40枚入り 穴の開いた刃は利用不可)
- 刃固定具ZH04:1個
- 刃固定ビスHB03:3個
- 六角レンチRR02:1本
- ACアダプタ:1個

※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

■製造販売元



名南歯科貿易株式会社

本社: 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL:(052)799-4075 FAX:(052)353-6610
東京オフィス: 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F & ショールーム
TEL:(03)6261-3523 FAX:(03)6261-3524



取扱店

